

EmbryoScope™+ inkübatör

Kullanım kılavuzu



İçindekiler

1	Giriş	5
1.1	Uyarılar, kısıtlamalar ve sınırlı garanti	6
1.2	Kullanım amacı	10
1.3	Hedeflenen kullanıcılar.....	10
1.4	Klinik faydalar	11
1.5	Önerilen geçici çözümler	11
2	EmbryoScope+ inkübatöre genel bakış.....	12
2.1	EmbryoScope+ inkübatörün özelliklerine genel bakış	13
2.1.1	Barkod etiketleme sistemi	15
2.2	Kurulum ve gerekli koşullar	16
2.2.1	EmbryoScope+ inkübatörün taşınması ve yeni bir yere yerleştirilmesi	17
2.3	EmbryoScope+ inkübatörün başlatılması	17
2.4	EmbryoScope+ inkübatörün kapatılması ve tüm kültür kaplarının çıkartılması	18
2.5	Entegre bilgisayarın yeniden başlatılması	19
3	Destekleyen sistemler ile bağlantılar	20
3.1	Gaz	22
3.2	ES server	23
3.3	Harici alarm çıkışı	24
3.4	İnkübatör verileri	24
3.5	USB bağlantısı	24
4	EmbryoScope+ inkübatörü çalıştırma	25
4.1	İnkübatör ekranı	25
4.1.1	İnkübatör ekranında gezinme	26
4.1.2	Ayar noktası değiştirme modu	27
4.1.3	Doğrulama ve kalibrasyon modu.....	29
4.1.4	İnkübatör sıcaklığını kontrol etme	32
4.1.4.1	Sıcaklık ayar noktasını değiştirme.....	32
4.1.4.2	Sıcaklık kalibrasyonu	33
4.1.5	CO ₂ /O ₂ konsantrasyonun kontrol edilmesi	35
4.1.5.1	CO ₂ /O ₂ ayar noktasını değiştirme.....	35
4.1.5.2	CO ₂ /O ₂ konsantrasyonun onaylanması	36
4.1.5.3	CO ₂ /O ₂ konsantrasyonun kalibre edilmesi.....	39
4.1.6	İnkübatör O ₂ regülasyonu	41

4.1.6.1	O ₂ regülasyonunu açma/kapama	41
4.2	Bilgisayar ekranı	42
4.2.1	PC ana sayfa ekranı	42
4.2.1.1	Ana sayfa ekranındaki renkler	42
4.2.1.2	Bir kültür kabını başlatma	44
4.2.1.3	Barkod hataları.....	48
4.2.1.4	Tek bir kültür kabını çıkarma	50
4.2.1.5	Tüm kültür kaplarını çıkarma	50
4.2.1.6	Kültür kabındaki kültürün yeniden başlatılması.....	51
4.2.2	Kültür kabı genel görünüm ekranı	53
4.2.2.1	Kuyulardan görüntü çekiminin devre dışı bırakılması	55
4.2.3	Settings (Ayarlar) ekranı	56
4.2.3.1	Ekran koruyucuyu etkinleştirme ve devre dışı bırakma.....	57
5	EmbryoScope+ inkübatörü temizleme ve dezenfekte etme	58
5.1	EmbryoScope+ inkübatörün periyodik temizliği	58
5.2	EmbryoScope+ inkübatörü dezenfekte etme	61
6	VOC HEPA filtresini değiştirme.....	64
7	Ana sigortaların değiştirilmesi	70
8	Alarmlar, uyarılar ve bildirimler.....	72
8.1	Alarm, uyarı ve bildirim türleri.....	72
8.1.1	Alarmlar	72
8.1.2	Uyarılar.....	73
8.1.3	Bildirimler.....	73
8.2	Alarmların geçici olarak duraklatılması	74
8.3	Alarmların, uyarıların ve bildirimlerin gösterim renklerine genel bakış	75
8.3.1	Alarmlar	75
8.3.2	Uyarılar.....	75
8.3.3	Bildirimler.....	76
8.4	Aynı anda birden fazla alarm.....	76
8.5	Alarmların sıfırlanması	77
8.6	Alarmların grafik gösterimi ve operatörün yapması gerekenler.....	78
8.7	Uyarıların grafik gösterimi ve operatörün yapması gerekenler.....	82
8.8	Bildirimlerin grafik gösterimi ve operatörün yapması gerekenler.....	84
8.9	Hata durumlarına genel bakış ve kontrol ünitesinin tepkileri	85

8.10	Harici alarm sistemi.....	86
8.10.1	Harici alarm sistemine gönderilen hatalara genel bakış	86
8.10.2	Harici alarmlar ve uyarılar için gecikmeler.....	87
8.10.3	Harici alarm bağlantısı kurma	87
9	Acil durum prosedürü.....	88
9.1	Bir sistem arızası sonrası kültür kaplarını çıkarma	88
10	Teknik özellikler	90
11	EMC ve Yüksek Frekans (HF) teknik değerlendirmesi.....	95
11.1	Elektromanyetik emisyonlar	95
11.2	Elektromanyetik bağışıklık	96
12	Aksesuarlar ve malzemeler	100
13	Planlı servis ve bakım	101
13.1	Planlı servis	101
13.2	Planlı bakım	102
13.2.1	Maintenance (Bakım) ekranı.....	103
13.2.2	Aylık inkübasyon raporu oluşturma	104
13.2.3	VOC HEPA filtresi ve sensör bakımı	105
14	Semboller ve etiketler	108
14.1	Ürün bilgi etiketleri	108
14.2	Uyarı etiketleri.....	109
14.3	Bağlantı etiketleri	110
14.4	Nakliye ambalajındaki etiketler	111
15	Atıkların tahliyesi	112
16	İletişim bilgileri.....	113

CohortView, CulturePro, EmbryoScope, EmbryoSlide, EmbryoViewer, Guided Annotation, iDAScore ve KIDScore, Vitrolife Group'a ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

©2024 Vitrolife A/S. Tüm hakları saklıdır.

1 Giriş

Bu kullanım kılavuzu, EmbryoScope+ inkübatörün nasıl kullanılacağıyla ilgili bilgiler sağlamaktadır.

İnkübatörün hatasız kullanımı için, son kullanıcının *Planlı servis ve bakım* başlıklı bölümde belirtilen programa dikkatle uyması şiddetle tavsiye edilmektedir.

EmbryoScope+ inkübatör, ES-P1 modeli, eğitimli bir personel tarafından bu kullanım kılavuzunda bulunan talimatlara göre çalıştırılması gereken medikal bir cihazdır. Kullanıcıların cihazı çalıştırabilecek ve cihaz kullanımıyla ilgili prosedürleri yerel yeterlilik standartlarına uygun olarak gerçekleştirebilecek nitelikte olmaları gerekmektedir.

Ürün, UL 60601-1 sürüm 1 ve IEC 60601-1:2012 standartları; sınıf I, tip B eş değeri gerekliliklerine uygundur. EmbryoScope+ inkübatör, kesintisiz çalışma için uygundur.

- EmbryoScope+ inkübatör ve ilişkili aksesuarlar sınıf IIa olarak sınıflandırılan medikal cihazlar ile ilişkili 2017/745 AB Mevzuatı gerekliliklerine uygundur.
- ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + A1 + A2 ile uyumludur.
- CAN/CSA - C22.2 No. 60601-1:R2013 ekine göre onaylanmıştır.

1.1 Uyarılar, kısıtlamalar ve sınırlı garanti

Kullanıcılar, inkübatörü çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunu okumayı ve anlamayı, ve güvenlik talimatlarına uymayı kabul etmelidir.

KULLANIMA İLİŞKİN KISITLAMALAR

- EmbryoScope+ inkübatör, yalnızca Vitrolife tarafından onaylanan bir kişi tarafından kullanımı konusunda eğitilmiş kişiler tarafından kullanılabilir.
- EmbryoScope+ inkübatör, yalnızca Vitrolife tarafından üretilen ve satılan tek kullanımlık steril kültür kapları ile kullanılabilir.
- Kültür kapları tekrar kullanılamaz.
- Kültür kapları, EmbryoScope+ inkübatöre yerleştirilmeden önce steril kapaklarla kapatılmalıdır.
- EmbryoScope+ inkübatör ıslak ortamlarda kullanılamaz. İnkübatörün içinde ya da yakınında kültür medyum ve yağı ve bu kullanıcı kılavuzunda belirtilen temizlik maddeleri dışında hiçbir sıvı kullanılamaz.
- İnkübatörün aşırı ısınmasına neden olabileceğinden, cihazın arkasındaki havalandırma deliklerini kısmen ya da tamamen kesinlikle kapatmayın.
- Kullanıcıların, EmbryoScope+ inkübatörün çalıştırılmasından kaynaklanan tüm olayları ve/veya hasta, operatör veya bakım çalışanı yaralanmalarını rapor etmek için derhal Vitrolife ile iletişime geçmesi gerekir. İnkübatör ile ilgili olarak meydana gelen tüm ciddi olaylar, kullanıcının yer aldığı Üye Devlet'in yetkili makamına bildirilmelidir.
- EmbryoScope+ inkübatör cihazını kullanırken bir kaza meydana gelirse Vitrolife tarafından yetkilendirilmiş bir kişi tarafından kontrol edilene kadar inkübatörü kullanmayın.

UYARI

- EmbryoScope+ inkübatörde emniyetli durdurma elemanlarına sahip hareket eden parçalar vardır. Güvenlik sensörlerini engellemeye çalışmayın. Güvenlik sensörleri engellenirse, inkübatör açıkken bir parmağın ya da elin içine sokulması tehlikelidir ve yaralanmalara neden olabilir.
- Elektrik şoku riskini önlemek için bu inkübatör sadece koruyucu topraklaması olan bir şebeke kaynağına bağlanmalıdır.
- Yeterli değerlere sahip olmayan, çıkarılabilir ana elektrik kabloları kullanılmamalıdır. Elektrik kaynağı değerleri için bkz. bölüm 10.
- İnkübatör, operatörün inkübatörün arkasındaki ana güç anahtarını açık/kapalı duruma getirmesine izin verecek şekilde yerleştirilmelidir.
- Taşınabilir ve mobil RF iletişim cihazı, EmbryoScope+ inkübatörünü etkileyebilir.
- İnkübatör, Vitrolife tarafından belirtilen şekilde kullanılmazsa tehlikelere karşı koruma seviyesi azalabilir.
- EmbryoScope+ inkübatör, hava, oksijen veya azot oksit ile yanıcı bir anestezi karışımının mevcut olduğu yerlerde kullanım için uygun değildir.
- Her iki haftada bir sıcaklık ve CO₂ ve O₂* seviyeleri ölçümü yoluyla düzenli kalite kontrol denetimleri yaparak EmbryoScope+ inkübatörün performansını doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır.
* Yalnızca klinik düşük O₂ konsantrasyonu ile inkübasyon yapıyorsa geçerlidir.
- İlk çalıştırma sırasında ve inkübatörün kapatılmasından sonra her zaman bu kullanım kılavuzunda belirtilen kalibre edilmiş, harici doğrulama cihazlarını kullanarak gaz ve sıcaklık seviyelerini doğrulayın. Sadece inkübatör ekranında gösterilen değerlere GÜVENMEYİN.

KURULUM VE SERVİS

- EmbryoScope+ inkübatörün kurulumu ve servisi sadece yetkili bir Vitrolife çalışanı tarafından yapılmalıdır. EmbryoScope+ inkübatör, kurulumunun gerçekleştirildiği yerde durmalıdır. Vitrolife tarafından yetkilendirilen bir çalışanın gözetimi olmadan EmbryoScope+ inkübatörün bağlantısı kesilirse ve/veya cihaz hareket ettirilirse inkübatör artık klinik kullanım için onaylı değildir ve garantisi geçersiz sayılabilir.
- EmbryoScope+ inkübatör veya parçaları modifiye edilirse güvenli kullanımın devam ettiğinden emin olmak için Vitrolife tarafından yetkilendirilmiş bir kişi tarafından uygun denetim ve test gerçekleştirilmelidir.
- EmbryoScope+ inkübatörü temizlerken ve dezenfekte ederken, her zaman için bu kullanım kılavuzunun 5. bölümünde listelenen kimyasal maddeleri, belirtildiği gibi kullanın.

EMBRYOSCOPE+ İNKÜBATÖRÜN TAŞINMASI VE YENİ BİR YERE YERLEŞTİRİLMESİ

- EmbryoScope+ inkübatör hâlâ nakliye kutuları içindeyken sadece bir forklift ya da palet kaldırmak için kullanılarak taşınmalıdır. Vitrolife tarafından yetkilendirilmiş bir kişi olmadan nakliye kutularını AÇMAYIN.
- EmbryoScope+ inkübatör ambalajından çıkartıldığında, sadece iki kişi tarafından, bu kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlara uygun şekilde inkübatörü destekleyerek ve sadece Vitrolife tarafından yetkilendirilmiş bir kişinin gözetimi altında taşınmalıdır (bkz. bölüm 2.2.1).

HARİCİ EKİPMAN İLE BAĞLANTI

(EN 60601-1 MEDİKAL ELEKTRİKLİ EKİPMANLAR - BÖLÜM 1)

- Sinyal girişi, sinyal çıkışı veya diğer konnektörlerle bağlantı kurmaya yönelik harici cihaz ilgili IEC standardı (yani medikal elektrikli ekipmanlar için EN 60601-1:2006 – Bölüm 1) ile uyumlu olmalıdır. Ayrıca, tüm bu kombinasyonlar (sistemler) EN 60601-1:2015 – Bölüm 2, Temel güvenlik ve gerekli performans için genel gereklilikler standardı ile uyumlu olmalıdır. EN 60601-1:2006 – Bölüm 1 ile uyumlu olmayan ekipmanın hastanın yakınında tutulmaması gerekir, örneğin; hasta veya hasta desteğinden en az 1,5 m uzaklıkta tutulmalıdır.
- Sinyal girişi, sinyal çıkışı veya diğer konnektörlere harici ekipman bağlayan herkes bir sistem oluşturmuştur ve bu nedenle sistemin EN 60601-1:2006 – Bölüm 1 gereklilikleri ile uyumlu olmasını sağlamakla yükümlüdür. Eğer kuşku bir durum mevcutsa, yetkili bir medikal teknisyen veya yerel temsilciniz ile iletişime geçin.

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK

- EmbryoScope+ inkübatör, test edilmiştir ve elektromanyetik uyumluluk açısından IEC 60601-1-2 baskı 4.0'daki medikal cihazlara dair sınırlar ile uyumlu olduğu görülmüştür. Bu sınırlar, tipik bir medikal kurulumda zararlı enterferansa karşı tam koruma sağlaması için tasarlanmıştır.

IEC 60601-1-2 Edisyon 4.0 standardına uygunluk, EmbryoScope+ inkübatör yakındaki cihazlarla arasında minimum mesafe kalacak şekilde yerleştirildiğinde uyumluluk sağlar. EmbryoScope+ inkübatör diğer cihazlara yakın biçimde yerleştirilirse tüm cihazların performansının bundan etkilenip etkilenmediğinin gözlemlenmesi gerekmektedir.

EmbryoScope+ inkübatör, radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; eğer talimatlar uyarınca kurulmazsa ve kullanılmazsa etrafta bulunan diğer cihazlarda zararlı enterferansa neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda enterferans oluşmayacağına dair bir garanti mevcut değildir. İnkübatör diğer cihazlarda, inkübatörün açılıp kapanması ile anlaşılabilir zararlı enterferansa neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir ya da birkaçını alarak bu durumu düzeltmeye çalışması gerekmektedir:

- Alıcı cihazı yeniden yönlendirin veya konumlandırın;
- Cihazlar arasındaki mesafeyi artırın;
- İnkübatörü, diğer cihazların bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerinde bulunan bir prize bağlayın.

Yardım için üretici, temsilci veya bayiye başvurun.

UYARI

- Sistem üreticisi tarafından iç bileşenlerin yedek parçaları olarak satılan transdüktörler ve kablolar istisna olmak üzere belirtilenler dışında aksesuarların, transdüktörlerin ve kabloların kullanılması emisyonların artmasına ya da cihaz veya sistemin bağışıklığının azalmasına neden olabilir.
- EmbryoScope+ inkübatör diğer cihazlarla bitişik ya da üst üste yerleştirilerek kullanılmamalıdır. Eğer bitişik ya da üst üste yerleştirilerek kullanılması gerekiyorsa, inkübatörün, kullanılacağı yapılandırmada normal çalışmasının kontrol edilmesi gerekmektedir.

GİZLİLİK

- Bu kılavuzda sunulan tüm kimlik numaraları, adlar ve tedavi verileri kurgusaldır.

SINIRLI GARANTİ

- Vitrolife, ilk kurulum tarihinden itibaren bir (1) yıllık süre içerisinde EmbryoScope+ inkübatörün malzeme ve işçilik hatalarına karşı garanti altında olduğunu beyan eder.

Inkübatörün kurulumu, bakımı, onarımı veya yer değişimi Vitrolife tarafından onaylı personel dışında herhangi biri tarafından gerçekleştirilirse bu sınırlı garanti derhal geçerliliğini yitirir.

Sınırlı garanti aşağıdaki durumlardan kaynaklanan zararları kapsamaz:

- a) rutin bakımın bu kullanım kılavuzuna uygun şekilde gerçekleştirilmemesi;
- b) kazalar, inkübatör cihazının kötüye kullanılması, hatalı kullanılması ya da yanlış uygulama yapılması;
- c) bu kullanım kılavuzunda açıklanan talimatlara uymayan kullanım veya çalıştırma durumu; veya
- d) normal eskime ve aşınma.

GENEL SİBER GÜVENLİK TAVSİYELERİ

- Kullanıcıların, cihazın amaçlanan kullanıcı ortamında, tasarlandığı şekilde çalışmasını sağlamak için siber güvenlik riskini azaltmak üzere aşağıdaki önlemleri almaları önerilir:
 - Personelin siber güvenlik bilinci konusunda düzgün şekilde eğitildiğinden emin olun
 - Yetkisiz kullanıcılar tarafından cihaza fiziksel erişimi önleyin.
- Kullanıcıların, herhangi bir siber güvenlik açığı durumundan veya güvenlikle ilgili şüpheli olaylardan haberdar olduklarında herhangi bir gecikme olmadan Vitrolife A/S'yi bilgilendirmeleri gerekmektedir.
- Siber güvenlik riskinin azaltılmasına ilişkin daha fazla bilgi için lütfen Vitrolife'ın bu konuda hazırladığı özel kılavuza bakın.

1.2 Kullanım amacı

EmbryoScope+ inkübatörün kullanım amacı, gamet ve/veya embriyo kültürü için kontrollü sıcaklık ve gaz konsantrasyonlarına (CO₂ ve isteğe bağlı O₂) sahip bir ortam sağlamak ve inkübasyon sırasında bunların görüntülerinin almaktır.

1.3 Hedeflenen kullanıcılar

Vitrolife A/S sertifikalı eğitmenler tarafından eğitilmiş IVF kliniklerinde embriyologlar, diğer laboratuvar personeli ve klinik personeli.

1.4 Klinik faydalar


- Artan embriyo gelişimi
- Artan implantasyon/gebelik oranı
- Azalan gebelik kaybı oranı.

1.5 Önerilen geçici çözümler

Yazılımdaki ve önerilen geçici çözümlerdeki bilinen tüm anormallikler ve kısıtlamalar hakkında ayrıntılar için Vitrolife tarafından verilen ayrı broşüre bakın.


2 EmbryoScope+ inkübatöre genel bakış

EmbryoScope+ inkübatör, gelişimleri sırasında her bir embriyo üzerinde bir dizi gözetimsiz ölçüm gerçekleştiren üç gazlı bir inkübatördür. Ölçümler şunları içerir: çoklu odak düzlemlerinde time-lapse mikroskopi ve inkübasyon koşullarının kaydedilmesi. Ayrı işlemci birimleri, güvenli ve güvenilir bir çalışma sağlamak için inkübasyon ortamını ve veri toplamayı kontrol eder.

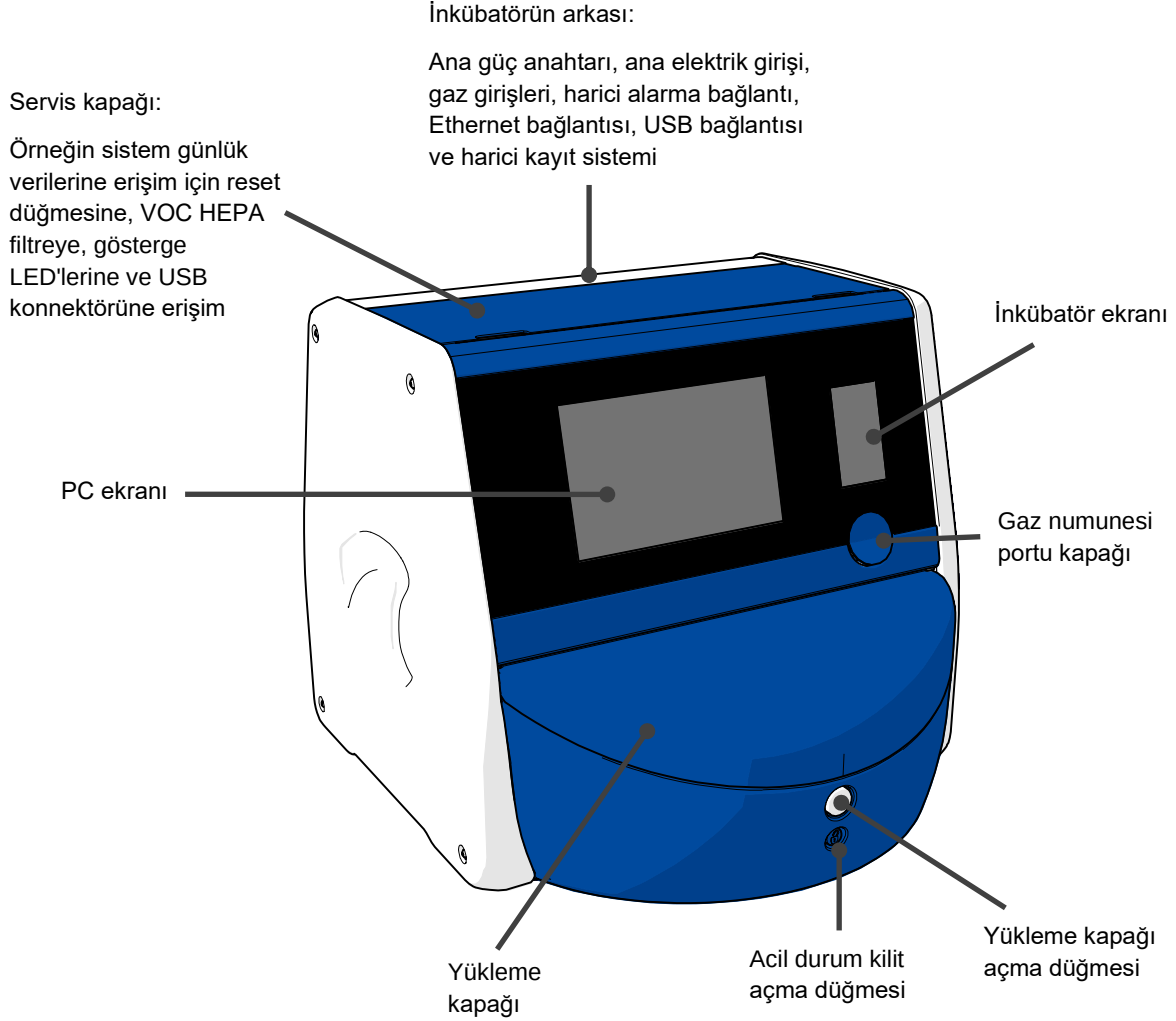

2.1 EmbryoScope+ inkübatörün özelliklerine genel bakış

EmbryoScope+ inkübatör, görüntü çekimini kontrol eden bir bilgisayar ve mikroskopi sistemi ve inkübasyon koşullarını kontrol eden bir gaz ve sıcaklık sisteminden oluşur.

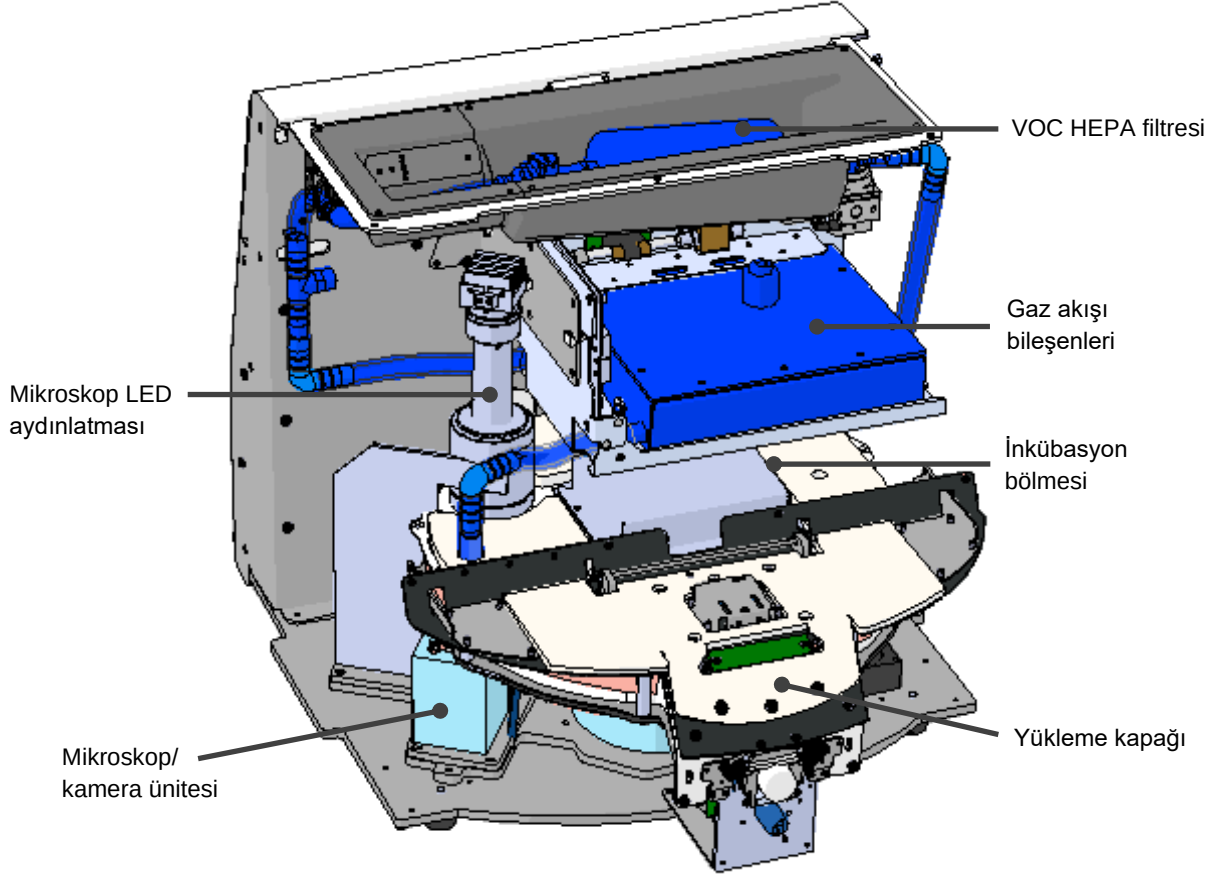


Yukarıdaki resimde bulunan mavi bileşenler, inkübatörün gaz ve sıcaklık sistemini göstermektedir. Bu bileşenler, inkübasyon bölgesinde istenen gaz konsantrasyonlarının korunmasını sağlar. Gaz, inkübasyon bölgesine girmeden önce bir VOC HEPA filtresinden geçirilir. Aynı sistem, inkübasyon bölgesindeki sıcaklık koşullarını da kontrol eder.

İnkübe edilen embriyolar, inkübasyon bölgesindeki kültür kabında bulunur. İnkübasyon bölgesindeki kültür kabı tutucusu disk şeklindedir ve maksimum 15 kültür kabı kapasitesine sahiptir.


Entegre mikroskop, inkübasyon bölgesinin dışına yerleştirilen ayrı bir ünedir. Mikroskop, bir LED aydınlatma ünitesi ve mikroskop/kamera ünitesinden oluşur. Kurulum, yukarıdan aydınlatmalı ve incelenen embriyoların alt kısmına yerleştirilen bir objektif aracılığıyla yapılan gözlem gibi özelliklere sahip bir normal inverted mikroskoba karşılık gelmektedir.

Görüntü çekimi sırasında kültür kabı tutucusunda bulunan her kültür kabı, mikroskopi sistemine doğru döndürülür ve her kültür kabındaki tüm embriyolar için ayrı ayrı görüntü dizileri çekilir. Bu işlem sırasında tüm embriyolar, rahatsız edilmeyen bir inkübasyon ortamında kalırlar.

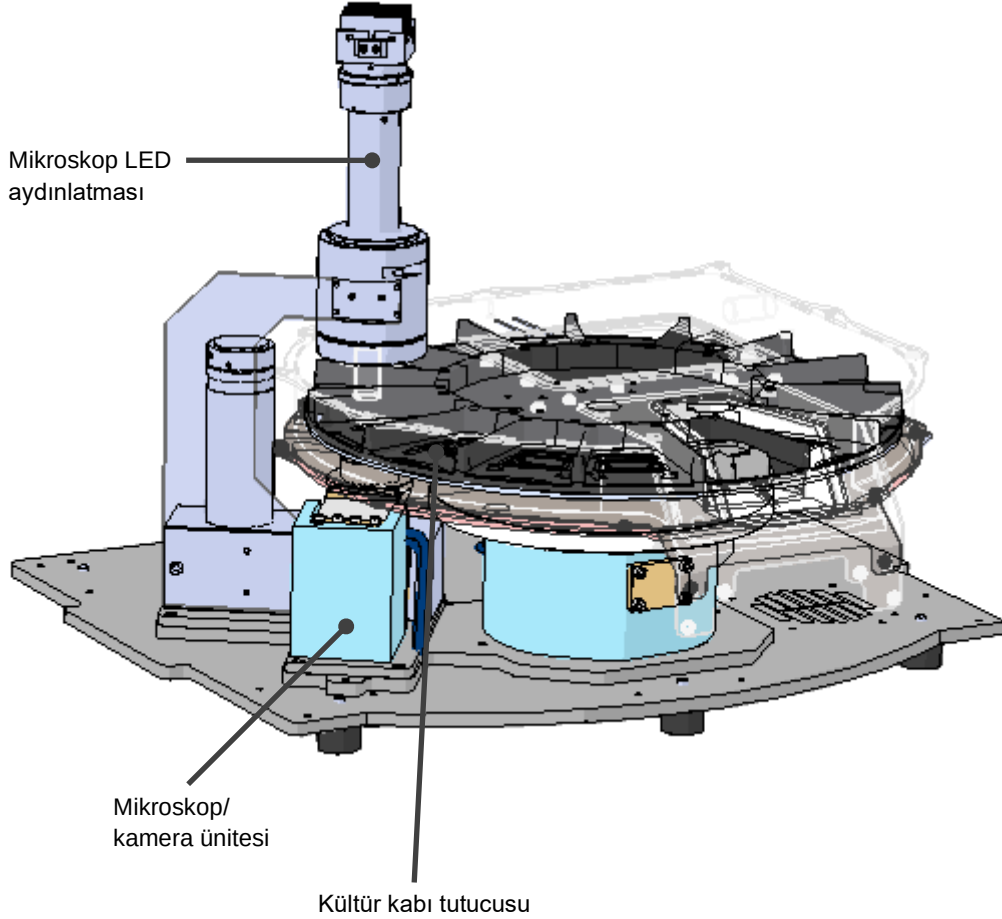

Kültür kapları, EmbryoScope+ inkübatör'deki kültür kabı tutucusuna yerleştirilir. Kültür kabı tutucusu, bir termostatlara kontrol edilen bir sandviç yapısıdır. Tutucu, kültür kaplarına doğrudan ısı transferi sağlar ve time-lapse görüntüleme sırasında kültür kaplarını otomatik olarak yükleme konumundan kamera konumuna hareket ettirir.

İnkübasyon bölgesindeki inkübasyon koşulları, yükleme kapağının açılmasından etkilenmez. Yükleme konumunda kültür kabının etrafındaki çıkarılabilir çerçeve ile kültür kapları arasındaki sabit bölmeler, inkübatör içindeki kapları dışarıdaki atmosferik koşullardan korur.

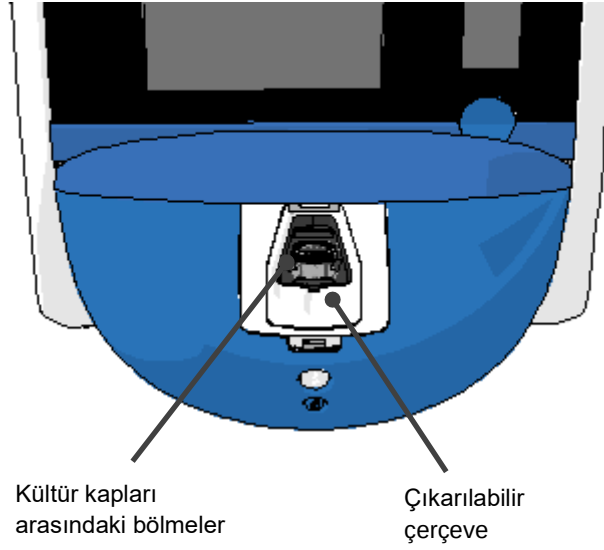

2.1.1 Barkod etiketleme sistemi

Barkod etiketlerini kullanmak için operatörün EmbryoViewer'ı kullanarak etiketleri yazdırması ve kültür kabı üzerinde belirlenmiş alana yapıştırması gerekmektedir (bkz. kültür kapları kullanım kılavuzu).

Barkodda yer alan bilgiler, yeni bir kültür kabı yerleştirildiğinde PC ekranının **Identification** (Tanımlama) alanında gösterilir:



2.2 Kurulum ve gerekli koşullar

İnkübatör, kurulum kontrol listesine göre kurulmalıdır. İnkübatörün, Vitrolife tarafından onaylı olmayan kişiler tarafından taşınmaması ya da bağlantısının kesilmemesi gerekmektedir (inkübatör taşınacağıyla ilgili bilgi için bölüm 2.2.1'e bakın).

Kurulum gereklilikleri:

- 20 °C ila 28 °C arasında sabit sıcaklığa sahip temiz bir oda.
- Sağlam bir masa. Cihazın taban oturma alanı yaklaşık 0,6 m x 0,6 m ölçülerindedir. Laboratuvar tezgahı için cihazın oturma alanına ek olarak bakım işlemlerinin yapılabilmesi için cihazın her iki tarafında en az 22,5 cm'lik mesafe bırakılması gerekmektedir. Ayrıca, EmbryoScope+ inkübatör ile aynı tezgahta yer alan diğer cihazlar arasında en az 22,5 cm mesafe bırakılması gerekmektedir.
- Bağlantı fişi, topraklama kutupludur ve yerel gereklilikleri karşılar.
- Ortamın 0,6 bar ila 1 bar üzerinde basınçta sabit CO₂ çıkışı sağlayan basınç regülatörüne sahip CO₂ gaz kaynağı.
- Ortam basıncından 0,6 bar ila 1 bar daha yüksek basınçta sabit N₂ çıkışı sağlayan basınç regülatörüne sahip N₂ gaz kaynağı (yalnızca kliniğin düşük O₂ konsantrasyonu ile inkübasyon yapmak istemesi durumunda gereklidir).
- Medikal elektrikli ekipman, elektromanyetik uyumluluk (EMC) ile ilişkili özel önlemler gerektirir ve sağlanan EMC bilgileri doğrultusunda kurulup hizmete alınması gerekir.


NOT

- İnkübasyon bölmesinde soğutma olanakları bulunmamaktadır. İnkübasyon sıcaklığı, her zaman ortam sıcaklığından daha yüksek olacaktır. Eğer sıcaklık, belirtilen limitlerin üzerine çıkarsa inkübatör bölmesi içindeki sıcaklık, ayar noktasını aşabilir.
- Bir gereklilik olmasa bile, elektrik kesintisi durumunda kararlı çalışma koşullarını sağlamak için inkübatöre bir kesintisiz güç kaynağı (UPS) bağlanması kesinlikle önerilir. EmbryoScope+ inkübatöre bağlanacak herhangi bir UPS'in, aşağıdaki yönetmelikler ve uyumlaştırılmış standartlara uygun olması gerekmektedir:
 - Düşük Voltaj Yönetmeliği 2014/35/AB
 - Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2014/30/AB
 - EN 62040-1:2009 Kesintisiz güç sistemleri (UPS) – Bölüm 1: UPS'ler için genel ve güvenlik gereklilikleri
 - EN 62040-2:2006 Kesintisiz güç sistemleri (UPS) – Bölüm 2: Elektromanyetik uyumluluk (EMC) gereklilikleri.

İnkübatörün nasıl kurulacağıyla ilgili daha fazla bilgi için lütfen *Planned service and maintenance* (Planlı servis ve bakım) başlıklı kılavuza bakın (sadece İngilizce dilinde).

2.2.1 EmbryoScope+ inkübatörün taşınması ve yeni bir yere yerleştirilmesi

EmbryoScope+ inkübatör, inkübatörün her iki yanında duracak iki kişi tarafından taşınmalıdır. Resimde gösterildiği şekilde bir elinizi inkübatörün yan tarafından alta, diğer elinizi de inkübatörün ön tarafını destekleyecek şekilde yerleştirin:

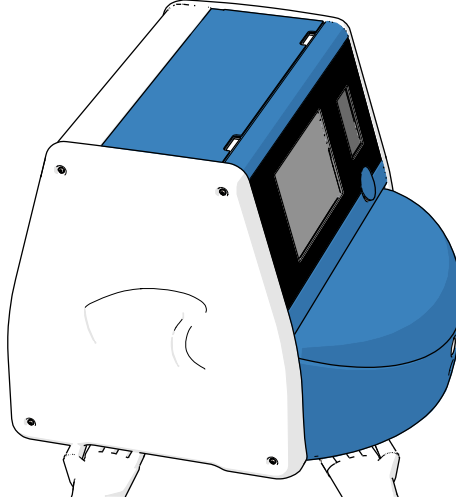

EMBRYOSCOPE+ İNKÜBATÖRÜN TAŞINMASI VE YENİ BİR YERE YERLEŞTİRİLMESİ

- EmbryoScope+ inkübatör hala nakliye kutuları içindeyken sadece bir forklift ya da palet kaldırıcı kullanılarak taşınmalıdır. Vitrolife tarafından yetkilendirilmiş bir kişi olmadan nakliye kutularını AÇMAYIN.
- EmbryoScope+ inkübatör ambalajından çıkartıldığında, sadece iki kişi tarafından, bu kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlara uygun şekilde inkübatörü destekleyerek ve sadece Vitrolife onaylı bir kişinin gözetimi altında taşınmalıdır.

2.3 EmbryoScope+ inkübatörün başlatılması

EmbryoScope+ inkübatörü başlatmak için (ör. servis ya da temizleme sonrası) inkübatörün arkasında bulunan yeşil renkteki ana güç anahtarına basarak inkübatörü açın. Bunu yaptığınızda inkübatör ve entegre bilgisayar otomatik olarak başlatılır.

Komple kapanma sonrası ve inkübatörün ilk kurulumu sırasında inkübatörün her tarafında sıcaklığın dengelendiğinden emin olmak için EmbryoScope+ inkübatörün kullanımdan en az üç saat önce açılması gerekmektedir. EmbryoScope+ inkübatörün güç konnektörü ile topraklandığından, gaz bağlantılarında kaçak olmadığından ve bağlı gaz tüplerinin dolu olduğundan emin olun.

Bağlı CO₂ ve N₂ gaz tüplerindeki basıncın ortam basıncından 0,6 bar ile 1,0 bar daha yüksek bir seviyeye azaltmak için bir gaz regülatörünün kullanılması gerekmektedir.

2.4 EmbryoScope+ inkübatörün kapatılması ve tüm kültür kaplarının çıkartılması

NOT
Acil bir durum söz konusuysa bölüm 9'de açıklanan prosedürü izleyin.

EmbryoScope+ inkübatörü kapatmak ve tüm kapları çıkartmak için (ör. servis veya temizlik için), aşağıda açıklanan prosedürü izleyin.


1. PC ana sayfa ekranında ayarlar simgesine basın ve **Shutdown** (Kapat) seçeneğini seçin.
2. **Remove all culture dishes and shut down** (Tüm kültür kaplarını çıkart ve kapat) seçeneğini seçin ve **OK**'ye (Tamam) basın. İlk kültür kabı, kilidi açılmış olan yükleme kapağına doğru hareket eder.
3. Yükleme kapağını açın ve kültür kabını çıkartın.
4. Yükleme kapağını kapatın ve kültür kabını çıkarttığınızı onaylayın.
5. Tüm kültür kaplarını inkübatörden çıkartana kadar işleme devam edin.
6. **Shut down computer** (Bilgisayarı kapat) seçeneğini seçin.
7. Inkübatörü tamamen kapatmak için cihazın arkasında yer alan ana güç anahtarını kullanın.

2.5 Entegre bilgisayarın yeniden başlatılması

Kurtarılamaz bir hata meydana geldiğinde ekranda bir hata mesajı gösterilir ve **OK**'e (Tamam) tıkladığınızda entegre bilgisayar otomatik olarak tekrar başlatılır.

Bilgisayarı manuel olarak yeniden başlatmak için:

1. İnkübatörün üstündeki kapağı açın.
2. Bir kalem ya da tükenmez kalem gibi sivri uçlu bir nesne kullanarak servis kapağının altındaki küçük kırmızı düğmeye basın:

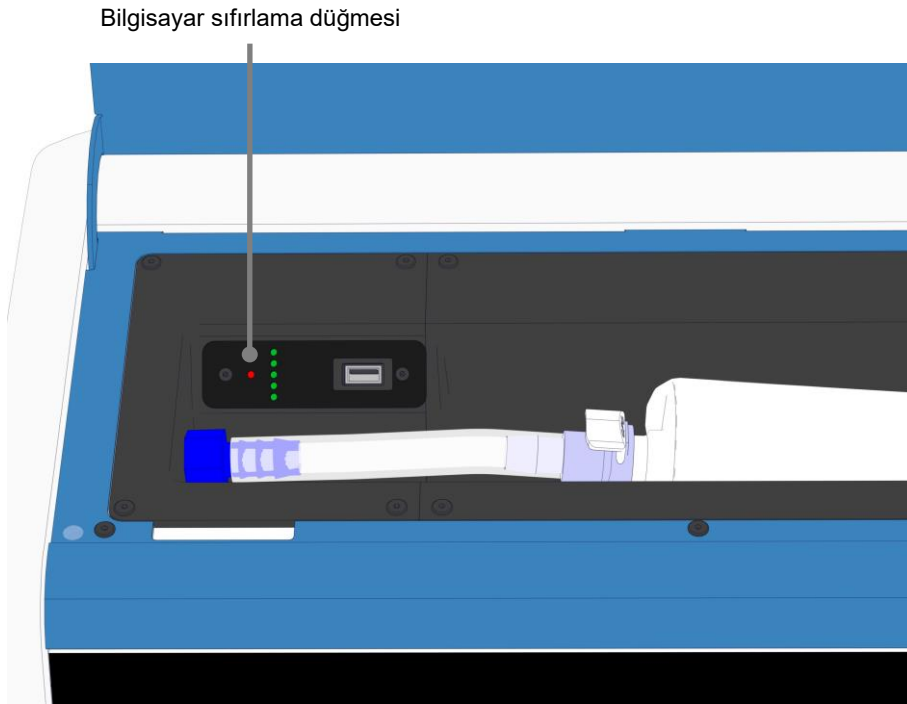



Bilgisayar şimdi kapanacaktır.

3. Bilgisayarı yeniden başlatmak için küçük kırmızı düğmeye tekrar basın.


3 Destekleyen sistemler ile bağlantılar

EmbryoScope+ inkübatör cihazının arkasında bir dizi konnektör ve yuva bulunur. Bunlar, kurulum sırasında ilgili bağlantıları yapmak üzere sadece Vitrolife tarafından onaylı kişiler tarafından kullanılabilir. Operatörlerin gözetim olmadan herhangi bir boruyu/kabloyu kullanmaması ya da inkübatöre takmaması gerekmektedir.

Seri numarası 4000'den küçük (solda, aşağıda) ve seri numarası 4000'den büyük (sağda, aşağıda) EmbryoScope+ inkübatörlerde konnektör ve yuvaların bulunduğu panel birbirinden farklıdır.

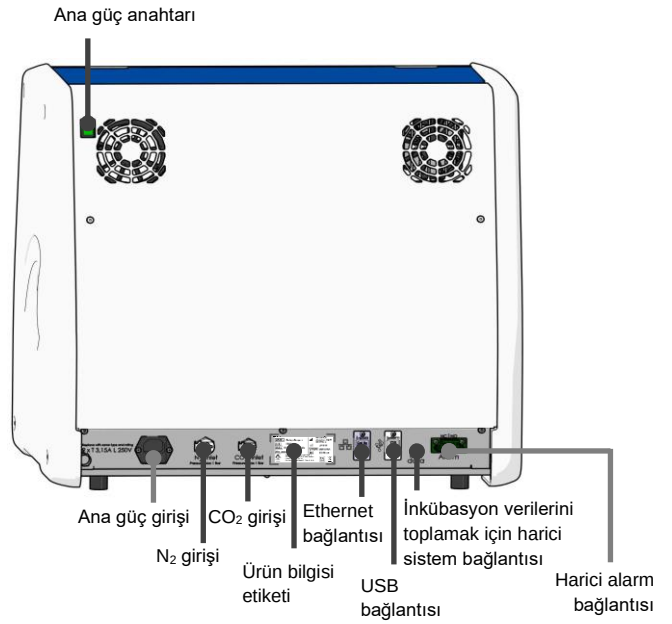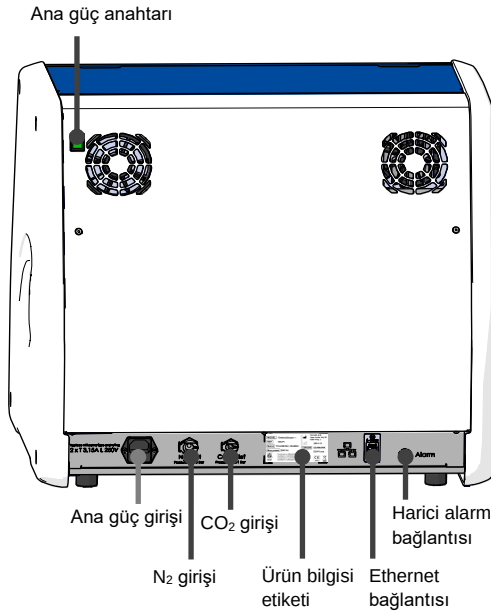


Ayrıca, seri numarası 4000'den büyük olan EmbryoScope+ inkübatörlerde, inkübatörün üst kısmındaki servis kapağının altında, kliniğin aylık inkübasyon raporlarını çıkarmak için kullanabileceği bir USB portu bulunur:

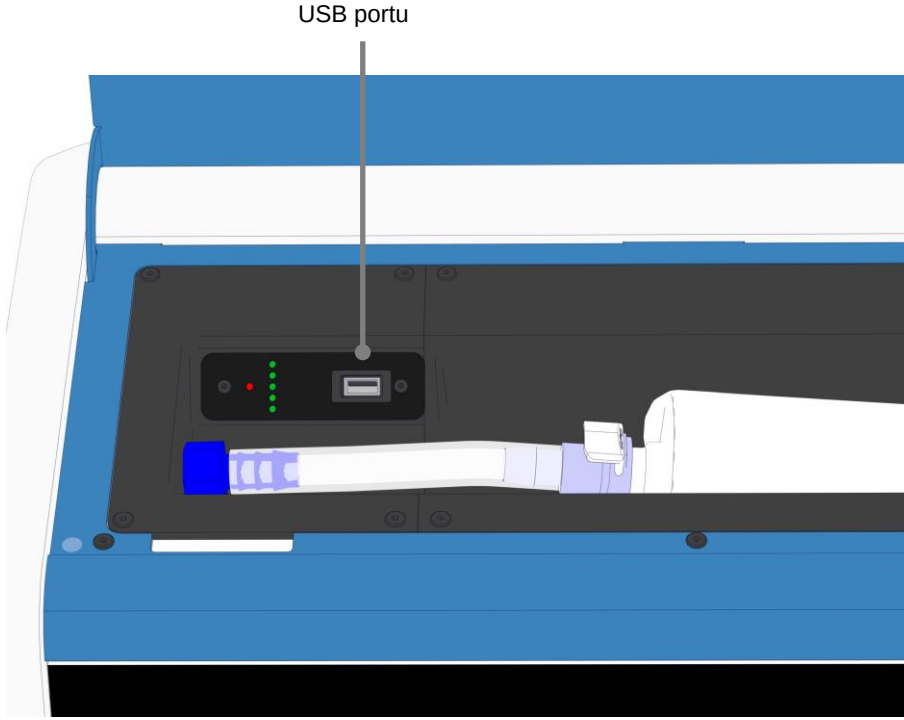

3.1 Gaz

CO₂ ve N₂ beslemeleri Vitrolife tarafından yetkilendirilmiş bir kişi tarafından eklenmeli ve uygun ve etiketli girişler ile sabitlenmelidir.

Gaz konnektörü hortumlarında, CO₂ hortumunun ve N₂ hortumunun sadece doğru girişe takılmasını sağlayan hızlı bağlantı elemanları bulunur. Bağlantı elemanlarında, EmbryoScope+ inkübatörün arkasındaki girişten çıkartılırken devreye giren bir otomatik kapatma valfi bulunmaktadır.

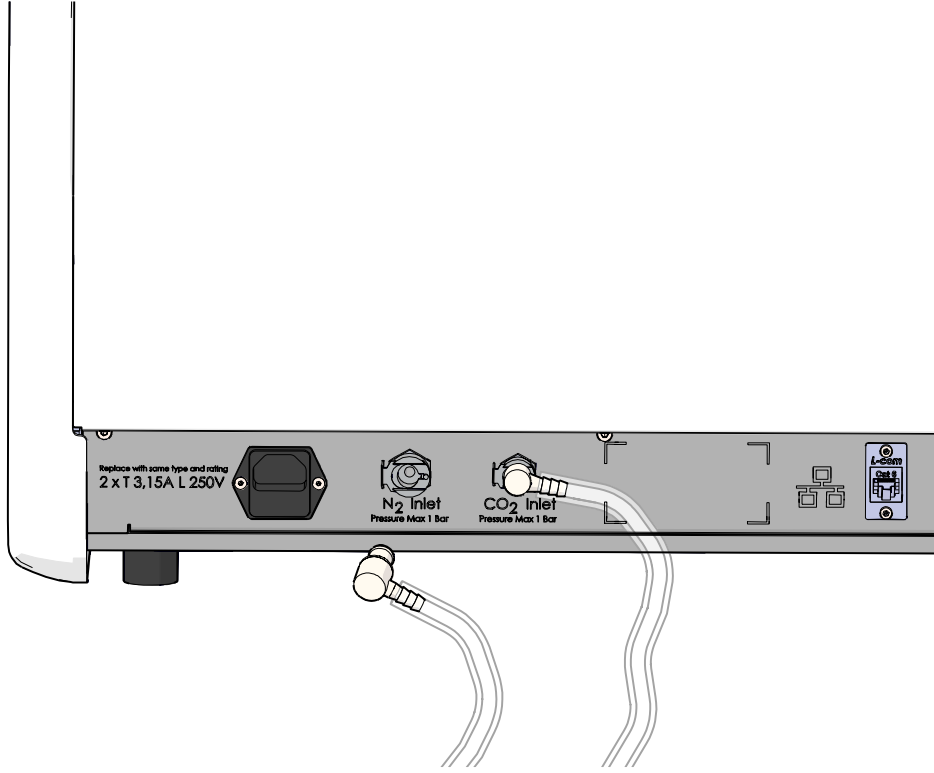


NOT

- İki dahili HEPA filtre kartuşu, hassas EmbryoScope+ inkübatörün içindeki hassas valfleri ve regülatörü, hava akışındaki parçacıklara karşı korur.


3.2 ES server

EmbryoScope+ inkübatörün, ES server'a bağlanması gerekmektedir. Bağlantı Ethernet kablosu ile yapılır ve Vitrolife tarafından yetkilendirilmiş bir kişinin gerçekleştireceği özel bir kurulum gerektirir. İnkübatör, doğrudan bir internet ağ geçidine/ISP'ye bağlanmamalıdır.

Server bağlantısı kaybedilirse **Settings** (Ayarlar) ekranını açmak için ayarlar simgesine  basın. Ardından **Server Connection** (Server bağlantısı) altında yer alan kırmızı çerçeveye basın.

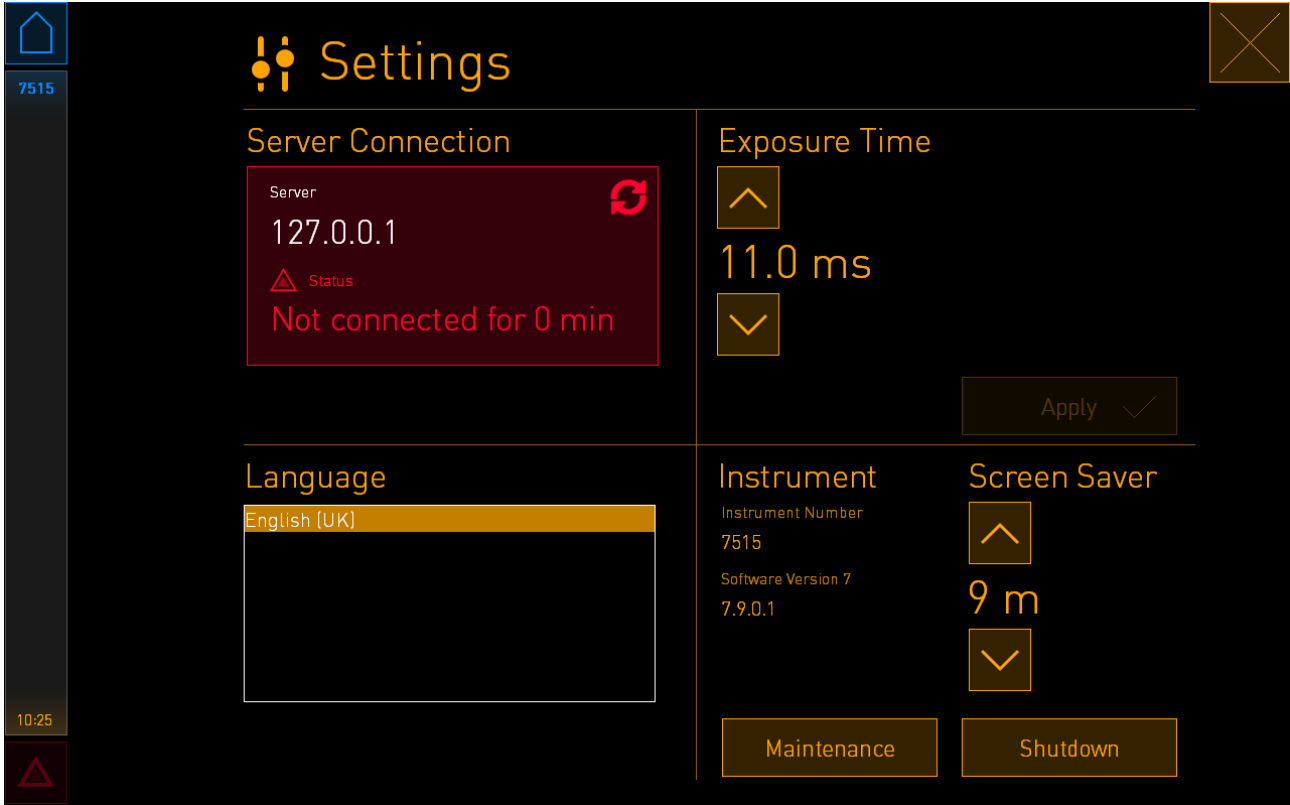

Sunucuyla bağlantı tekrar sağlandığında, kırmızı çerçeve yeşile dönecektir.

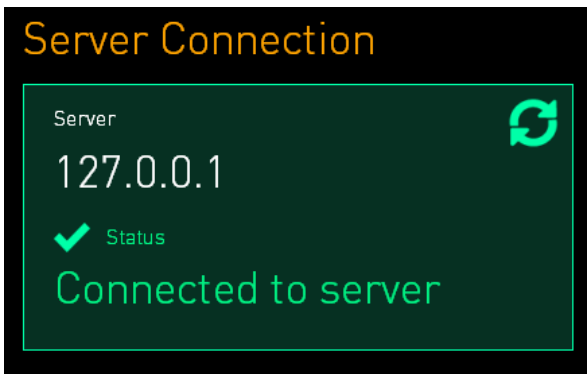

3.3 Harici alarm çıkışı

EmbryoScope+ inkübatörü ile kliniğin dahili alarm sistemi arasında bir bağlantı kurulduğunda, bunun Vitrolife tarafından yetkilendirilmiş bir kişi tarafından denetlenmesi gerekmektedir. EmbryoScope+ inkübatörden gelen tüm alarm sinyallerinin klinik alarm sistemi tarafından doğru şekilde kaydedildiğinden emin olmak için dahili alarm sistemlerini çalıştırmaya yetkili personel ile işbirliği içinde bağlantının dikkatlice test edilmesi gerekir.

Harici alarm sistemi ile nasıl bağlantı kurulacağıyla ilgili detaylı açıklama için bkz. bölüm 8.10.

3.4 İnkübatör verileri

EmbryoScope+ inkübatör işlemini görüntüleyebilen harici bir kayıt sistemine bağlantı için hazırlanmıştır. İnkübatör tarafından kaydedilen inkübasyon durumları harici sisteme gönderilir.

3.5 USB bağlantısı


EmbryoScope+ inkübatörün arka panelinde, Vitrolife desteği için verilerin dışa aktarılmasında kullanılabilecek bir USB portu bulunur.

Seri numarası 4000'den büyük olan EmbryoScope+ inkübatörlerde, inkübatörün üst kısmındaki servis kapağının altında bulunan panelde birer USB portu bulunur. Bu USB portu klinik tarafından aylık inkübasyon raporları almak için kullanılabilir (bkz. bölüm 13.2.2).

4 EmbryoScope+ inkübatörü çalıştırma

EmbryoScope+ inkübatörü iki ekranla kontrol edilir:

- Operatörün sıcaklık, CO₂ ve O₂ konsantrasyonları gibi inkübasyon koşullarını kontrol ettiği küçük inkübatör ekranı.
- Operatörün kültür kaplarını eklediği ve kaldırdığı, ve veri toplama işlevlerinin, motorların, kameranın vb. kontrol edildiği büyük PC ekranı.

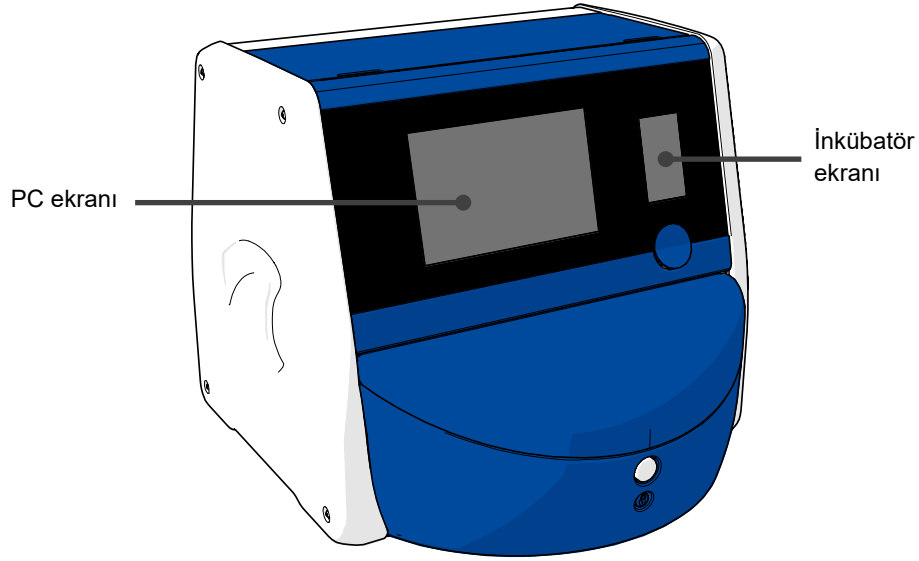

4.1 İnkübatör ekranı


Küçük inkübatör ekranı, inkübatörün içindeki inkübasyon koşullarını kontrol eder. İnkübatör ekranı aşağıdakiler için kullanılır:

- Bir dizi inkübasyon durumunun incelenmesi: güncel sıcaklık, CO₂ konsantrasyonu ve O₂ konsantrasyonu
- Her bir inkübasyon koşulunun ayar noktasının değiştirilmesi (bkz. bölüm 4.1.4.1 ve 4.1.5.1)
- Her bir inkübasyon koşulunun doğrulanması ve EmbryoScope+ inkübatörün kalibre edilmesi (bkz. bölüm 4.1.4.2 ve 4.1.5.3)
- O₂ regülasyonunun açılması ya da kapatılması (bkz. bölüm 4.1.6.1)
- EmbryoScope+ inkübatör tarafından verilen sesli uyarı alarmlarının duraklatılması (bkz. bölüm 8 ve 8.2).

4.1.1 İnkübatör ekranında gezinme

İnkübatör normal çalışırken ana sayfa ekranı açıktır. Bu ekran, güncel inkübasyon durumunu görüntüler, ör. embriyo sıcaklığı, CO₂ konsantrasyonu ve O₂ konsantrasyonu:

Ana sayfa ekranı

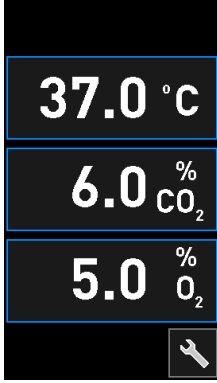

NOT

- İnkübatörü her zaman ana sayfa ekranı açık halde bırakın.

Mavi çerçeve ile çevrelenmiş düğmelere (örneğin; ana sayfa ekranında sıcaklık düğmesi) basarak inkübatör ekranında gezinebilirsiniz:



+ ve - düğmelerini kullanarak inkübasyon koşullarının ayar noktalarını değiştirebilir ya da dahili sensörleri kalibre edebilirsiniz:




Onay düğmesine basarak tüm değişiklikleri onaylayın:



Bu düğmeler, ayar noktası değiştirme modunda ve kalibrasyon modunda kullanılabilir (bkz. bölüm 4.1.2 ve 4.1.3).


Kapat düğmesine basarak her zaman ana sayfa ekranına geri dönebilirsiniz: .

+ ve - düğmelerini kullanarak ayar noktasını 0,1'lik adımlarla artırabilir ya da azaltabilirsiniz:

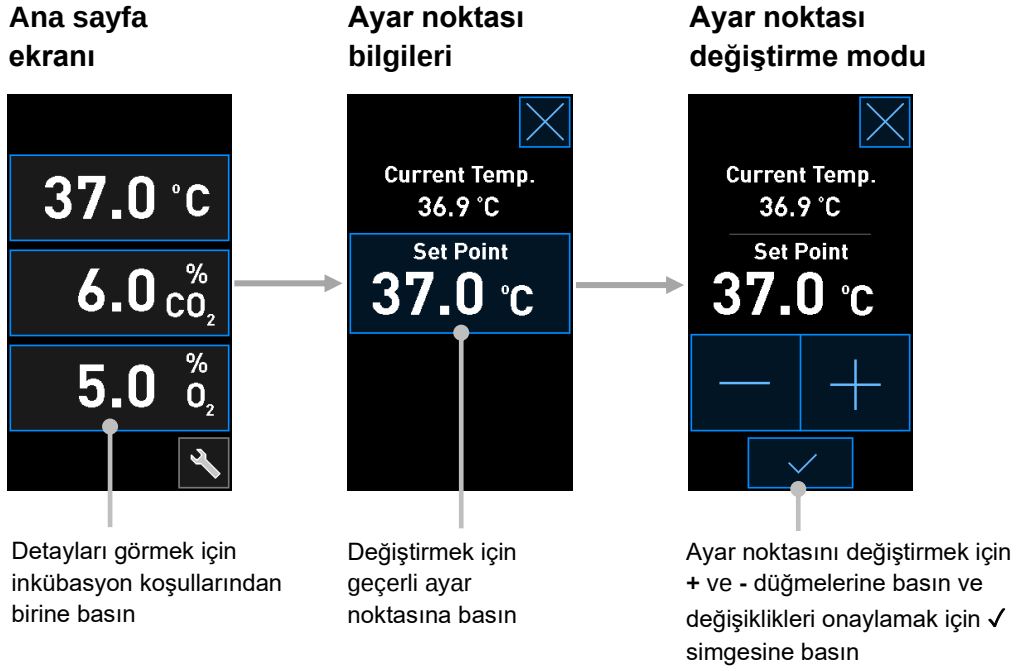


4.1.2 Ayar noktası değiştirme modu


İnkübasyon koşullarından birinin geçerli değerine bastığınızda parametreyle ilgili daha ileri detaylar gösterilir:

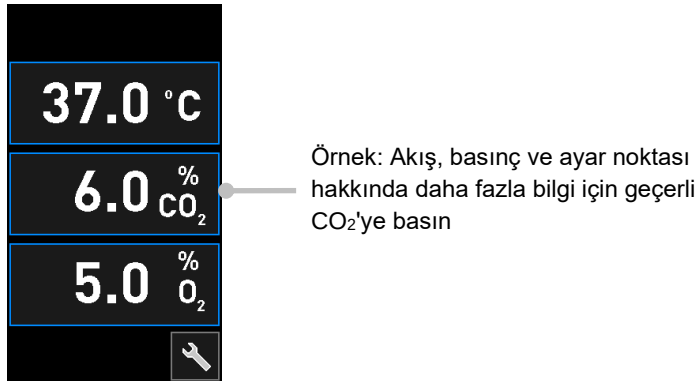

Bunu yaptığınızda ayar noktası detayları ekranı gösterilir:

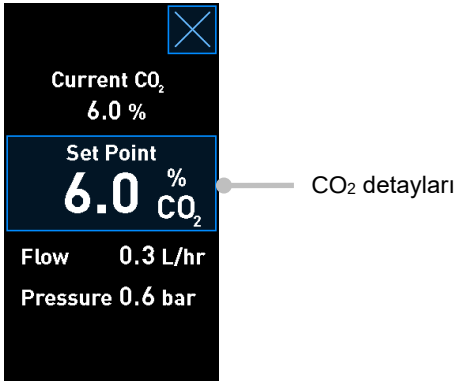


Detaylar ekranını açtığınızda, büyük bilgisayar ekranı, seçilen parametrenin belirli bir süre içinde nasıl geliştiğini gösteren bir grafik görüntüler. Aşağıdaki örnekte CO₂ konsantrasyonu grafiği gösterilmektedir:

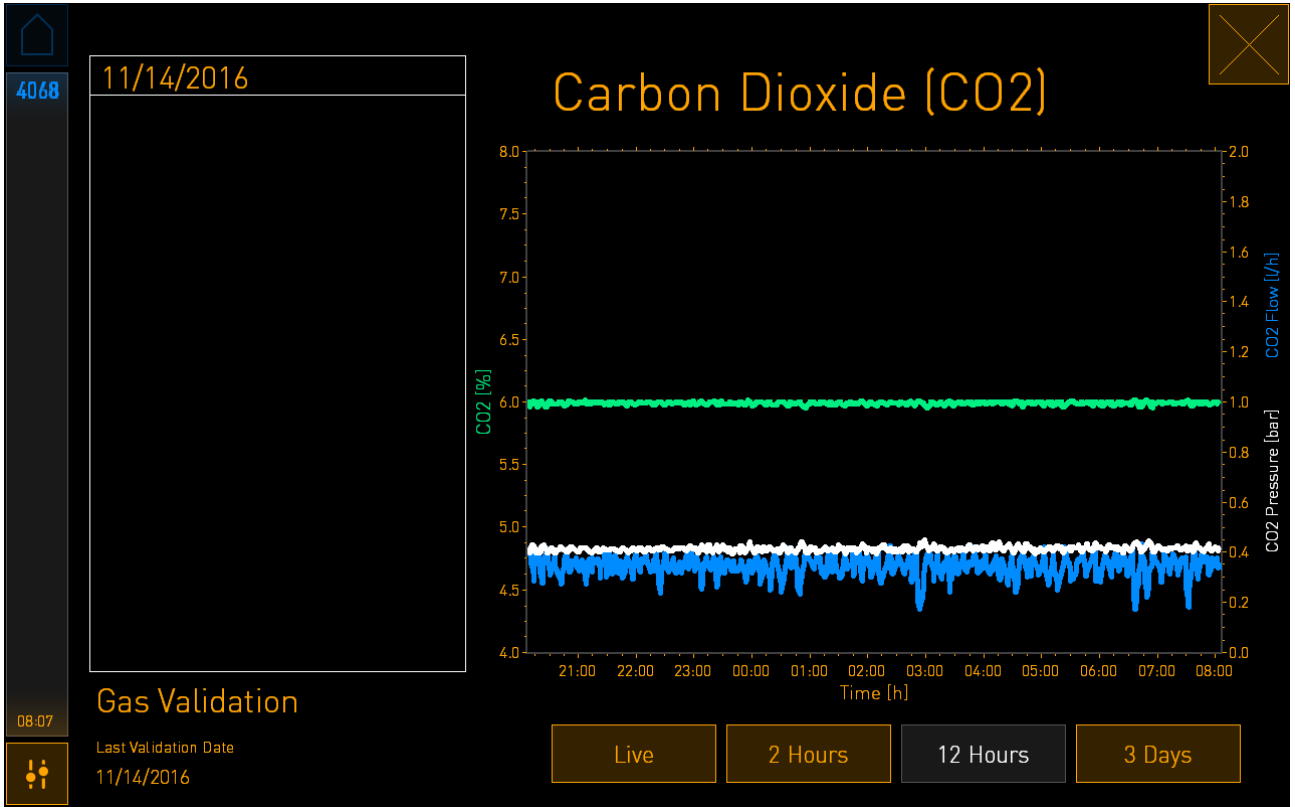

Noktalı yeşil çizgi geçerli ayar noktasını gösterir. Sürekli değişen yeşil grafiğin arkasında bulunabilir. Kalan grafikler belirli bir süre içindeki CO₂ konsantrasyonunu (değişken yeşil grafik), akışı (mavi grafik) ve basıncı (beyaz grafik) gösterir. Varsayılan süre **12 Hours** (12 saat). Geçerli CO₂ konsantrasyonunun gerçek zamanlı olarak güncellemesini görmek için **Live**'a (Canlı) ya da, gösterilen süreyi değiştirmek için **2 Hours** (2 saat) ya da **3 Days**'e (3 gün) basın.

Detaylar ekranında mavi çerçeveli **Set Point** (Ayar noktası) düğmesine bastığınızda, ayar noktası değiştirme modu açılır ve ayar noktasını değiştirebilirsiniz:

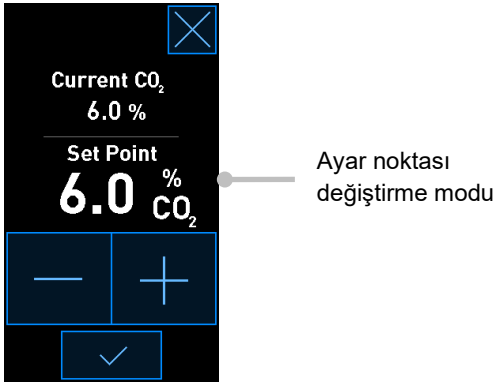


Ayar noktalarının nasıl değiştirileceğiyle ilgili daha fazla bilgi için 4.1.4.1 ve 4.1.5.1 bölümlerine bakın.

4.1.3 Doğrulama ve kalibrasyon modu


Doğrulama ve kalibrasyon modu, inkübasyon koşullarını doğrulamak ve daha sonra gerekiyorsa iç sensörleri kalibre etmek için kullanılır.

Doğrulama modu, araç düğmesine bastığınızda etkin hale gelir:  küçük inkübatör ana sayfa ekranında:

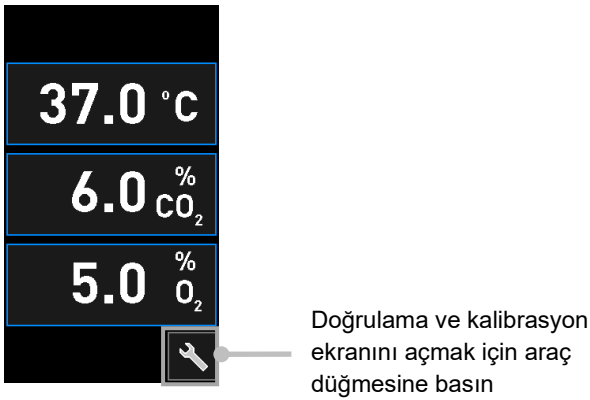


Doğrulamayı **CO₂ and O₂** (O₂ ve O₂), **Temp. Sensor A** (Sıcaklık sensör A) tuşlarından herhangi birine basarak başlatabilirsiniz veya **Temp. Sensor B** (Sıcaklık sensör B) düğmelerine basın.

Aşağıdaki örnekte sıcaklık sensörü B doğrulanmaktadır.

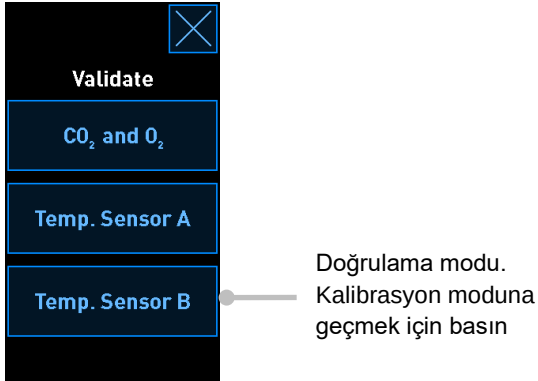


Doğrulama modu açıldığında büyük bilgisayar ekranında, seçilen parametrenin grafiği **Live** (Canlı) modda gösterilir. Bu grafik sürekli olarak güncellenerek sıcaklığın kararlı olup olmadığını doğrulamanızı sağlar:

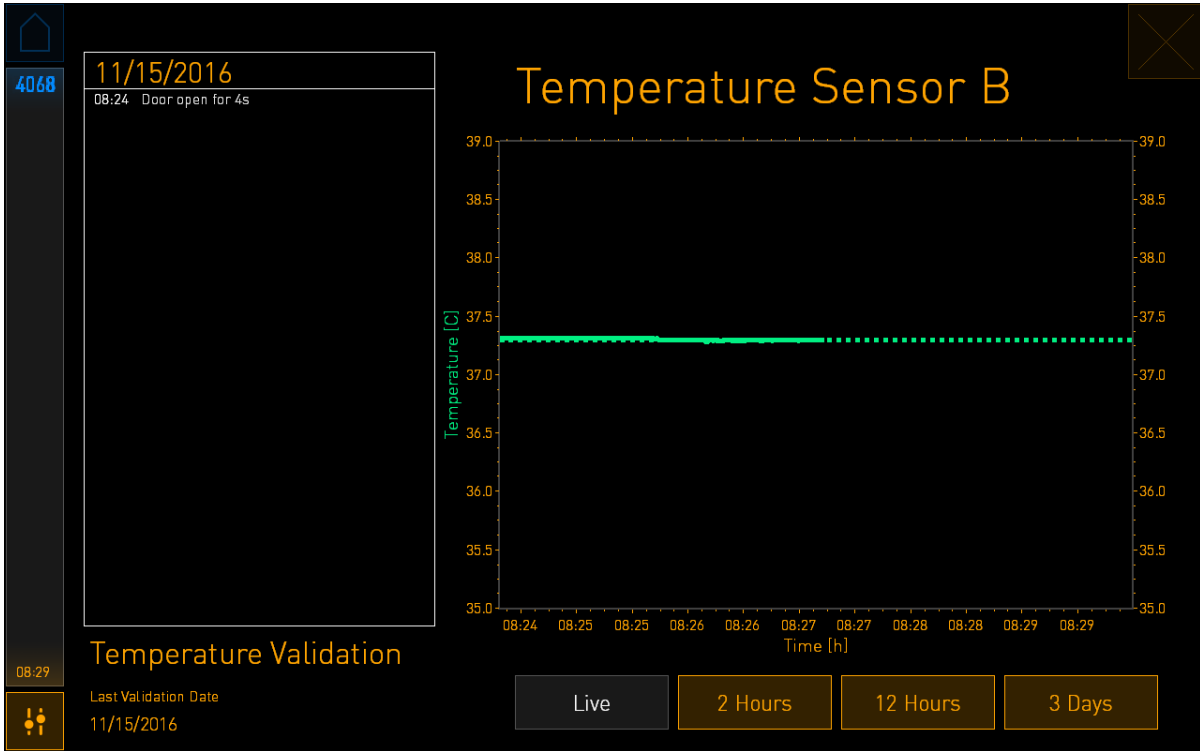

Noktalı yeşil çizgi, dahili sensörleri kalibre etmeniz gerektiğinde hedef olarak kullanılacak beklenen kap tutucusunu gösterir. Yukarıdaki örnekte, hedef sıcaklık 37,3 °C'dir. Ayar noktası 37,0 °C'dir. Kültür kabı tutucusu (güncel sıcaklığın ölçüldüğü) ve embriyo sıcaklığı arasında 0,3 °C sıcaklık farkı olduğundan kalibrasyonunuzun hedef sıcaklığı 37,3 °C'dir. Bu şekilde embriyo sıcaklığı ayar noktasına uyacaktır, ör. 37,0 °C.


Diğer yeşil çizgi, dahili yüksek hassasiyetli termometre tarafından ölçülen geçerli sıcaklığı gösterir.

İnkübatörü doğrularken, kap tutucusuna bir sıcaklık probu takın:

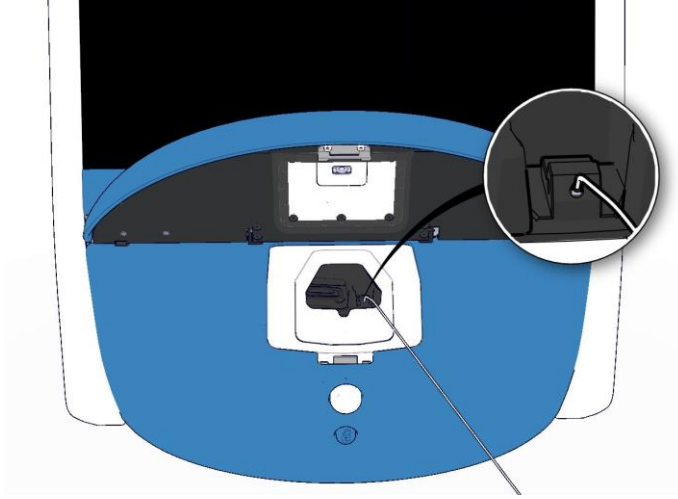

Bir sıcaklık probu takılması, küçük inkübatör ekranında gösterilen sıcaklığı, prob tarafından ölçülen sıcaklıkla karşılaştırmanızı sağlar.

Sıcaklık probu tarafından yapılan sıcaklık ölçümü, küçük inkübatör ekranında gösterilen geçerli iç değerden farklıysa sıcaklığın kalibre edilmesi gerekmektedir.

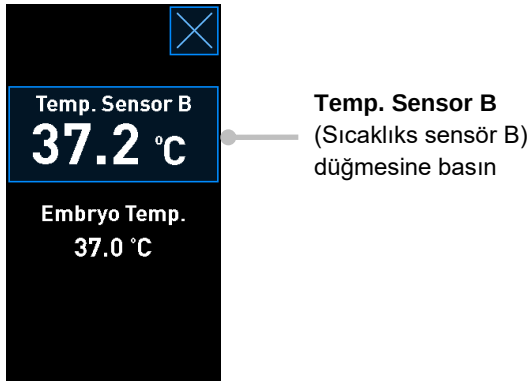

NOT


- Sıcaklık probu taktıktan sonra, yükleme kapağını kapatırken, yükleme kapağının doğrudan probun üzerine kapanmasını önlemek için probu sağda tutun.
- Sıcaklık probunu kalibrasyondan/doğrulamadan sonra dikkatlice çıkartın.

Dahili sensörlerin nasıl kalibre edileceğiyle ilgili bilgi için 4.1.4.2. ve 4.1.5.3. bölümlerine bakın.


4.1.4 İnkübatör sıcaklığını kontrol etme

4.1.4.1 Sıcaklık ayar noktasını değiştirme

1. Ayar noktası detaylarını görüntülemek için geçerli sıcaklığa basın:

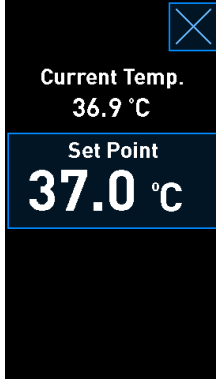

2. Mavi çerçeveli **Set Point** (Ayar noktası) düğmesine basın.
Ayar noktası değiştirme modu açılır.
3. Sıcaklığı 0,1 °C adımlarla artırmak için + düğmesine ya da 0,1 °C'lik adımlarla azaltmak için - düğmesine basın:

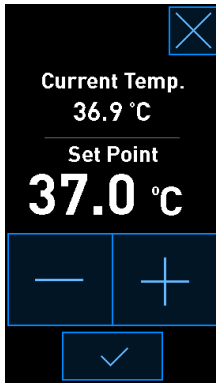

NOT

- Maksimum ayar noktası sıcaklığı 39,0 °C'dir.
- Minimum sıcaklık ayar noktası 36,0 °C'dir.

4. Onay düğmesine basarak yeni ayarı uygulayın: .

5. İnkübatörü ana sayfa ekranına geri döndürmek için kapatma düğmesine basın: .

4.1.4.2 Sıcaklık kalibrasyonu

EmbryoScope+ inkübatörün, sıcaklık kalibre edilmeden önce tam dengeye ulaşması için en az üç saat boyunca açık olması gerekir. Oda sıcaklığının normal laboratuvar sıcaklığına eşit olması gerekir.

Harici yüksek hassasiyetli termometre tarafından yapılan sıcaklık ölçümü, inkübatör ekranında gösterilen geçerli iç değerden farklıysa sıcaklığın kalibre edilmesi gerekmektedir.


UYARI
Kliniğin, sıcaklığı doğrulamak için en az iki haftada bir programlı doğrulama kontrolleri yapması gerekmektedir.

DİKKAT
Sıcaklık doğrulaması sırasında tüm çalışan kültür kapları için görüntü çekimi duracaktır. Sıcaklık doğrulaması için bir probun kültür kabı tutucusuna yerleştirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla sistem, operatör tarafından sıcaklık probunun çıkarıldığı onaylanana kadar görüntü çekimini ve normal çalışmayı otomatik olarak devam ETTİREMEZ.


Bu örnekte, sıcaklık sensörü B'nin kalibrasyonu anlatılmaktadır.

Bu işlemleri gerçekleştirin:


1. Kalibrasyon modunu girmek için doğrulama modundan mavi **Temp. Sensor B** (Sıcaklık sensör B) düğmesine basın:

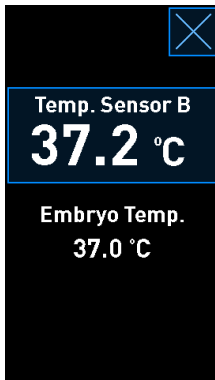

Kalibrasyon modu açılır:

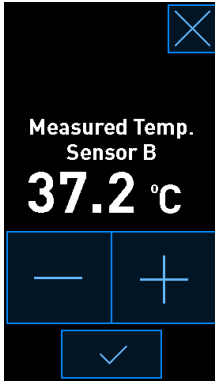

Bilgisayar ekranında, o andaki sıcaklığı gösteren bir grafik görüntülenir. Grafik **Live** (Canlı) modda gösterilir. Bu modda sıcaklık grafiği sürekli güncellenir:

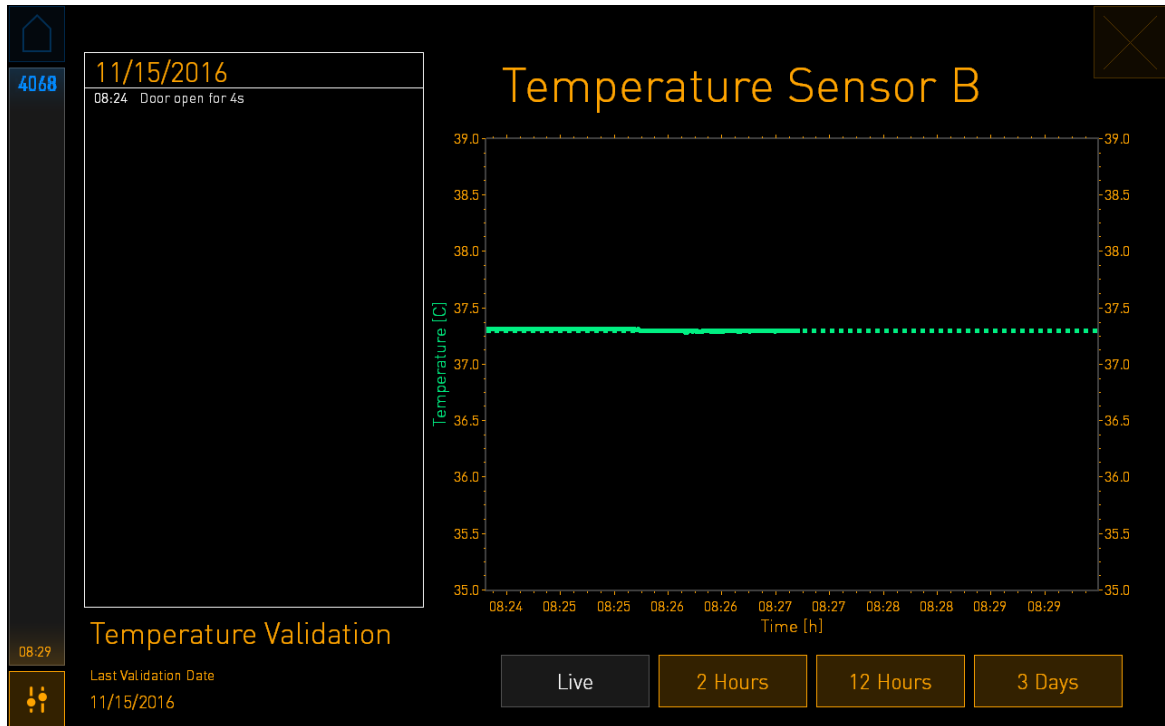

2. B sensörünün sıcaklığını 0,1 °C'lik adımlarla artırmak için küçük inkübatör ekranındaki + simgesine ya da gösterilen değer harici sıcaklık probunun okuması ile eşleşene kadar sıcaklığı 0,1 °C'lik adımlarla azaltmak için - simgesine basın.

Örneğin, harici sıcaklık probunun ölçtüğü sıcaklık 37,4 °C ve dahili sensör tarafından ölçülen sıcaklık 37,2 °C ise gösterilen sıcaklığın, harici sıcaklık probu tarafından ölçülen **Measured Temp. Sensor B** (Ölçülen sıcaklık sensörü B) değerini yansıtmak için +0,2 °C artırılması gerekmektedir.

3. Onay düğmesine basın: .

NOT

- Yaptığınız değişiklikleri iptal etmek ve herhangi bir değişikliği uygulamadan inkübatör ana sayfa ekranına geri dönmek için önce onay düğmesine *basmadan*,  düğmesine basın. Daha sonra gösterilen mesajda **No**'yu (Hayır) seçin.


- Üç dakika sonra, bilgisayar ekranındaki grafik kararlı sıcaklık düzenlemesi gösterdiğinde, sıcaklık probunu kullanarak sıcaklığı doğrulayın.
 - Harici sıcaklık ölçüm değeri ile dahili sıcaklık ölçüm değeri artık aynıysa doğrulama modundan çıkmak için  ögesine basın. Sıcaklık probunu çıkartın ve gerçekten çıkarttığınızı onaylayın. Daha sonra inkübatörün ana sayfa ekranına geri dönün.
 - Sıcaklık probu tarafından ölçülen sıcaklık ile küçük inkübatör ekranında gösterilen dahili sıcaklık ölçüm değeri hala aynı değilse 1-3. adımları uygulayarak kalibrasyon işlemini tekrarlayın.

UYARI

- Kalibrasyonun ardından her zaman inkübatör sıcaklığını doğrulayın.


4.1.5 CO₂/O₂ konsantrasyonunun kontrol edilmesi4.1.5.1 CO₂/O₂ ayar noktasını değiştirme

- Geçerli CO₂/O₂ konsantrasyonuna basarak ayar noktası detaylarını açın:

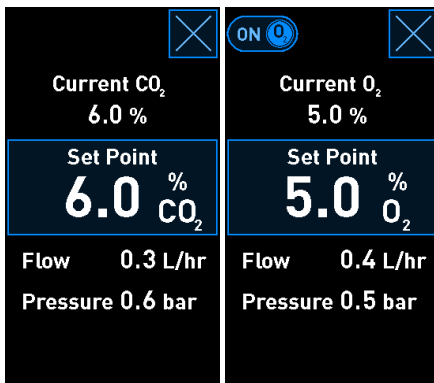

- Mavi çerçeveli **Set Point** (Ayar noktası) düğmesine basın.

3. Gaz konsantrasyonunu %0,1'lik adımlarla artırmak için + %0,1'lik adımlarla azaltmak için - düğmesine basın:

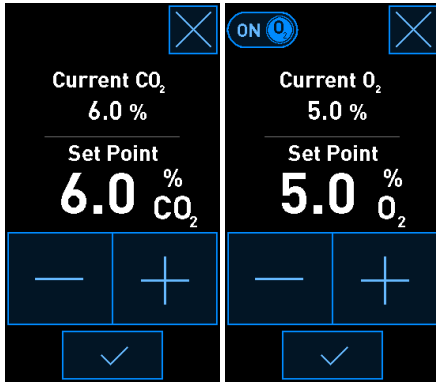

Bunlar minimum ve maksimum ayar noktalarıdır (ortam oksijeni kullanılırken geçerli değildir):

	Minimum	Maksimum
CO ₂	%3,0	%8,0* %12,0**
O ₂	%4,0	%8,0

* Seri numarası 4343'ten küçük inkübatörler (4325-4327 hariç). ** Seri numarası 4325-4327 ile 4343 olan ve daha büyük inkübatörler.

4. Onay düğmesine basın: 

5. İnkübatörü ana sayfa ekranına geri döndürmek için kapatma düğmesine basın: 

4.1.5.2 CO₂/O₂ konsantrasyonun onaylanması


UYARI
Kliniğin, gaz konsantrasyonunu doğrulamak için en az iki haftada bir programlı doğrulama kontrolleri yapması gerekmektedir.

CO₂/O₂ konsantrasyonunu doğrulamadan önce, tam dengenin sağlandığından emin olmak için EmbryoScope+ inkübatörün ilgili gazlar bağlı olacak şekilde en az üç saat boyunca açık kalması gerekir. Oda sıcaklığının normal laboratuvar sıcaklığına eşit olması gerekir.


Başlamadan önce, gaz analiz cihazının üretici talimatlarına göre kalibre edildiğinden emin olun.

Gaz konsantrasyonunu doğrulamak için:

1. CO₂/O₂ konsantrasyonunu ölçmek için kullanılan gaz analiz cihazını açın.
2. Araç düğmesine basın:  inkübatör ana sayfa ekranında.
3. Doğrulamayı başlatmak için **Validate CO₂ and O₂** (CO₂ ve O₂'yi doğrula) seçeneğine basın. Bilgisayar ekranında **Live** (Canlı) modda CO₂/O₂ grafiği gösterilecektir:

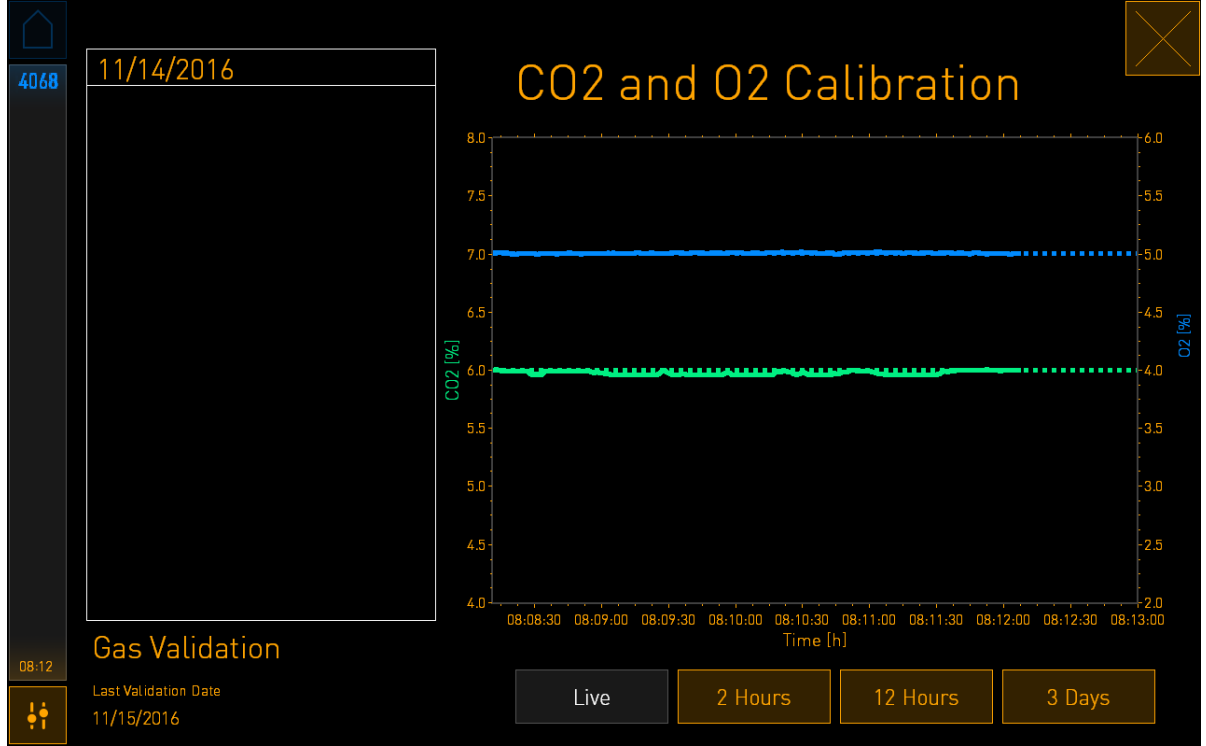


4. Gaz numunesi portunun kapağını çıkarın:

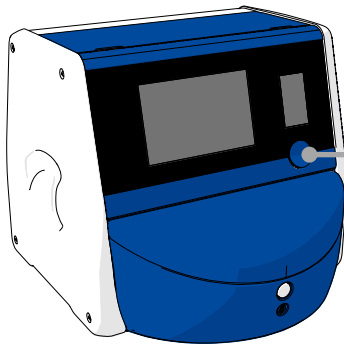


Gaz numunesi portu kapağı.
Gaz numunesi çıkışına erişim

5. Gaz analiz cihazından gelen boruyu gaz numunesi çıkışına bağlayın. Farklı inkübatör modellerinde farklı valf simgeleri bulunur:



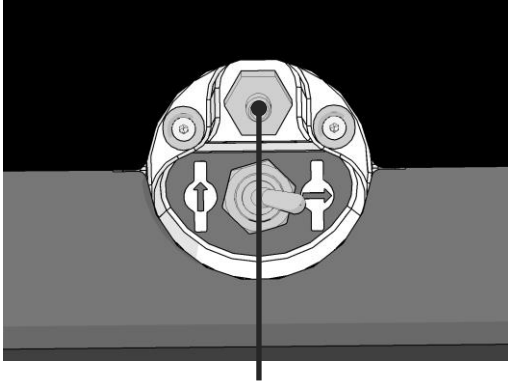


Gaz numunesi çıkışı

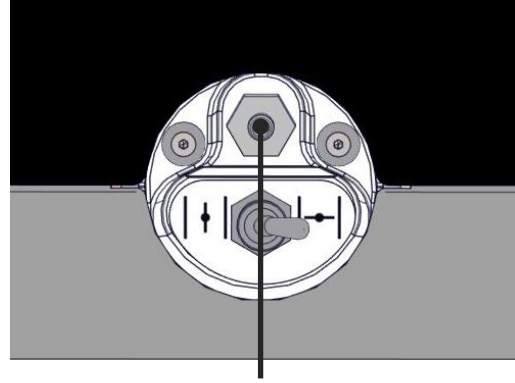


Gaz numunesi çıkışı

6. Numune almak için valfi açın. Anahtar sola dönük olduğunda valf açıktır:

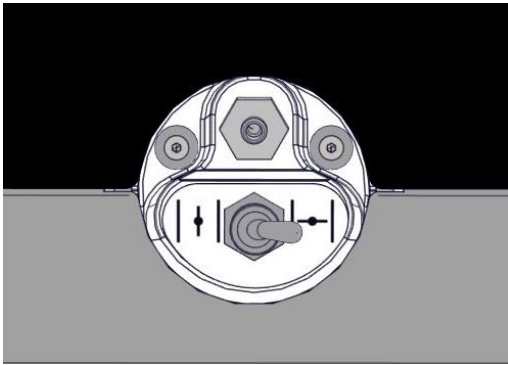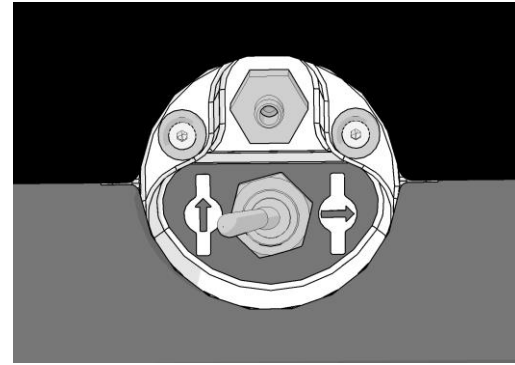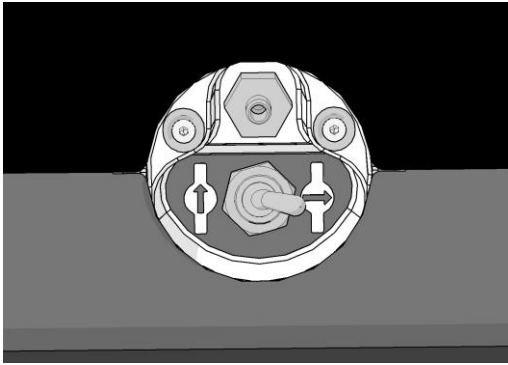


Kapalı valf

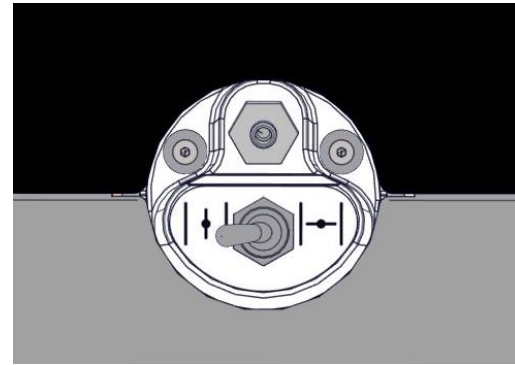

Açık valf

Ekranda geçerli CO₂/O₂ değerleri gösterilir:

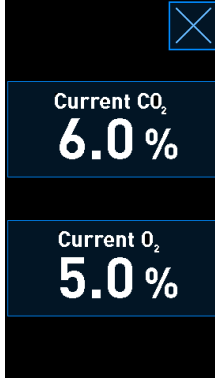

7. Harici gaz analiz cihazının ölçüm değerini, inkübatör ekranında gösterilen geçerli değerle karşılaştırın.
8. Gaz konsantrasyonunu kalibre edin ya da inkübatör ana sayfa ekranına geri dönün:
 - a) Harici gaz analiz cihazının ölçtüğü değer ile ekranda o sırada gösterilen dahili değer arasında %0,1'den fazla fark varsa gaz konsantrasyonunun kalibre edilmesi gerekmektedir. 4.1.5.3 bölümde gaz konsantrasyonunun nasıl kalibre edileceğini görün.
 - b) Gaz konsantrasyonunu kalibre etmek gerekli değilse  düğmesine basın.


4.1.5.3 CO₂/O₂ konsantrasyonun kalibre edilmesi

EmbryoScope+ inkübatörün, gaz konsantrasyonu kalibre edilmeden önce tam dengeye ulaşması için en az üç saat boyunca açık olması gerekir.

Harici gaz analiz cihazı tarafından yapılan ölçüm, ekranında gösterilen geçerli iç değerden farklıysa dahili gaz sensörlerinin kalibre edilmesi gerekmektedir.

Bu işlemleri gerçekleştirin:


1. 4.1.5.2 bölümde belirtilen şekilde CO₂/O₂ konsantrasyonu doğrulayın.
2. Kalibrasyonu başlatmak için mavi çerçeve içindeki **Current CO₂/Current O₂** (Geçerli CO₂/Geçerli O₂) düğmesine basın:

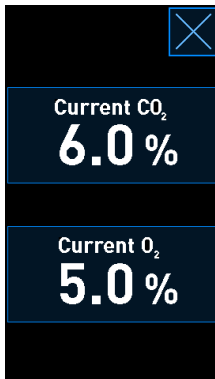

Bunu yaptığınızda kalibrasyon detayları ekranı açılır:



Bilgisayar ekranında, o andaki CO₂/O₂ konsantrasyonunu gösteren bir grafik görüntülenir. Grafik **Live** (Canlı) modda gösterilir. Bu modda grafik sürekli olarak güncellenir:

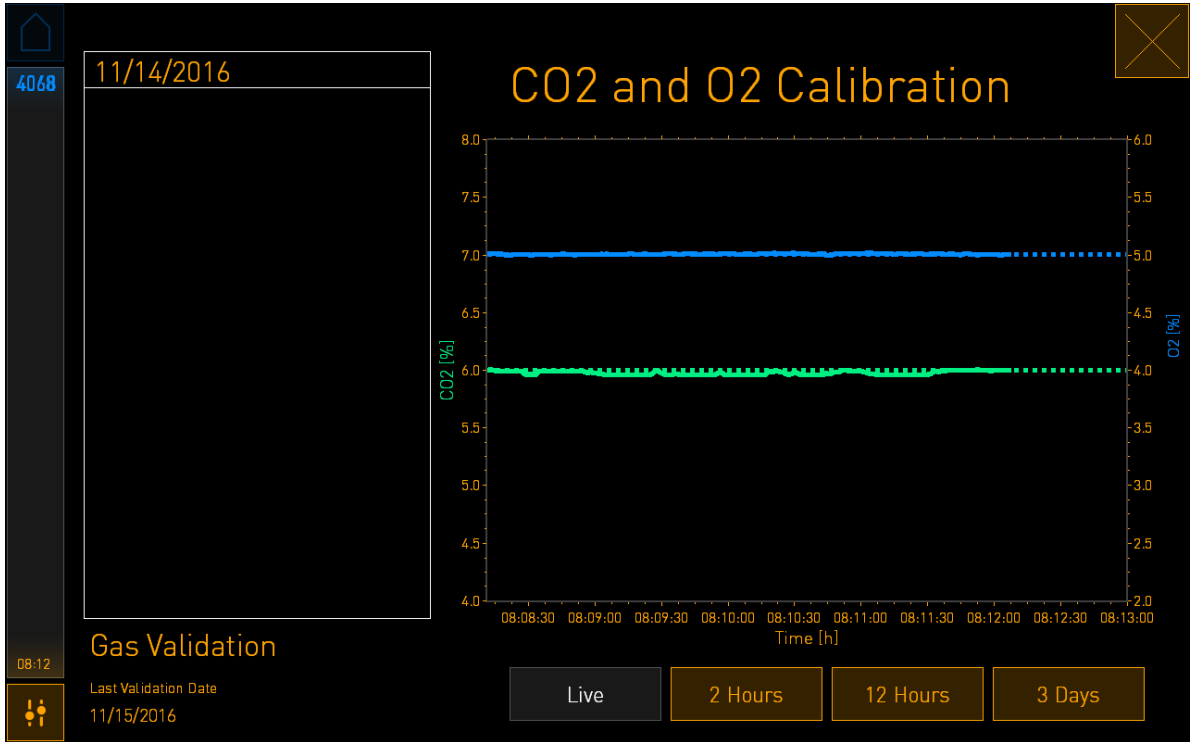

3. Gaz konsantrasyonunu %0,1'lik adımlarla artırmak için küçük inkübatör ekranında + simgesine veya harici gaz analiz cihazındaki değerlerle eşleştirme amacıyla gaz konsantrasyonunu %0,1'lik adımlarla azaltmak için - simgesine basın.

Örneğin harici gaz analiz cihazı tarafından ölçülen konsantrasyon %6,2 ise ve dahili sensör tarafından yapılan ölçüm %5,9 ise gösterilen konsantrasyonun, ölçülen %6,2'lik konsantrasyonu gösterecek şekilde +%0,3 şeklinde ayarlanması gerekir.

4. Onay düğmesine basın:



NOT

- Yaptığınız değişiklikleri iptal etmek ve herhangi bir değişikliği uygulamadan inkübatör ana sayfa ekranına geri dönmek için önce onay düğmesine *basmadan*,  düğmesine basın. Daha sonra gösterilen mesajda **No**'yu (Hayır) seçin.

5. 10 dakika sonra bilgisayar ekranındaki grafikte kararlı gaz düzenlemesi gösterdiğinde, harici gaz analiz cihazı ile konsantrasyonu doğrulayın.


- Harici ölçüm değeri ve gösterilen, dahili ölçüm değeri aynıysa ya da sadece %0,1 farklıysa doğrulama modundan çıkmak için  düğmesine basın. Inkübatör ana sayfa ekranına geri dönün.
- Harici gaz analiz cihazı tarafından ölçülen değer ile küçük inkübatör ekranında gösterilen dahili değer %0,1'den daha fazla farklıysa 1-3. adımları uygulayarak kalibrasyon işlemini tekrarlayın.

UYARI

- Kalibrasyondan sonra her zaman gaz konsantrasyonunu doğrulayın.

4.1.6 Inkübatör O₂ regülasyonu**4.1.6.1 O₂ regülasyonunu açma/kapama**

- Geçerli O₂ konsantrasyonuna basarak ayar noktası detaylarını açın:

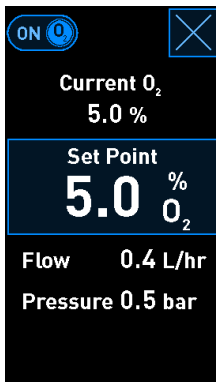

- O₂ regülasyonunu etkinleştirmek istiyorsanız kayar kontrolü **ON** (AÇIK) durumuna getirin, YA DA Geçerli O₂ regülasyonunu devre dışı bırakmak istiyorsanız kayar kontrol çubuğunu **OFF** (KAPALI) durumuna getirin.
- Gösterilen mesajda **Yes**'e (Evet) basarak yaptığınız değişiklikleri onaylayın.

4.2 Bilgisayar ekranı

4.2.1 PC ana sayfa ekranı

EmbryoScope+ inkübatörün PC ana sayfa ekranı, inkübatöre yerleştirilmiş tüm kültür kaplarının genel görünümünü gösterir (aşağıdaki ekran görüntüsüne bakın). Her hasta için birden fazla kültür kabı bulunabilir ve dolayısıyla genel görünümde birden fazla kez gösteriliyor olabilir. Tüm diğer ekranlarda, aşağıdaki simgeye basarak her zaman PC ana sayfa ekranına geri dönebilirsiniz:



PC ana sayfa ekranında aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Bir hasta seçin ve belirli kültür kabıyla ilgili genel görünüme ulaşabilirsiniz (bkz. bölüm 4.2.2)
- Yeni bir kültür kabı başlatabilirsiniz (bkz. bölüm 4.2.1.2)
- **Settings** (Ayarlar) ekranına erişim, burada şunları yapabilirsiniz:
 - ES server ile bağlantıyı kontrol edebilirsiniz.
 - Dil ayarlarını değiştirebilirsiniz.
 - Kamera pozlama süresini ayarlayabilirsiniz.
 - Inkübatörün güncel yazılım sürümlerini görebilirsiniz.
 - Ekran koruyucuyu etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.
 - Bakım seçeneklerine erişebilirsiniz.
 - PC'yi kapatabilirsiniz.

4.2.1.1 Ana sayfa ekranındaki renkler

Ana sayfa ekranında aşağıdaki renkler kullanılır:

Beyaz: EmbryoScope+ inkübatör, görüntü çekimine başlamadan önce kültür kabında otomatik odaklama işlemi gerçekleştiriyor YA DA bu, dengelenmesi henüz tamamlanmamış bir kap.

Turuncu: EmbryoScope+ inkübatör, kültür kabından görüntü çekiyor.

Yeşil: Dengeleme kabı işlemi tamamlandı ve kullanıma hazır YA DA kültür kabında, transfer edilmek üzere seçilmiş bir ya da daha fazla kültür kabı var.

Kırmızı: Dengeleme kabı ya da kültür kabının süresi geçti ve EmbryoScope+ inkübatörden çıkartılması gerekiyor. Süresi geçen bir kültür kaba basarsanız, embriyodan alınan son görüntü gösterilecektir.

Ana sayfa düğmesi

Cihaz numarası

Hasta kimliği

Çalışmakta olan kültür kabı. EmbryoViewer üzerinden transfer edilecek en az bir embriyo seçtiyseniz, kültür kabı yeşil renkte gösterilecektir

 750	5 Andy Stephenson 9753	3 Amy Barret 2345	3 Gloria Thompson 5432
	2 Amy Sanders 4689	0 Eir Garnett 3456	0 Jaqueline Daubney 0987
	0 Molly Williams 1357	0 Maria Abrahams 1234	Equilibrated Overdue
	Equilibrated OK	Equilibrating 0.1 h	+ Add Culture Dish
14:50 			

Bu kültür kabında embriyo içeren kuyular. EmbryoScope+ inkübatör, görüntü çekimine başlamadan önce bu kültür kabı için otomatik odaklama işlemi gerçekleştiriyor

İşlemi tamamlanmış dengeleme kabı


Döllenmeden sonraki gün sayısı

Boş konum

Add Culture Dish (Kültür kabı ekle) düğmesi. Boş konum olmadığında kullanılamaz

Kullanıcı tarafından tanımlanan maksimum süreden daha uzun bir zamandır dengelenmekte olan dengeleme kabı

İnkübatör kuyuların içindeki kabarcıkları otomatik olarak tespit eder. Kabarcıklar, söz konusu kuyunun etrafındaki bir kırmızı halka ile gösterilir; herhangi bir alarma veya uyarıya yol açmaz:

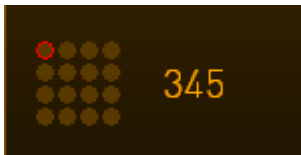

4.2.1.2 Bir kültür kabını başlatma

Bir kültür kabını başlatmadan önce aşağıdaki hazırlıkları yapın:

- EmbryoViewer'da ilgili tedaviyi oluşturun ve hasta bilgilerini girin. EmbryoViewer'ın **Patient Details** (Hasta ayrıntıları) sayfasından, bu hasta için bir veya daha fazla sayıda barkod yazdırın.
- Kültür kabını, kültür kapları kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde hazırlayın.

Kültür kabı artık EmbryoScope+ inkübatöre yerleştirilmeye hazırdır. Inkübatörün ES server'a bağlı olması durumunda, inkübatör otomatik olarak hasta adını, hasta kimliğini ve tedavi kimliğini tarayacak ve sisteme girecektir. Barkodun okunmasıyla ilgili bir sorun varsa 4.2.1.3 bölümüne bakın.

NOT

- Inkübatör bölmesine açılan yükleme kapağı, turuncu kilit gösterge ışığı yandığında kilitlenir. Kültür kabı tutucusu yükleme konumuna hareket ettirildiğinde ve yükleme kapağı açılabilirdiğinde, kilit gösterge ışığı yanıp sönen beyaz renge döner.

Bir kültür kabını başlatmak için:

1. PC ana sayfa ekranında **Add Culture Dish** (Kültür kabı ekle) düğmesine basın.
Inkübatörün önündeki kilit göstergesi lambası, kapağın kilidinin devre dışı olduğunu ve açılabilirdiğini gösteren turuncudan yanıp sönen beyaz renge döner.
2. Yükleme kapısını açın ve kültür kabını tutucudaki erişilebilir bir konuma yerleştirin.
EmbryoScope+ inkübatör, dolu olmayan konumları takip eder ve kültür kabı tutucusunu otomatik olarak bir sonraki boş konuma hareket ettirir. Kültür kabı, tutma yeri kolu ve barkod etiketi operatöre dönük olacak şekilde yerleştirilmelidir:



3. Yükleme kapağını kapatın ve kültür kabını yerleştirdiğinizi onaylayın.

Kültür kabı artık yerleştirilmiştir ve barkod okuyucu otomatik olarak barkod etiketindeki hasta ve tedavi bilgilerini kaydeder.

4. Yerleřtirdiđiniz kltr kabının tipini belirtin ve hastanın kimliđini dođrulamak iin **Yes'e** (Evet) basın:

The screenshot shows the 'Patient Found in Database' screen. On the left sidebar, there is a home icon, the number '4015', a time display '13:50', and a status icon. The main area has a title 'Patient Found in Database' in orange. Below it, 'Patient Name' is 'Molly Williams'. Under 'Identification', there are two radio buttons: 'Embryo Culture Dish' (selected) and 'ic8 Dish'. To the left of these, a box contains 'Treatment ID 22' and 'Patient ID 1357'. At the bottom, there is a 'Confirm patient identity' prompt and two buttons: 'No' with a red X and 'Yes' with a green checkmark.

Barkod okunamadıđında řu ekran grnr:

The screenshot shows the 'No Barcode Found' screen. On the left sidebar, there is a home icon, the number '4015', a time display '13:52', and a status icon. The main area has a title 'No Barcode Found' in orange. Below it, there are two radio buttons: 'Embryo Culture Dish' and 'ic8 Dish'. Below these, there is a radio button for 'Equilibration Dish(es)' which is selected. Under this, there are three fields: 'Number' with the value '1', 'Min. Time' with the value '12 h', and 'Max. Time' with the value '24 h'. Each field has up and down arrow buttons. At the bottom, there is a prompt 'Remove the dish or continue without a barcode' and two buttons: 'Remove' with a red X and 'Continue' with a green checkmark.

Equilibration Dish(es) (Dengeleme kabı(kapları)) onay düğmesi varsayılan olarak seçilidir. Kültür kabı yerleştirdiğinizi belirtmek için **Embryo Culture Dish** (Embriyo kültür kabı) onay düğmesini ya da **ic8 Dish** (ic8 kabı) onay düğmesini seçin ve **Continue** (Devam et) düğmesine basın. Ekranda beliren klavyeyi kullanarak gerekli hasta ve tedavi bilgisini manuel ve **Done** (Bitti) düğmesine basın.

Olası barkod hatalarıyla ilgili daha fazla bilgi için bkz. bölüm 4.2.1.3.

NOT

- Kültür kabını kap tutucusuna yerleştirdiyseniz ve kabı asla eklemek İSTEMİYORSANIZ ana sayfa simgesine  ya da **Remove** (Çıkar) düğmesine basın. Ardından kültür kabını çıkarın ve kabın çıkarıldığını onaylamak için **Yes** (Evet) düğmesine basın.

- Döllenme tarihini ve saatini girin. Döllenme tarihi ve saatini girmeden devam edemezsiniz.
- Görüntü çekmek istediğiniz kuyuları belirtin (embriyo içeren kuyular arasından). Varsayılan olarak tüm kuyular seçilmiştir. Görüntü çekiminin dışında tutulmasını istediğiniz kuyulara basın.



Görüntü çekimine dahil olan kuyular



Görüntü çekimine dahil olmayan kuyular

7. **Done** (Bitti) düğmesine basın. Bu düğme, döllenme tarihi ve saatini girene kadar soluk kalır.

Birkaç dakika bekleyerek tam seçilen kuyularda en iyi odak düzlemlerini belirlemek için otomatik odaklama işleminin yapılmasına izin verin.

Odak düzlemleri ayarlandığında, EmbryoScope+ inkübatör otomatik olarak görüntü çekimine devam edecektir.

NOT

- Yeni kap yerleştirildiğinde görüntü çekimi tüm çalışmakta olan kültür kapları için duracaktır. Görüntü çekimi, otomatik odaklama prosedürü tamamlandığında otomatik olarak devam edecektir.

4.2.1.3 Barkod hataları

Bir kültür kabı eklediğinizde, barkod okuyucu, kültür kabının üzerindeki barkodu otomatik olarak okumaya çalışacaktır.

Barkod okuyucu düzgün çalışmıyorsa, barkod okuyucu hasarlıysa ya da yoksa ekranda bir mesaj gösterilecektir.

Aşağıdaki tablo, barkod kullanırken meydana gelebilecek mesajları listeler ve bu hataların her birine nasıl tepki vermeniz gerektiğini açıklar:

No.	Mesaj	Neden	Çözüm
1	There is no barcode on the inserted culture dish. Enter patient and treatment information manually. (Yerleştirilen kültür kabında barkod yok. Hasta ve tedavi bilgilerini manuel olarak girin.)	Barkod okuyucu, yerleştirilen kültür kabındaki barkodu okuyamadı.	- EmbryoViewer'dan bir barkod yazdırın ve kültür kabına yapıştırın. Daha sonra kültür kabını yerleştirin. - Barkodsuz kültür kabını yerleştirin ve bilgisayar ekranında gösterilen klavyede hasta bilgilerini manuel olarak girin.
2	There was a problem reading the barcode. Enter patient and treatment information manually. (Barkod okunurken bir problem oluştu. Hasta ve tedavi bilgilerini manuel olarak girin.)	Barkod hasarlı, kırıksık ya da okunaksız olabilir.	- Barkodun, herhangi bir kırışma olmadan doğru biçimde yapıştırıldığını kontrol edin. - Barkodlar için kullanılan yazıcıda baskı yapılabilecek folyo olduğunu kontrol edin.
3	No connection to the ES server. Enter patient and treatment information manually. (ES server ile bağlantı yok. Hasta ve tedavi bilgilerini manuel olarak girin.)	Sunucu çalışmıyor ya da bağlantı kurmada sorun yaşanıyor olabilir.	- ES server ile bağlantı kurun. Daha sonra kültür kabını inkübatörden çıkarın ve tekrar yerleştirerek işlemi tamamlayın. - Kültür kabını yerleştirin ve hasta ve tedavi bilgilerini bilgisayar ekranında açılan klavyeden manuel olarak girin.

No.	Mesaj	Neden	Çözüm
4	Not possible to use the barcode reader. The system will continue without barcodes. When barcodes are not used, the system will not be able to automatically resume image acquisition in case of a power failure. (Barkod okuyucu kullanmak mümkün değil. Sistem barkodsuz olarak devam edecektir. Barkod kullanılmadığında, elektrik kesintisi durumunda sistem görüntü almaya otomatik olarak yeniden başlayamayacaktır.)	Barkod okuyucu şu anda çalışmıyor.	- Barkod olmadan devam edin. - Servis kapağının altındaki sıfırlama düğmesine iki kez basarak bilgisayarı tekrar başlatın (2.5 bölümde belirtilen işlemleri uygulayın). - Bilgisayar ekranında Shutdown (Kapat) düğmesine basarak inkübatörü tamamen kapalı konuma getirin (2.4 bölümde belirtilen işlemleri uygulayın).
5	There is a duplicate barcode on the inserted culture dish. Print a new unique barcode for the treatment and place on the dish before inserting. (Yerleştirilen kültür kabındaki barkod daha önce kullanılmış. Tedavi için yeni bir barkod yazdırın ve kültür kabını yerleştirmeden önce barkodu yapıştırın.)	Bu ya da başka bir inkübatörde aynı barkodu taşıyan başka bir kültür kabı çalışıyor.	EmbryoViewer'dan yeni bir barkod yazdırın ve kültür kabına yapıştırın. Daha sonra kültür kabını yerleştirin.
6	There is a dish from an incompatible instrument. Culture in this dish cannot be resumed in an incompatible instrument. (Kültür kabı uyumlu olmayan bir cihazdan alınmış. Bu kaptaki kültür uyumlu olmayan bir cihazda yeniden başlatılamaz.)	Başlangıçta belli bir tip inkübatörde çalıştırılmış olan kültür kabı uyumlu olmayan bir inkübatöre yerleştirilmiş.	Kültür kabını, ilk inkübatörle uyumlu bir inkübatöre yerleştirin. Kültür kabı, kültür kabı tutucusuna doğru bir şekilde yerleştirilebiliyorsa inkübatör uyumludur.

4.2.1.4 Tek bir kültür kabını çıkarma

Bir kültür kabını kalıcı ya da medyum değiştirmek vb. amacıyla çıkarmak için bu prosedürü uygulayın:

1. PC ana sayfa ekranında, çıkarmak istediğiniz kültür kabına basın.
2. Kültür kabı tutucusunu yükleme konumuna getirmek için kayar kontrolü sağa kaydırın.



Kültür kabını çıkarmak için sağa kaydırın

3. İnkübatörün hazır olduğunu belirten bir mesaj gösterildiğinde öndeki kilit açma düğmesine basarak yükleme kapağını açın.
4. İsteddiğiniz kültür kabını çıkarın ve yükleme kapağını kapatın.

NOT

- Görüntü çekimi kap çıkarıldığında tüm çalışmakta olan kültür kapları için duracaktır. Yükleme kapağını kapattığınızda görüntü çekimi otomatik olarak devam edecektir.

4.2.1.5 Tüm kültür kaplarını çıkarma

1. PC ana sayfa ekranında ayarlar simgesine basın ve **Shutdown** (Kapat) seçeneğini seçin.
2. **Remove all culture dishes and shut down** (Tüm kültür kaplarını çıkart ve kapat) seçin.
3. Kültür kaplarını tek tek çıkarın. Ekranda verilen talimatları izleyin.

4.2.1.6 Kültür kabındaki kültürün yeniden başlatılması

Bir kültür kabındaki kültürün yeniden başlatılabilmesi için inkübatörün ES server'a bağlı olması gerekir. Kültür, aynı inkübatörde ya da başka bir uyumlu inkübatörde yeniden başlatılabilir.

Eğer inkübatörden barkodlu bir kültür kabını çıkarıp yeniden yerleştirdiyseniz hangi kuyuların aktif olduğunu belirtmelisiniz (görüntü çekmek istediğiniz tüm kuyular). Kültür kabını çıkarmadan önce görüntü çekiminin devre dışı bırakıldığı kuyular (bkz. bölüm 4.2.2.1) soluk renkte görünür. Örneğin, dondurulacak embriyoları çıkardıysanız, bu ekrandan kuyu numaralarına basarak ilave kuyuların seçimini kaldırabilirsiniz. Tüm aktif kuyuları seçtiğinizde **Yes** (Evet) seçeneğine basın.

4015

13:54

Resume culture dish?

Patient Name

Molly Williams

Identification

Treatment ID

22

Patient ID

1357

☒ Embryo Culture Dish
 ☐ ic8 Dish

Selected Wells


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

No ✕

Yes ✓

- 51 -

Bir kültür kabını uyumlu olmayan bir inkübatöre yerleştirmeye çalıştığınızda karşınıza bu ekran çıkar. Ekranı kapatmak için **OK** (Tamam) düğmesine basın.

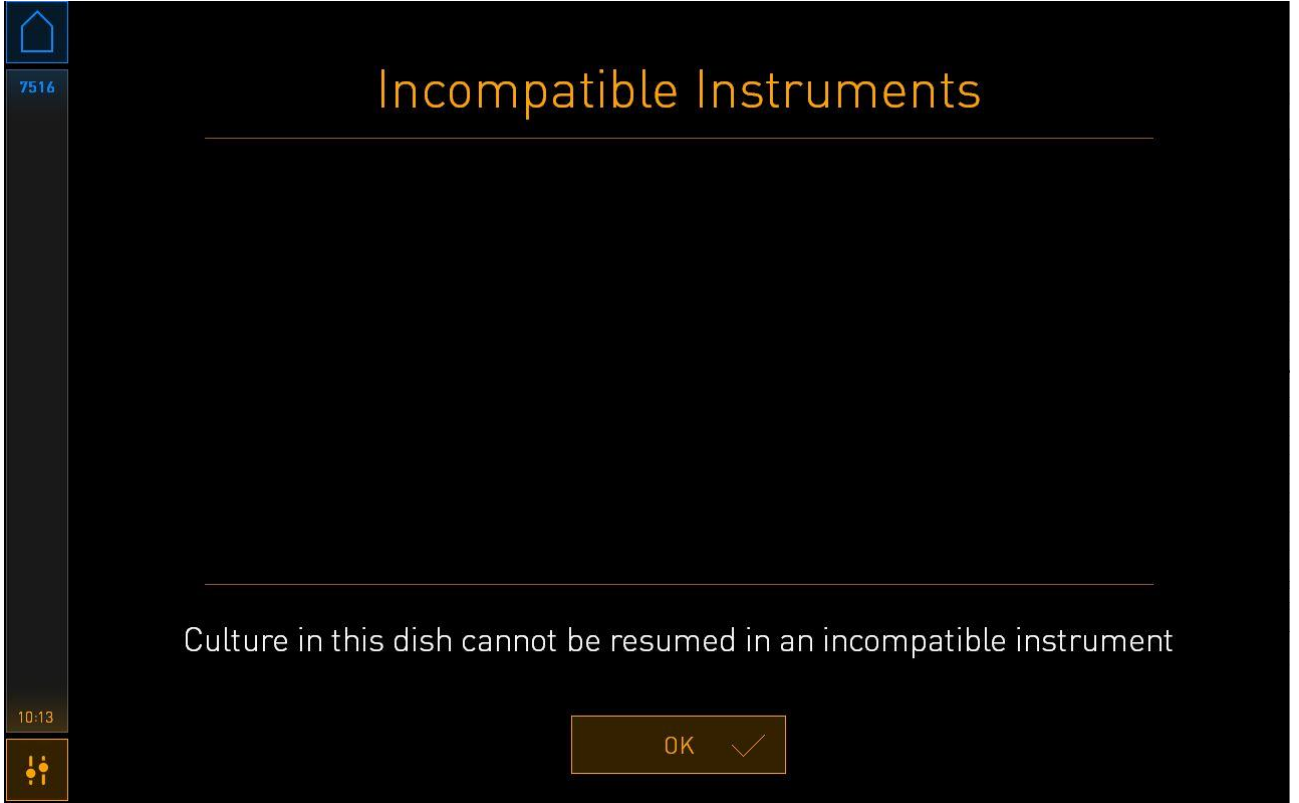

4.2.2 Kültür kabı genel görünüm ekranı

Kültür kapları genel görünüm ekranı, operatörün embriyo gelişimini izlemesini sağlayan genel bilgiler içerir.

PC ana sayfa ekranında kültür kapları genel görünüm ekranını açmak için ana sayfa ekranında ilgili düğmeye basarak bir kültür kabı seçin.

Ekran açıldığında, seçilen kültür kabının her bir kuyusundan son çekilen görüntü gösterilir:

11:04

Patient Name
Frances Watts

750

DAY 4

Insemination

Date
11/25/2016

Time
08:00

Elapsed
99:04:08

Identification

Treatment ID
Treatment 1

Label Code
AA

Patient ID
8071977-1234

Position
6

Remove

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

Döllenmeden bu yana geçen saat sayısı

Geçerli kültür kabı ile ilgili genel bilgiler

Dondurulmak üzere seçilmiş embriyonun yer aldığı kuyu


Transfer için seçilmiş taze embriyonun yer aldığı kuyu

Transfer için seçilmiş dondurulmuş embriyonun yer aldığı kuyu

Kullanılmamış olarak seçilmiş embriyonun yer aldığı kuyu

Boş kuyu

Embriyonun büyütülmüş resmini görüntülemek için kuyulardan birine basın:

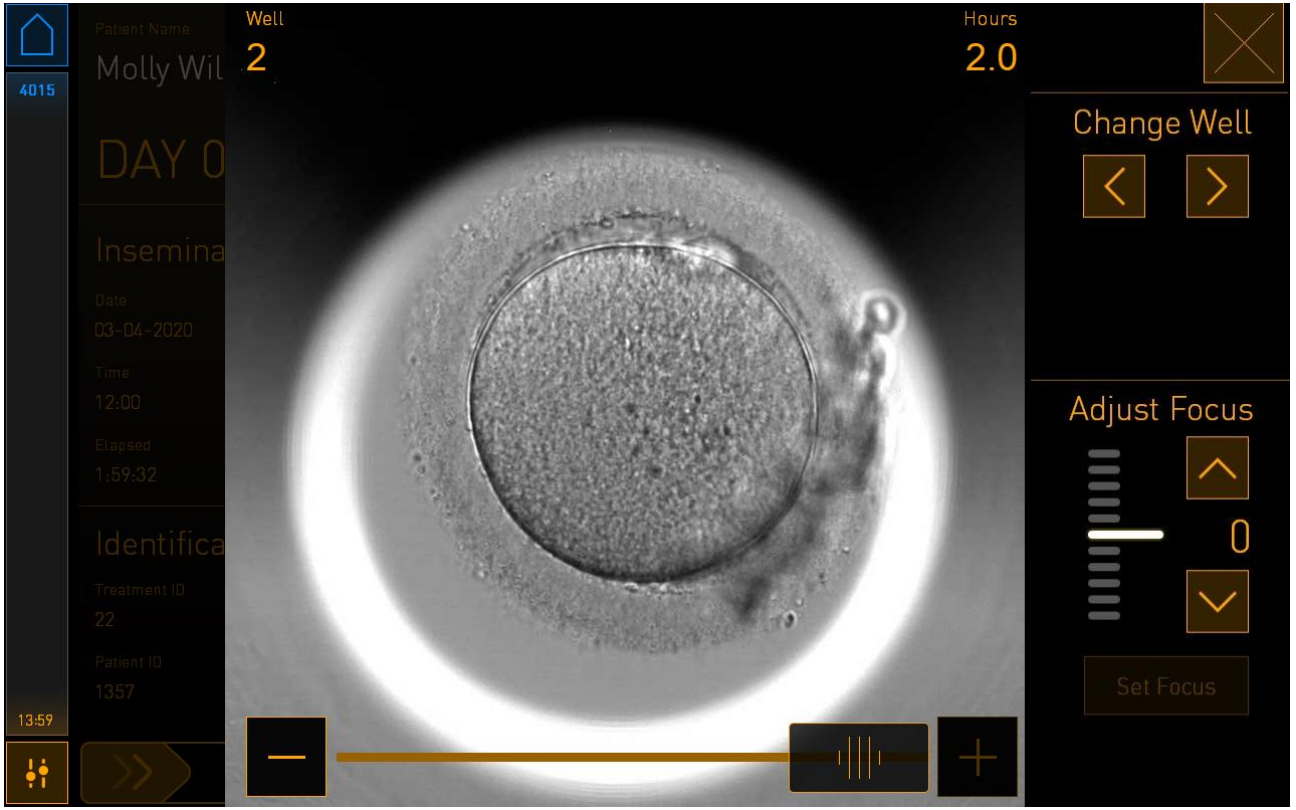

Ekranın altında yer alan kaydırıcıyı kullanarak görüntü serisi içindeki görüntüler arasında geçiş yapabilirsiniz. Kaydırıcının her iki tarafında yer alan + ve - düğmelerine basarak görüntüyü yakınlaştırıp uzaklaştırın ya da kaydırıcıyı ileri veya geri sürükleyerek görüntüler arasında geçiş yapın.

Change Well (Kuyuyu değiştir) seçeneğinin altında yer alan oklara basarak kültür kabındaki bir önceki veya bir sonraki kuyuya gidin ya da **Adjust Focus** (Odağı ayarla) seçeneğinin altındaki oklarla odağı ayarlayın.

Kültür kabı genel görünüm ekranına geri dönmek için ekranın sağ üst köşesindeki kapat düğmesine basın.

4.2.2.1 Kuyulardan görüntü çekiminin devre dışı bırakılması

Belli kuyulardan görüntü çekimini devre dışı bırakmak istiyorsanız kültür kabı genel görünüm ekranında yer alan kamera simgesine basın:



Kamera simgesi beyaz olduğunda görüntü çekimini devre dışı bırakmak istediğiniz her bir kuyu için X işaretine basın:




Bir kuyu için X işaretine bastığınız zaman bu kuyu için görüntü çekimini devre dışı bırakmak istediğinizi onaylamanız gerekir. Seçiminizi onaylamak için **OK** (Tamam) düğmesine basın. Devre dışı bırakmak istediğiniz tüm kuyuları seçtikten sonra kültür kabı genel görünüm ekranına geri dönmek için tekrar kamera simgesine basın.

4.2.3 Settings (Ayarlar) ekranı

Settings (Ayarlar) ekranında sunucuya bağlantıyı doğrulayabilir ve gerekirse yeniden bağlantı kurabilir, mevcut ekran dilleri arasında seçim yapabilir, time-lapse görüntüler için maruziyet süresini ayarlayabilir, cihaz numarasını ve inkübatörün yazılım sürümünü görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, ekran koruyucuyu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir ve ekran koruyucunun etkinleştirileceği boşta kalma süresini belirleyebilirsiniz. Bunun yanında bakım seçeneklerine erişebilir ya da sistemi kapatıp acil durum prosedürünü başlatabilirsiniz (bkz. bölüm 9).

Settings (Ayarlar) ekranını açmak için ayarlar simgesine basın: .

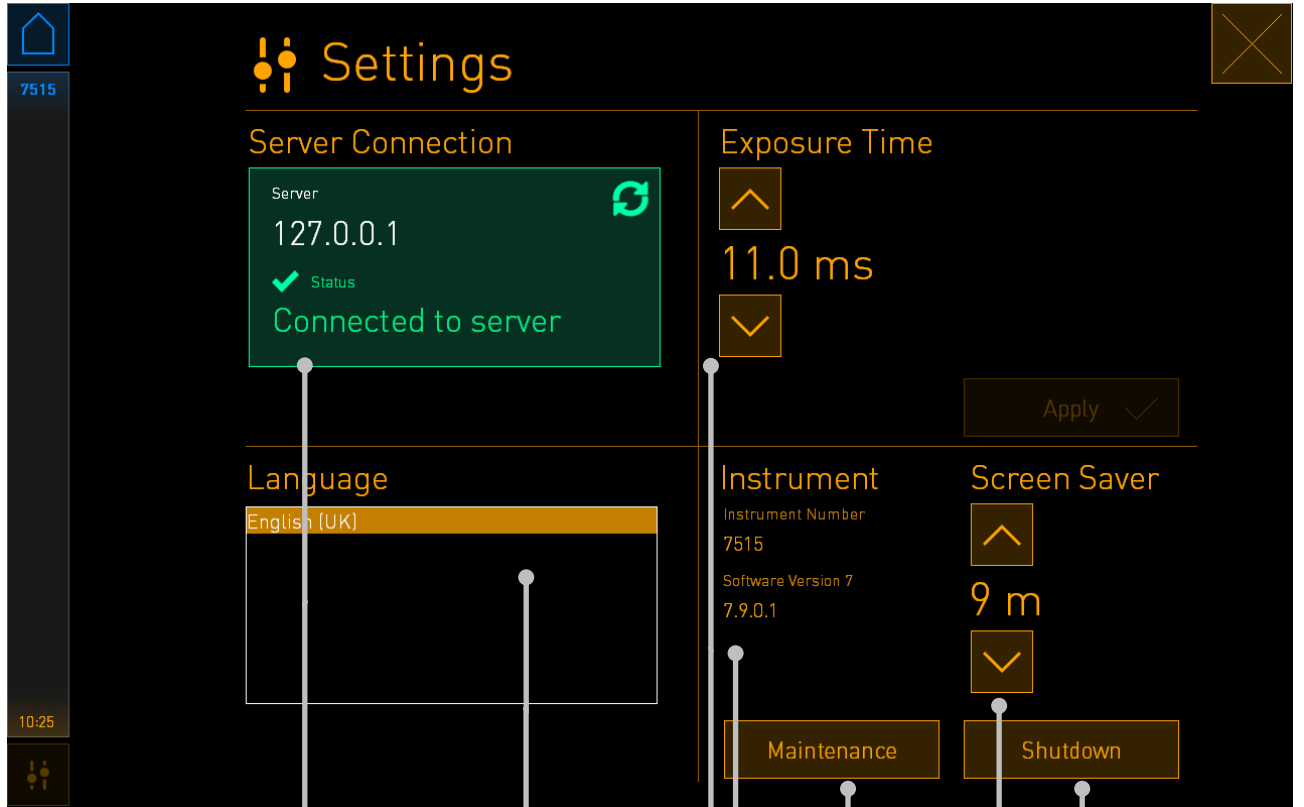

Sunucu bağlantısı –
bağlantı kesildiğinde
yeniden bağlanabilmek
için bu çerçeveye basın

Dil ayarları

Maruziyet
süresi ayarı

Cihaz numarası ve
yazılım sürümü


Bakım işlevi - yalnızca
yetkilendirilmiş
teknisyenler tarafın-
dan ya da Vitrolife
destek ekibinin isteği
üzerine kullanılabilir

Sistemi
kapatın


Ekran koruyucu
ayarı

4.2.3.1 Ekran koruyucuyu etkinleştirme ve devre dışı bırakma

Ekran koruyucuyu **Settings** (Ayarlar) ekranından etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Ekran koruyucu devre dışı bırakıldığında, **Screen Saver** (Ekran koruyucu) yazısının altında **OFF** (Kapalı) yazar. Ekran koruyucuyu etkinleştirmek için yukarı ok düğmesine basın:

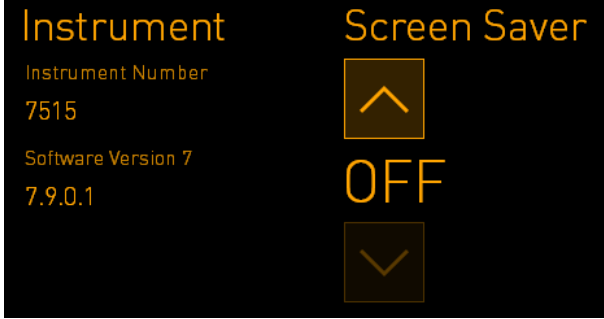

Ekran koruyucu etkinleştirilene kadar geçecek boşta kalma süresini ayarlamak için okları kullanın. Örneğin 15 dakika:

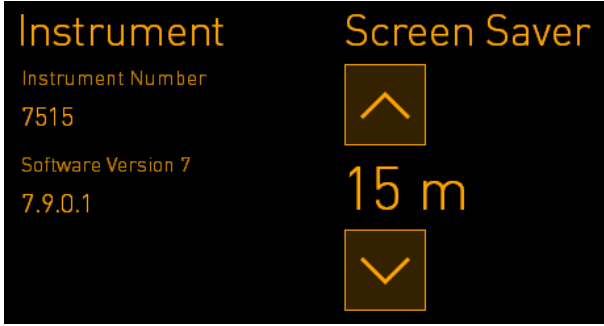

Ekran koruyucuyu devre dışı bırakmak istiyorsanız, ayar ekranı **OFF** (Kapalı) konumuna gelene kadar aşağı ok düğmesine basın.

5 EmbryoScope+ inkübatörü temizleme ve dezenfekte etme

Rutin bakım için periyodik temizlik prosedürü tavsiye edilir. Dezenfeksiyon prosedürü ve temizlik prosedürü ayrıca, yağ dökülmeleri, görünen lekeler veya kirliliğin diğer belirtileri gibi olaylara ilişkin durumlar için de tavsiye edilir. Herhangi bir medyum veya yağ dökülmesinin hemen ardından EmbryoScope+ inkübatörün cihazının temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi kesinlikle tavsiye edilir.


5.1 EmbryoScope+ inkübatörün periyodik temizliği

UYARI


- EmbryoScope+ inkübatörü asla içinde embriyolar varken temizlemeyin.

Eldiven takma ve iyi temizleme teknikleri başarılı bir temizlik için önemlidir. EmbryoScope+ inkübatörü temizlemek için bu prosedürü izleyin:


1. PC ekranında ayarlar simgesine basın. Ardından **Shutdown** (Kapat) simgesine basın ve çalışan her kültür kabını tek tek çıkarın.
2. Ekranda, tüm kültür kaplarının çıkarıldığını kontrol edin.
3. Arkadaki ana güç anahtarına basarak inkübatörü kapatın.

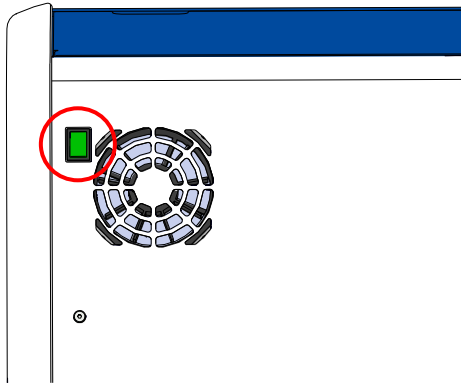


4. Acil durum kilit açma düğmesine basarak yükleme kapağının kilidini açın.

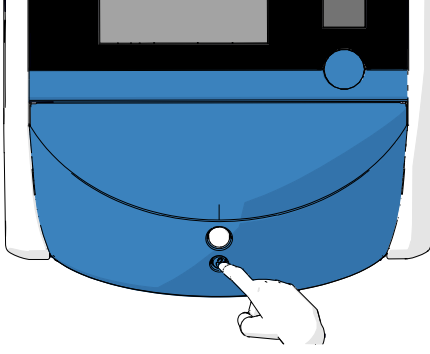


5. Beyaz yükleme kapağı açma düğmesine basarak inkübasyon bölgesinin yükleme kapağını açın.
6. İnkübatörün içinde başka kültür kapları olup olmadığını kontrol edin. Eğer hala içinde bir ya da daha fazla kültür kabı varsa acil durum prosedürü bölüm 9 altında açıklanan şekilde çıkarın.
7. Yükleme alanı çerçevesini çıkarın.

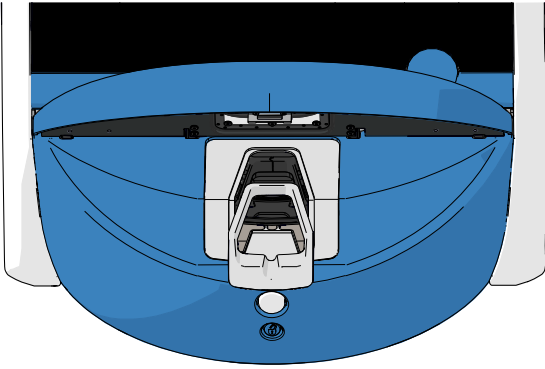

8. Parçacık bırakmayan bir peçeteyi nemlendirin ve EmbryoScope+ İnkübatörün tüm iç ve dış yüzeylerini temizleyin.
- İnkübatörün ve kültür kabı tutucusunun, önce temiz, distile suyla, ardından sulandırılmış %70'lik etanol çözeltisi ile ve son olarak tekrar distile su ile temizlenmesi önerilir.
9. Kültür kabı tutucusunu temizlemek için hem parçacık bırakmayan peçeteler hem de parçacık bırakmayan pamuklu çubuklar kullanın.

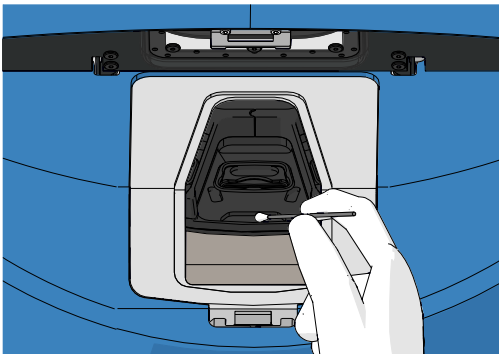

10. Kültür kabı tutucusunu, tüm konumlar temizlenene kadar bir sonraki konumuna manuel olarak döndürün.

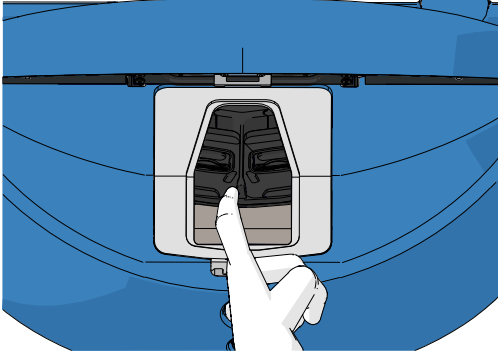

11. Temizlik işlemleri tamamladıktan sonra, alkol buharının dağılması için yükleme kapısını, (en az 10 dakika olmak üzere) yeterince uzun süre açık bırakın.
12. Parçacık bırakmayan bir peçeteyi nemlendirin ve yükleme alanı çerçevesini temizleyin.
Çerçevenin ve kültür kabı tutucusunun, önce temiz, distile suyla, ardından sulandırılmış %70'lik etanol çözeltisi ile ve son olarak tekrar distile su ile temizlenmesi önerilir.
13. Yükleme alanı çerçevesinin tamamen kuru olduğundan ve kullanılmış temizlik maddesinin tüm izlerinin buharlaştığından emin olun. Ardından yükleme alanı çerçevesini yerine takın.
14. Parçacık bırakmayan bir peçeteyi temiz, distile su ile ıslatın ve EmbryoScope+ inkübatörün yüzeylerini silin.
15. EmbryoScope+ inkübatörü inceleyin. Inkübatör görünürde temizse kullanıma hazırdır. Eğer görünürde temiz değilse, adım 7'e dönün ve periyodik temizleme prosedürünü tekrar edin.
16. Temizledikten sonra, arkadaki ana güç anahtarına basarak EmbryoScope+ inkübatörü açın. EmbryoScope+ inkübatörü, içine herhangi bir kültür kabı koymadan önce içinde embriyo olmadan en az üç saat boyunca çalıştırın.

5.2 EmbryoScope+ inkübatörü dezenfekte etme

UYARI

- EmbryoScope+ inkübatörü asla içinde embriyolar varken dezenfekte etmeyin.


NOT

- Laboratuvar kurallarına uygun bir dezenfektan kullanın.


Eldiven takma ve iyi temizleme teknikleri başarılı bir temizlik için önemlidir.

Kontaminasyon ve/veya dökülme durumunda, EmbryoScope+ inkübatörü dezenfekte etmek için aşağıdaki prosedürü izleyin.


- PC ekranında ayarlar simgesine basın. Ardından **Shutdown** (Kapat) simgesine basın ve çalışan her kültür kabını tek tek çıkarın.
- Ekranda, tüm kültür kaplarının çıkarıldığını kontrol edin.
- Arkadaki ana güç anahtarına basarak inkübatörü kapatın.

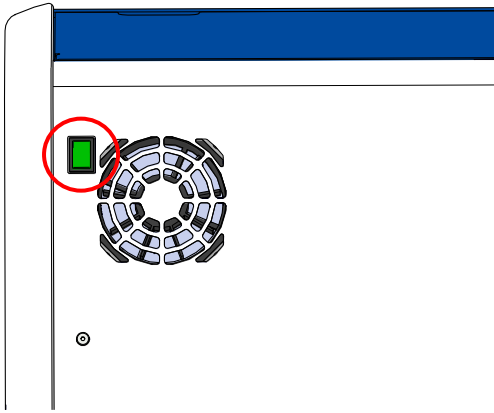


- Acil durum kilit açma düğmesine basarak yükleme kapağının kilidini açın.

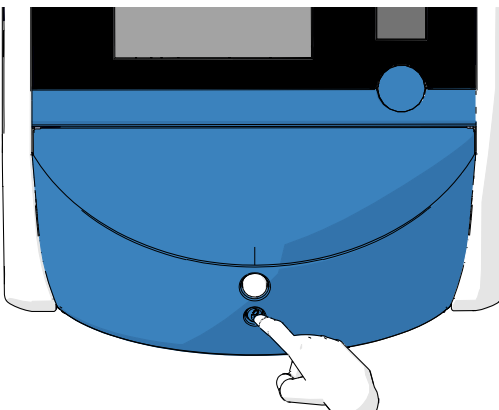


5. Beyaz yükleme kapağı açma düğmesine basarak inkübasyon bölgesinin yükleme kapağını açın.
6. Yükleme alanı çerçevesini çıkarın.

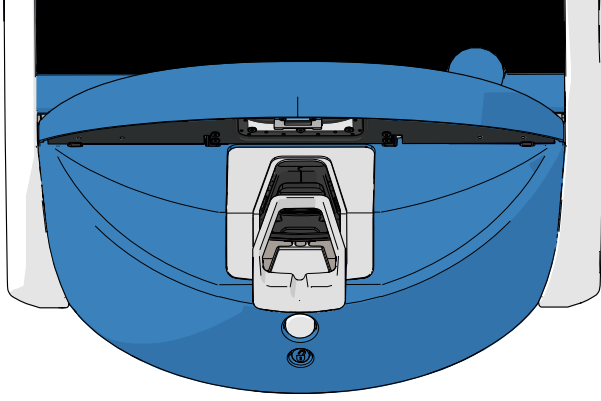

7. Tüm iç yüzeyleri temizleyin: Parçacık bırakmayan peçeteleri temiz, distile suyla ıslatın ve tüm iç yüzeyleri silin. Bezlerin renkleri gidene kadar işlemi tekrarlayın.
8. Kültür kabı tutucusunu temizlemek için temiz, distile suyla ıslatılmış parçacık bırakmayan peçeteler ve parçacık bırakmayan pamuklu çubuklar kullanın. Peçeteler ve pamuklu çubukların rengi değişmeyene kadar bu işlemi tekrarlayın.

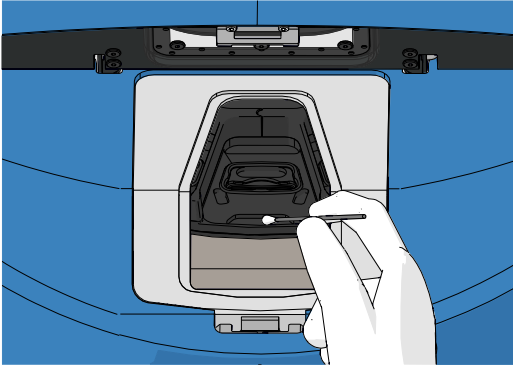

9. Kültür kabı tutucusunu, 8. adımda açıklandığı gibi tüm kirlenmiş konumlar temizlenene kadar bir sonraki konumuna manuel olarak döndürün.

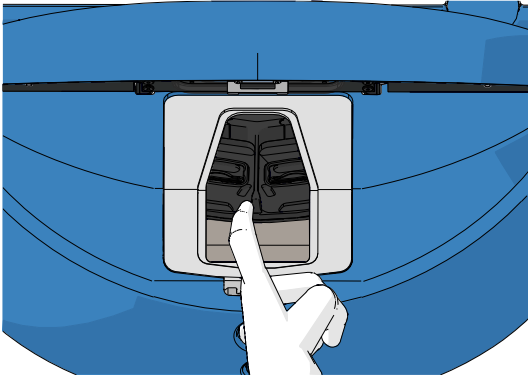

10. Yükleme alanı çerçevesini temizleyin: Hav bırakmayan peçeteleri temiz, distile suyla ıslatın ve yükleme alanı çerçevesini silin. Bezlerin renkleri gidene kadar işlemi tekrarlayın.
11. Eldivenleri değiştirin ve hav içermeyen bir beze ve kulak çubuklarına laboratuvar kurallarına uygun bir dezenfektan uygulayın. Ardından tüm yüzeyleri ve kültür kabı tutucusunu ve yükleme alanı çerçevesini silin. Bunu yapmak için distile su yerine dezenfektan kullanarak 7. - 10. adımları uygulayın.
12. 15 dk'lık temas süresinden sonra hav bırakmayan peçeteye ve kulak çubuğuna temiz ve distile su uygulayın. Ardından tüm yüzeyleri ve kültür kabı tutucusunu ve yükleme alanı çerçevesini silin. Bunun için 7 - 10 arası adımları tekrarlayın.
13. Yükleme alanı çerçevesinin tamamen kuru olduğundan ve kullanılmış temizlik maddesinin tüm izlerinin buharlaştığından emin olun. Ardından yükleme alanı çerçevesini yerine takın.
14. EmbryoScope+ inkübatörü inceleyin. Inkübatör görünürde temizse kullanıma hazırdır. Eğer görünürde temiz değilse 8. - 13. adımları uygulayın ve işlemleri tekrar edin.
15. Temizlik işlemleri tamamladıktan sonra, buharların dağılması için yükleme kapağını, (en az 10 dakika olmak üzere) yeterince uzun süre açık bırakın.
16. Arkadaki ana güç anahtarına basarak EmbryoScope+ inkübatörünü açın.
İnkübatörün gaz ve sıcaklık seviyelerinin dengelenmesi ve VOC filtresinin uçucu organik bileşen kalıntılarını uzaklaştırması için üç saat bekleyin.


6 VOC HEPA filtresini deęiřtirme

NOT


- VOC HEPA filtresi, Vitrolife tarafından yetkilendirilmiş bir kiři tarafından ya da filtrenin servis ziyaretleri dıřında deęiřtirilmesi gerekmesi durumunda klinik personeli tarafından deęiřtirilebilir. Bkz. bölüm 13.2.3.
- Her zaman Vitrolife tarafından saęlanan yedek filtreleri kullanın. Hızlı baęlantı parçalarına sadece bu filtre doęru biçimde oturur.

VOC HEPA filtresini deęiřtirmek için bu işlemleri gerçekleştirin:

1. PC ekranında ayarlar simgesine basın. Ardından **Shutdown** (Kapat) simgesine basın ve çalışan her kültür kabını tek tek çıkarın.
2. Ekranda, tüm kültür kaplarının çıkarıldığını kontrol edin.
3. Arkadaki ana güç anahtarına basarak inkübatörü kapatın.


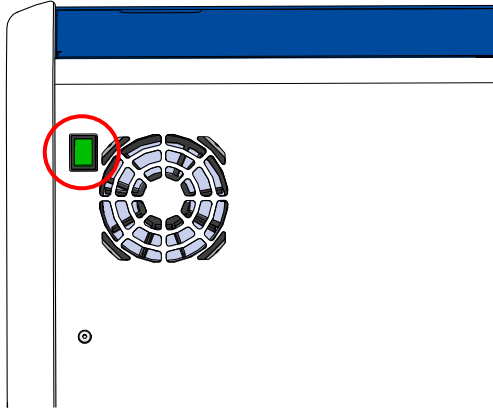


4. İnkübatörün üstündeki servis kapağını açarak VOC HEPA filtresine ulaşın.


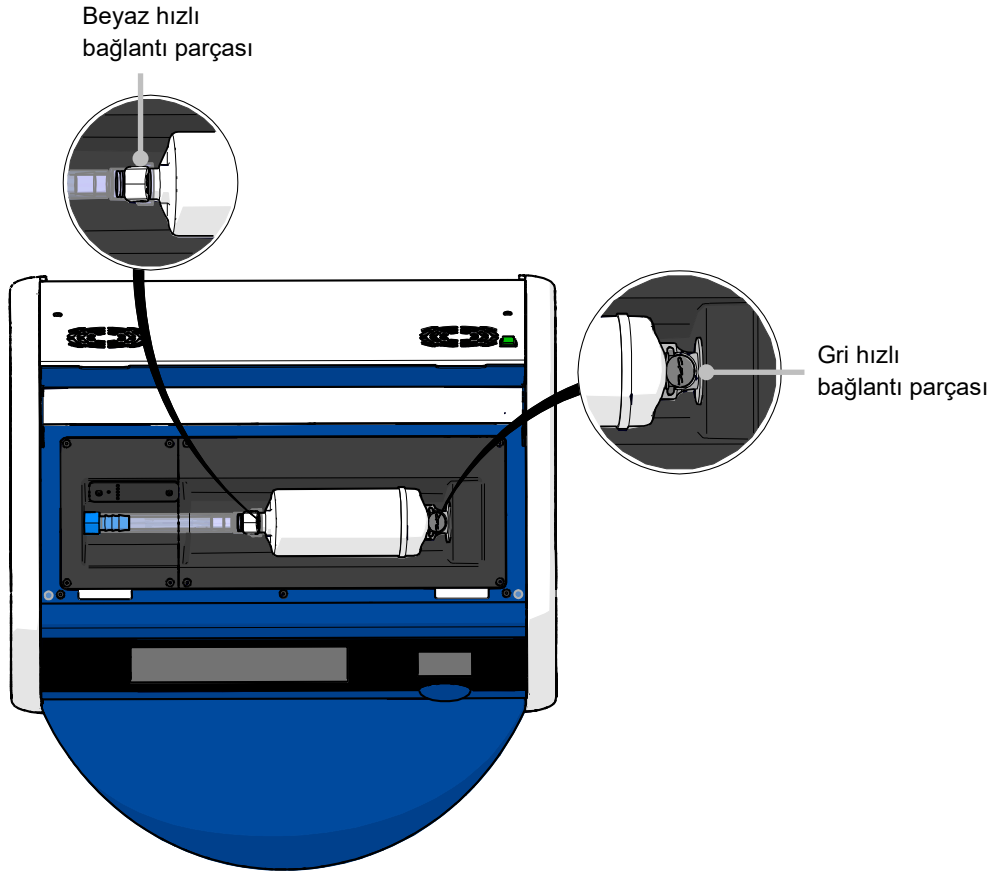


5. VOC HEPA filtresini çıkartmak için sonraki sayfalarda verilen talimatları uygulayın.

- a) Gri hızlı bağlantı parçasına basın (filtre tepsisine takılı) ve filtreyi sola çekin:

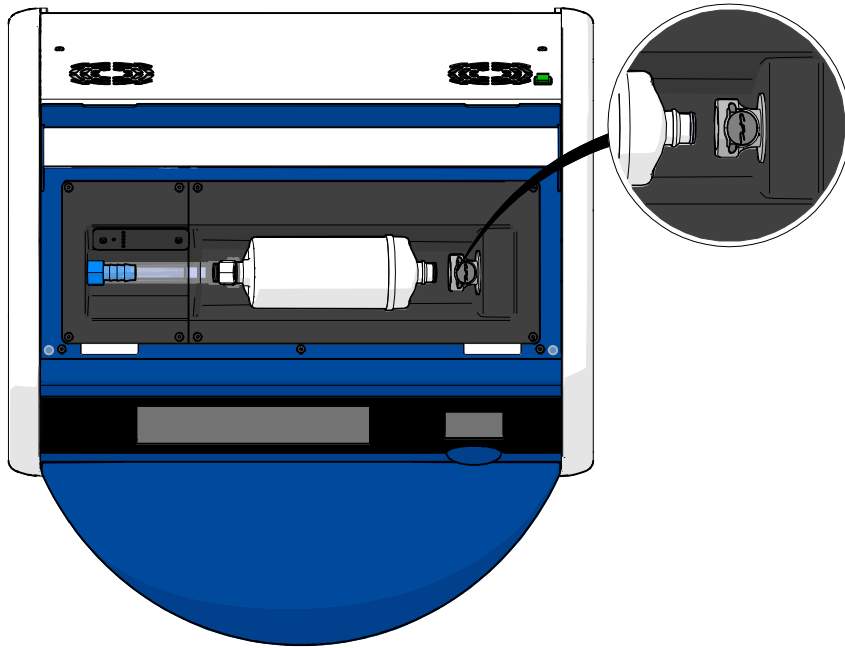
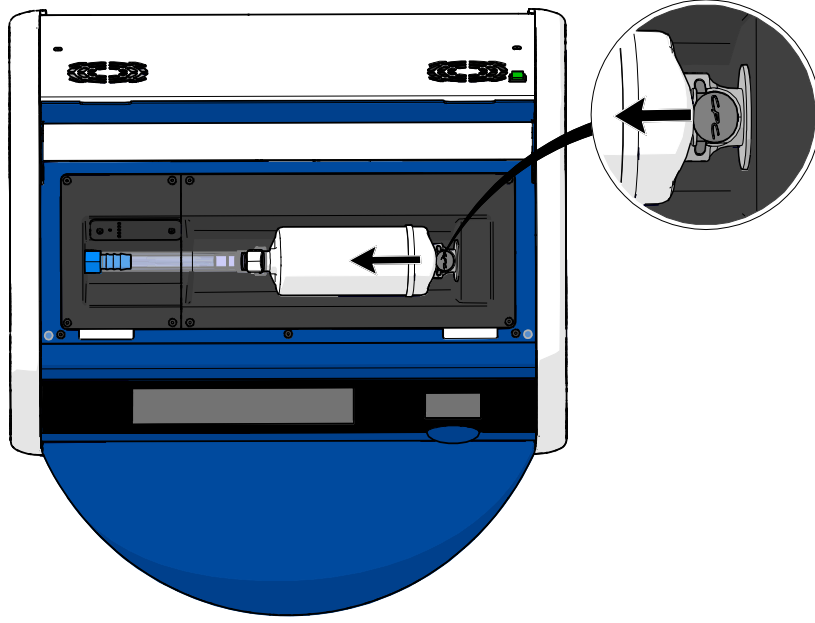


- b) VOC HEPA filtresini dik konuma getirin ve serbest duruma getirmek için filtreyi yukarı çekerken beyaz hızlı bağlantı parçasına basın:

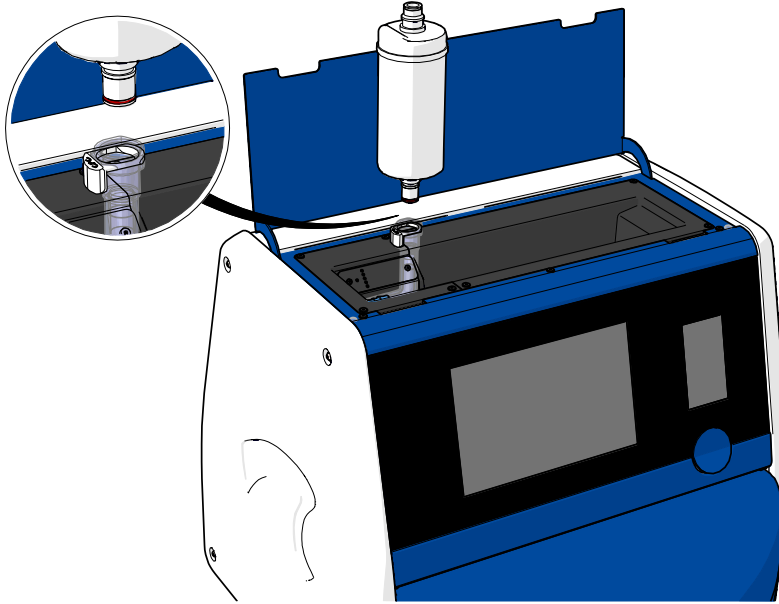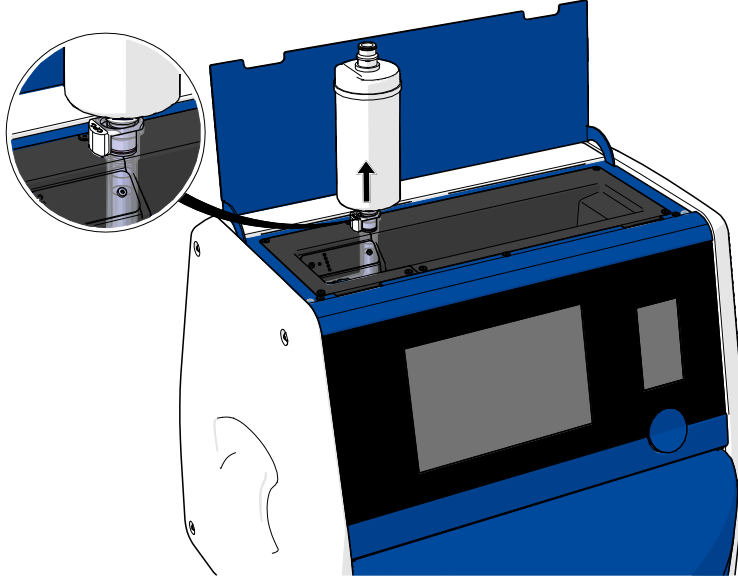



6. Çıkarma işlemlerini tersten gerçekleştirerek yeni bir VOC HEPA filtresi takın:

a) VOC HEPA filtresinin kırmızı O-ring'li ucunu, beyaz hızlı bağlantı parçasına takın:

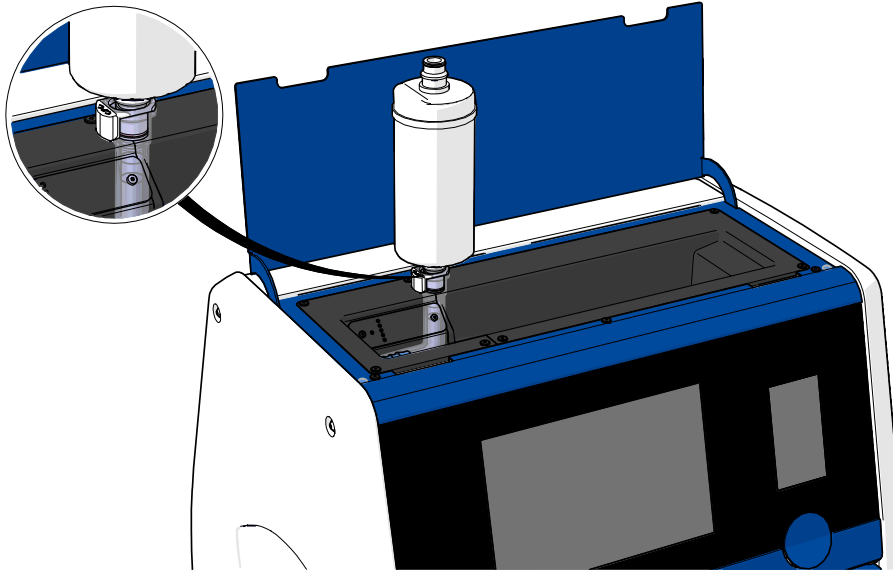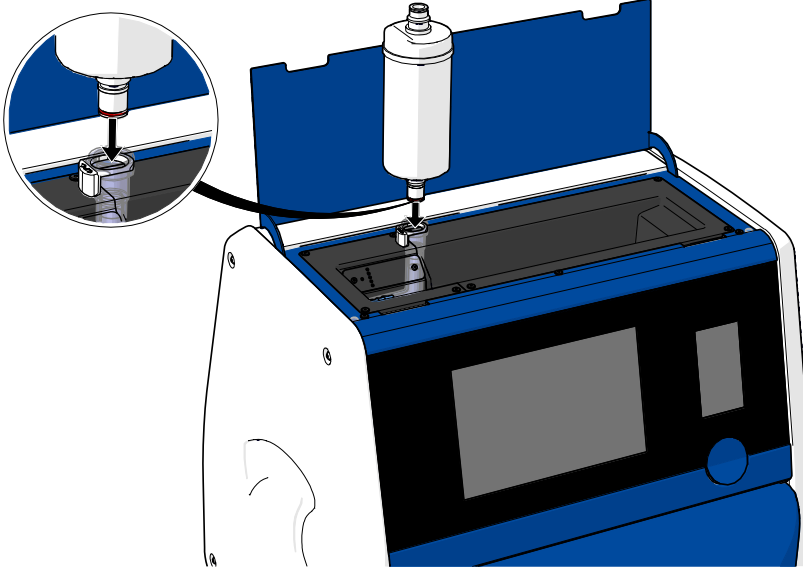

- b) VOC HEPA filtresinin gri O-ring'li ucunu, gri hızlı bağlantı parçasına takın.

Her zaman filtre üzerinde gösterilen akış yönüne dikkat edin:

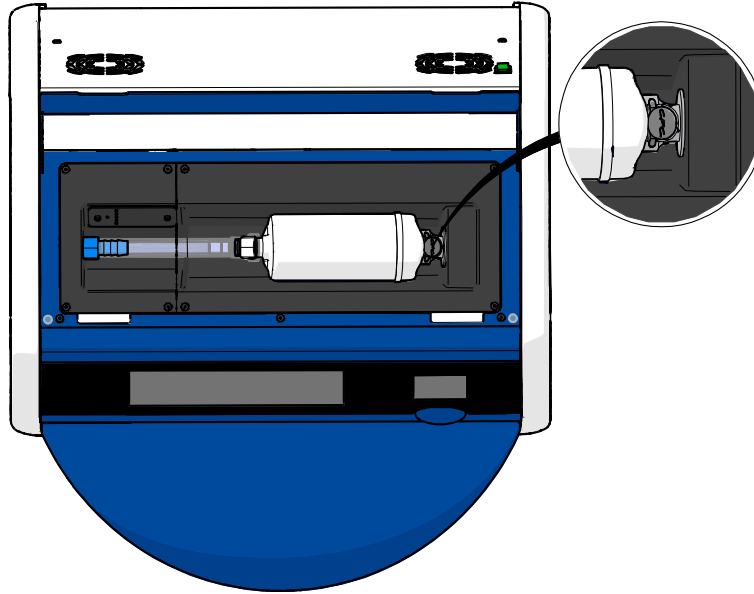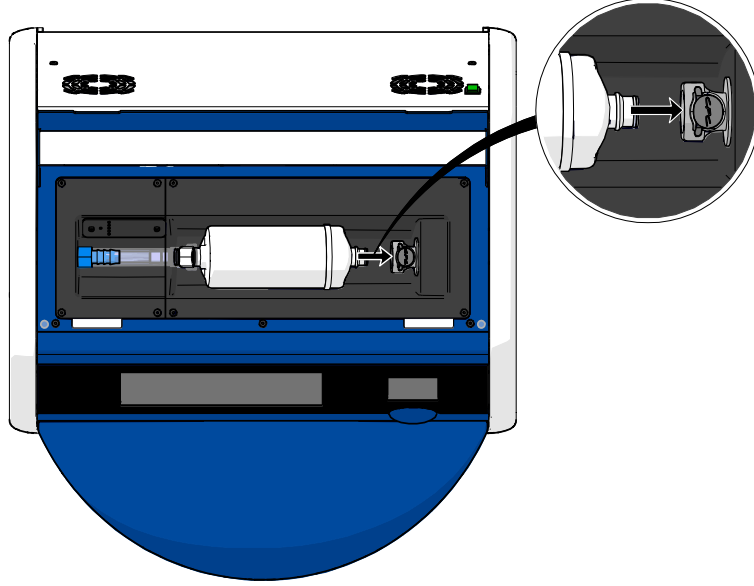

7. Arkadaki ana güç anahtarına basarak inkübatörü açın.

7 Ana sigortaların değiştirilmesi

UYARI

- Aşağıdakilerden herhangi birini denemeden önce ana güç beslemesi kablosunun inkübatörden tamamen çekildiğinden ve tüm kültür kaplarının inkübatörden çıkarıldığından emin olun.

DİKKAT

- Hatalı ana sigortaları her zaman belirtilen değerlere sahip yeni sigortalarla değiştirin.
- Ana sigortaları baypaslamaya ya da atlatmaya çalışmayın.

Hatalı ana sigortaları değiştirmek için bu işlemleri gerçekleştirin:


1. 9. bölümde açıklanan acil durum işlemlerine uygun hareket ederek inkübatördeki tüm kültür kaplarını çıkarın ve standart bir inkübatöre yerleştirin.
2. Ana elektrik kablosunu, inkübatördeki girişinden çıkarın.
3. Elektrik girişinin hemen altında bulunan sigorta çekmecesini dikkatlice açın. Bu amaç için yassı uçlu bir tornavida ya da başka bir küçük nesne kullanın ve çekmece tam açılana ve sigorta ulaşılabilir duruma gelene kadar kapağı ileri doğru kaydırın.



Sigorta çekmecesini



Çekmece tam açılmış:

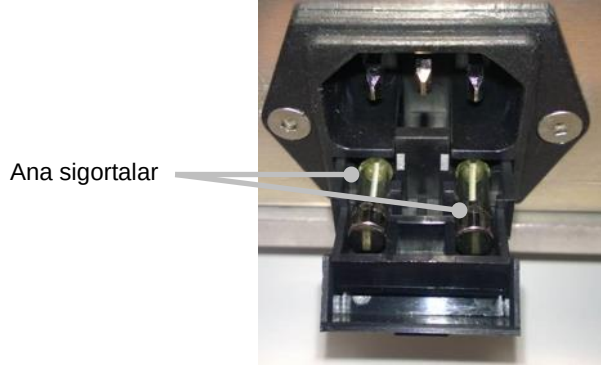

4. Her iki sigortayı dikkatlice çıkarın.
Sigortaları soketlerinden çıkarmanızı kolaylaştırmak için küçük bir nesne kullanabilirsiniz.
5. Sigortaları yenileriyle (2 x T 3,15 A L 250 V) değiştirin.
Yedek sigortaları yanlış yönde takamazsınız.
6. Sigorta çekmecesini, yavaşça yerine iterek kapatın.
7. Ana elektrik kablosunu elektrik girişine takın ve inkübatörü açın.
8. 2.3 bölümde açıklanan başlatma işlemlerini uygulayarak çıkarttığınız kültür kaplarını tekrar yerleştirin.

NOT

- Ana sigortalar tekrar tekrar bozuluyorsa yardım almak için Vitrolife destek ekibi ile görüşün.

8 Alarmlar, uyarılar ve bildirimler

8.1 Alarm, uyarı ve bildirim türleri

8.1.1 Alarmlar

Tüm alarm koşulları, inkübatör üzerinde kırmızı görsellerle ve/veya sesli sinyallerle belirtilir. EmbryoScope+ inkübatör harici bir alarm sistemine bağlıysa aynı zamanda bu harici alarm da devreye girer (bkz. bölüm 8.10). Alarmın türüne ve ciddiyetine bağlı olarak harici alarmın etkinleştirilmesinde bir gecikme olabilir (8.10.2. bölüme bakın). Çoğu alarmlar, üç dakika için duraklatılabilen sesli bir sinyali de tetikler.

Altı tür alarm bulunmaktadır:

- **Sıcaklık alarmı**
- **CO₂ konsantrasyonu alarmı**
- **O₂ konsantrasyonu alarmı**
- **O₂, N₂ girişine bağlı alarm**

Bu alarmlar, inkübasyon koşullarının beklendiği gibi olmadığını gösterir. Şu durumlar görüntülenir: sıcaklık, CO₂ konsantrasyonu ve O₂ konsantrasyonu. Tüm alarmlar inkübatör ekranında gösterilir ve üç dakika için duraklatılabilecek sesli bir sinyal oluşturur. Tüm alarmlar, tanımlanmış bir bekleme süresinden sonra bir harici alarmı (bkz. bölüm 8.9) etkinleştirir.

Alarmların etkinleşmesi için gereken sapmaların tam değerleri için bkz. bölüm 10.

- **İnkübatör arızası alarmı**

Bir inkübatör arızası alarmı, inkübasyon koşullarını kontrol eden ünitenin arızası veya güç kesintisi gibi bir sistem hatasını gösterir. Bu hata, görüntü çekimini kontrol eden Windows PC tarafından tespit edilir. İnkübatör sistemi düzgün çalışmadığından, inkübatör sisteminin kedisi tarafından kontrol edilen sesli alarmı etkinleştirilmesi mümkün değildir. Bunun yerine PC bir sesli alarm verir. Alarm mesajı PC ekranında gösterilir ve harici alarm sistemi etkinleştirilir.

- **Elektrik kesintisi alarmı**

Elektrik kesintisi alarmı, inkübatörün elektrik beslemesinin kesildiğini gösterir. Bu durumda her iki ekran da siyah olur ve görsel bir sinyal gösterilemez. Sesli bir alarm 20 saniye boyunca çalar ve daha sonra susar. Susma sesi 10 saniye boyunca duyulur. Harici alarm da etkinleştirilir.

8.1.2 Uyarılar

Uyarılar, bir tür düşük öncelikli alarmlardır. Uyarılar, ör. görüntü çekiminin durduğunu ya da gaz basıncının çok düşük olduğunu gösterir. Tüm uyarılar inkübatör ekranında gösterilir ve üç dakika boyunca duraklatılabilecek sesli bir sinyal oluşturur. Tüm uyarılar, kırmızı renkte gösterilir ve çoğu belirli bir bekleme süresinden sonra harici bir alarmı etkinleştirir (bkz. bölüm 8.10.2).

Beş tür uyarı bulunmaktadır:

- **Görüntü çekimi 60 dakikadan daha uzun süre durdu**
- **Yükleme kapağı 30 saniyeden uzun bir süre için açık kaldı**
- **CO₂ basıncı çok yüksek/düşük**
- **O₂ basıncı çok yüksek/düşük**
- **Sıcaklık sensörü çalışmıyor** (harici alarm ya da sesli sinyal devreye girmez). Kalan sıcaklık sensörlerinden yalnızca biri düzgün çalışmıyor. Sıcaklık kontrolü kalan çalışır vaziyetteki sıcaklık sensörü ile yapılıyor.)

8.1.3 Bildirimler

Bildirimler, bilgi verici notlardır. Tek bildirim türü bulunmaktadır:

- **ES server ile bağlantı kesilmesi**

Bu bildirim, ES server ile bağlantının geçici olarak kesildiğini gösterir. Bağlantı tekrar kurulana kadar görüntü çekimi devam eder ve veri, EmbryoScope+ inkübatörün sabit diskinde saklanır. Saklanan veriler, bağlantı tekrar kurulduğunda otomatik olarak ES server'a aktarılır.

Ancak bağlantı tekrar kurulana ve veriler aktarılanaya kadar:

- Görüntülerden bazıları ES server'de bulunmayacaktır ve dolayısıyla EmbryoViewer'da değerlendirme için kullanılamaz.
- EmbryoViewer'da yapılan embriyo seçimleri, EmbryoScope+ inkübatörde güncellenmeyecektir.
- Barkod işlevi çalışmayacaktır. Kültür kabı yerleştirirken hasta bilgilerini manuel olarak girmeniz gerekir.

8.2 Alarmların geçici olarak duraklatılması

Alarmlar, düzeltici işlemler yapmanız gerektiğini gösteren sesli sinyallerdir. Sesli sinyali üç dakika süreyle duraklatmak için sesli alarmı duraklat düğmesine basın:



İnkübasyon koşullarından biri beklendiği gibi değilse (örneğin, ayar noktasından saptıysa), inkübatör ana sayfa ekranında o koşulla ilgili düğme kırmızı renge döner.

Sesli sinyalin duraklatılması, düğmenin rengini etkilemez ve sorun çözülene kadar kırmızı yanıp sönmeye devam eder. Ancak sesli sinyali duraklattığınızda sesli alarmı duraklat düğmesi soluk hali gelir:

37.5 °C	37.5 °C
6.0 % CO ₂	6.0 % CO ₂
5.0 % O ₂	5.0 % O ₂
	

Sesli sinyal, duraklatılmasından üç dakika sonra otomatik olarak devam edecektir. Bu durum, sorun çözülene kadar devam edecektir.

Bir ya da daha fazla alarm etkinken ayar noktaları ya da kalibrasyon değiştirilemez. İnkübatörün kapatılması ve tekrar açılması tüm alarmları sıfırlar ve açılış işlemleri sırasında ayar noktalarını değiştirmenize olanak tanır. Bu süreçten sonra, alarmın meydana gelmesine neden olan koşullar henüz çözülmediyse alarm tekrar çalmaya başlar.


8.3 Alarmların, uyarıların ve bildirimlerin gösterim renklerine genel bakış

Alarmlar, uyarılar ve bildirimler, aşağıda açıklanan renk düzeninde gösterilir.

8.3.1 Alarmlar

Aktif alarmlar, inkübatör ana sayfa ekranında kırmızı renkte gösterilir. Alarma neden olan koşul, yeniden normal aralığına geldiğinde (yani ayar noktasına yakın değere), koşul, inkübatör ekranında turuncu renkte gösterilir. Alarmlar sıfırlandığında ekran varsayılan siyah rengine geri döner.

Aşağıda alarm rengi düzeni grafiksel olarak gösterilmektedir:

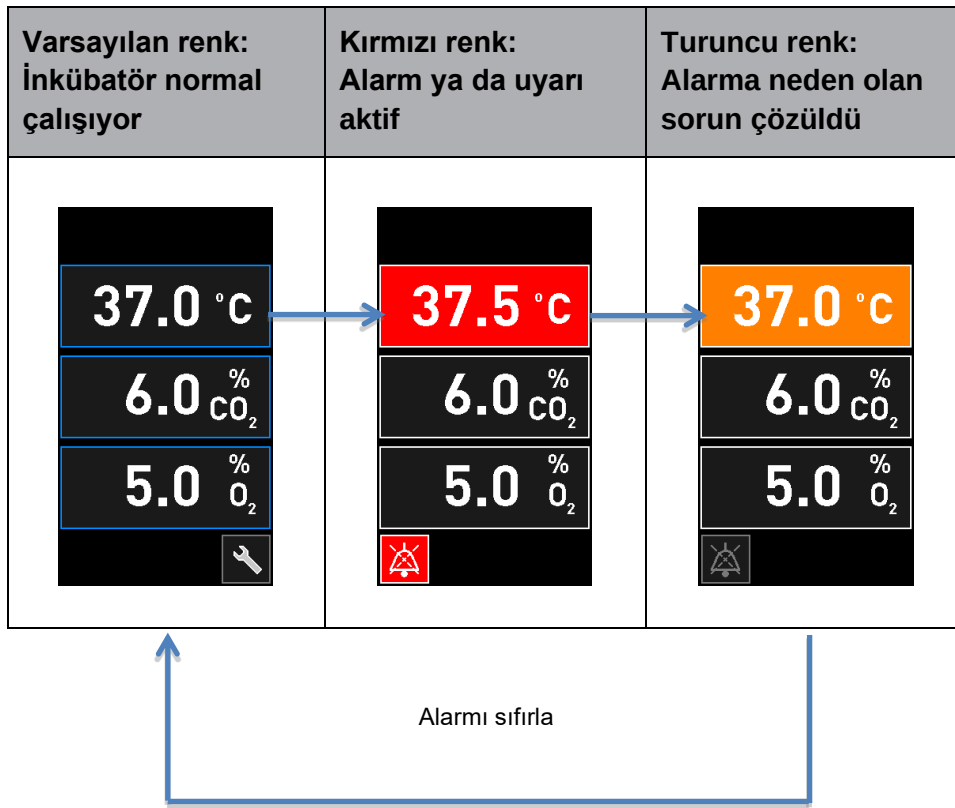

8.3.2 Uyarılar


Aktif uyarılar, inkübatör ekranında kırmızı renkte gösterilir. Uyarı ekranı inkübatör ana sayfa ekranıyla değişmeli şekilde görüntülenir. Sorun çözüldüğünde uyarı gösterilmez ve inkübatör ekranı varsayılan, siyah ana sayfa ekranına geri döner.

8.3.3 Bildirimler


Bildirimler, her zaman sunucu bağlantısının kesildiğini gösterir. Bu tür bildirimler, PC ana sayfa ekranının sol alt köşesinde kırmızı renkte gösterilir: . Sorun çözüldüğünde, bildirim artık etkin değildir ve ekran normal görünümüne geri döner: .

8.4 Aynı anda birden fazla alarm

Aynı anda birden fazla alarm etkin hale gelirse inkübatörün ana sayfa ekranında birden fazla kırmızı düğme bulunur. Aynı inkübasyon koşulu için hem bir alarm hem de bir uyarı etkin olabilir (örneğin CO₂ konsantrasyonu ile ilgili bir alarm ve CO₂ basıncıyla ilgili bir uyarı).

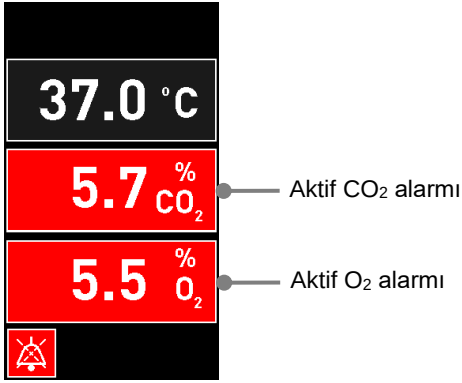

Tüm alarmlar çözülmeye (turuncu renkte gösterilir) ve sıfırlanana kadar varsayılan inkübatör ana sayfa ekranına geri dönülemez, ayar noktaları değiştirilemez ya da dahili sensörler kalibre edilemez.

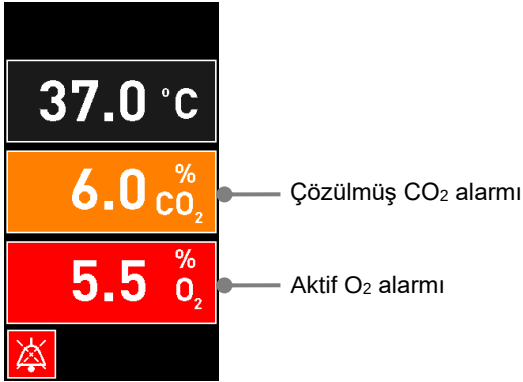

8.5 Alarmların sıfırlanması


Yalnızca sıcaklık, CO₂ konsantrasyonu ve O₂ konsantrasyonu ile ilgili çözülmüş alarmlar sıfırlanabilir.

Sıcaklık, CO₂ ya da O₂ ile ilgili çözülmüş alarmların varsayılan inkübatör ana sayfa ekranına geri dönmek ve ayar noktalarının değiştirilmesi ya da sensörlerin kalibre edilmesi gibi işlemlere olanak sağlamak için değerlendirilmesi ve sıfırlanması gerekmektedir.


Yalnızca artık etkin olmayan, çözülmüş alarmlar sıfırlanabilir. Bu alarmlar, turuncu renkte gösterilir.

Çözülmüş bir alarmı sıfırlamak için:

1. Çözülmüş inkübasyon koşulu için düğmeye basın:

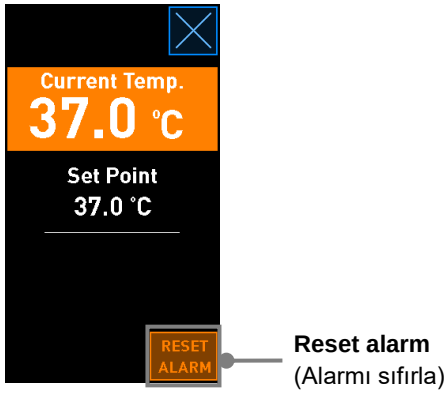

2. **Reset alarm** (Alarmı sıfırla) düğmesine basın. Inkübatör ana sayfa ekranı artık gösterilir.

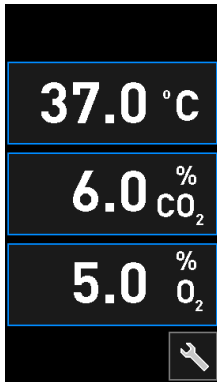



8.6 Alarmların grafik gösterimi ve operatörün yapması gerekenler



Alarmlar aşağıdaki durumlar etkinleştirilir:



- İnkübatörün içindeki sıcaklık, ayar noktasından farklı olduğunda
- İnkübatörün içindeki CO₂ konsantrasyonu ayar noktasından farklı olduğunda
- İnkübatörün içindeki O₂ konsantrasyonu ayar noktasından farklı olduğunda
- Nitrojen girişine yanlışlıkla oksijen tüpü bağlandığında
- İnkübatörün kendisi düzgün çalışmadığında (bozuk)
- İnkübatöre giden elektrik kesildi.


Alarmların etkinleşmesi için gereken sapmaların tam değerleri için bkz. bölüm 10.

İlerideki sayfalarda, tüm alarmları ve operatörün yapması gerekenleri bulabilirsiniz.

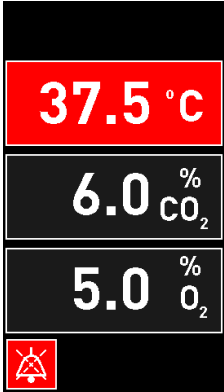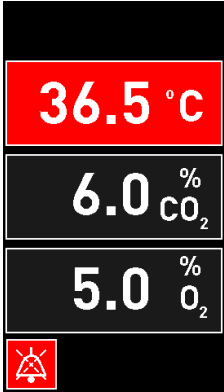SICAKLIK		
Hata durumu 1	Hata durumu 2	Operatörün yapması gerekenler
Sıcaklık çok yüksek: 	Sıcaklık çok düşük: 	Hata koşulu hemen çözülmiyorsa EmbryoScope+ inkübatörü, inkübatörün arkasında yer alan ana güç anahtarından kapatın. Sonrasında, 9. bölümde açıklanan acil durum prosedürünü izleyerek tüm kültür kaplarını çıkarın.

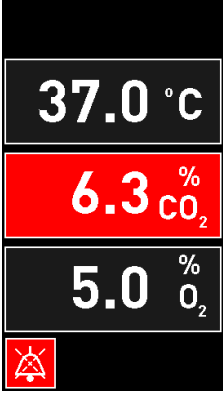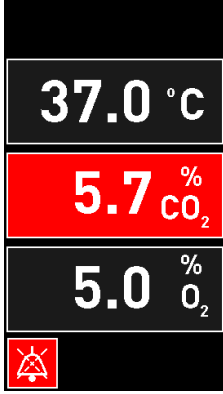CO ₂ KONSANTRASYONU		
Hata durumu 1	Hata durumu 2	Operatörün yapması gerekenler
CO₂ konsantrasyon çok yüksek: 	CO₂ konsantrasyonu çok düşük: 	Hata durumu hemen çözilemiyorsa PC ana sayfa ekranı -> Settings (Ayarlar) ekranı -> Shutdown (Kapat) düğmesi ile EmbryoScope+ inkübatörü kapatın. Daha sonra ekranda verilen talimatlara uygun olarak tüm kültür kaplarını çıkarın.

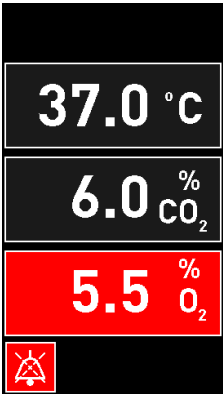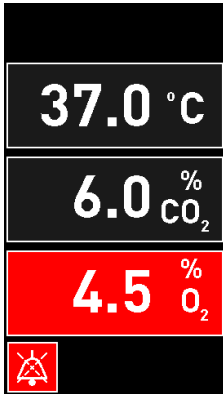O ₂ KONSANTRASYONU		
Hata durumu 1	Hata durumu 2	Operatörün yapması gerekenler
O₂ konsantrasyonu çok yüksek: 	O₂ konsantrasyonu çok düşük: 	Hata durumu hemen çözilemiyorsa PC ana sayfa ekranı -> Settings (Ayarlar) ekranı -> Shutdown (Kapat) düğmesi ile EmbryoScope+ inkübatörü kapatın. Daha sonra ekranda verilen talimatlara uygun olarak tüm kültür kaplarını çıkarın.

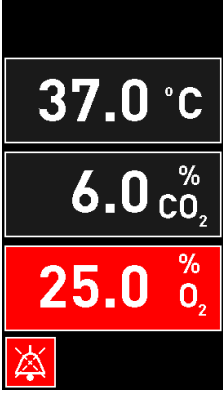GAZ BAĞLANTISI		
Hata durumu 1	Hata durumu 2	Operatörün yapması gerekenler
Nitrojen girişine yanlışlıkla oksijen tüpü bağlanırsa O₂ konsantrasyonu %25'e ulaştığında O₂ yüksek alarmı etkinleştirilecektir: 	Yok	Hata koşulu hemen çözilemiyorsa EmbryoScope+ inkübatörü, inkübatörün arkasında yer alan ana güç anahtarından kapatın. Sonrasında, 9. bölümde açıklanan acil durum prosedürünü izleyerek tüm kültür kaplarını çıkarın.

İNKÜBATÖR ARIZASI		
Hata durumu 1	Hata durumu 2	Operatörün yapması gerekenler
İnkübatör düzgün çalışmıyor: 	Yok	İnkübatör arızası alarmı devreye girerse EmbryoScope+ inkübatörünü, inkübatörün arkasında yer alan ana güç anahtarından kapatın. Sonrasında, 9. bölümde açıklanan acil durum prosedürünü izleyerek tüm kültür kaplarını çıkarın.

ELEKTRİK KESİNTİSİ		
Hata durumu 1	Hata durumu 2	Operatörün yapması gerekenler
İnkübatöre giden elektrik kesildi. Görsel alarm sinyali görüntülenemez. Bu alarm türünde yalnızca yavaşça ses seviyesi azalan sesli bir sinyal verilecektir.	Yok	Tam bir elektrik kesintisi olması halinde cihazın arkasında bulunan ana güç anahtarını kullanarak EmbryoScope+ inkübatörünü kapatın. Sonrasında, 9. bölümde açıklanan acil durum prosedürünü izleyerek tüm kültür kaplarını çıkarın.



8.7 Uyarıların grafik gösterimi ve operatörün yapması gerekenler

Bu durumlarda bir uyarı verilir:

- Bağlı gaz borusundaki CO₂/N₂ basıncı çok düşükse
- Görüntü çekimi durduğunda
- Yükleme kapağı 30 saniyeden uzun bir süre için açık kalırsa
- Sıcaklık sensörlerinden biri düzgün çalışmıyor.


Bir uyarının etkinleşmesi için gereken sapmaların tam değerleri için bkz. bölüm 10.

İlerideki sayfalarda, tüm olası uyarıları ve operatörün yapması gerekenleri bulabilirsiniz.

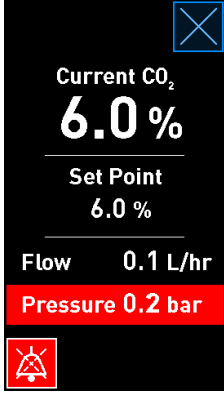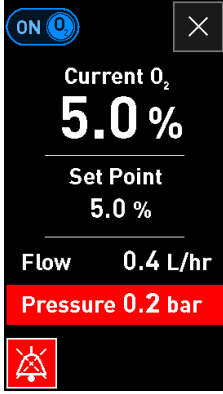GİRİŞ BASINCI		
Hata durumu 1	Hata durumu 2	Operatörün yapması gerekenler
CO₂ giriş basıncı çok düşük: 	N₂ giriş basıncı çok düşük: 	Gerekli basınçta uygun gaz beslemesi sağlamak için gaz silindirlerini ve besleme hatlarını kontrol edin (bkz. spesifikasyonlar).

GÖRÜNTÜ ÇEKİMİ DURDU		
Hata durumu 1	Hata durumu 2	Operatörün yapması gerekenler
Görüntü çekimi öngörülemez durumlardan dolayı durdu:  Ekrana varsayılan inkübatör ana ekranı ile değişir, böylece inkübasyon durumları operatör için her zaman görünürdür.	Yok	Ekranda verilen talimatları izleyin. Sorun devam ederse Vitrolife destek ekibiyle görüşün.

YÜKLEME KAPAĞI AÇIK		
Hata durumu 1	Hata durumu 2	Operatörün yapması gerekenler
Yükleme kapağı 30 saniyeden uzun bir süre için açık kaldı: 	Yok	Yükleme kapağını kapatın.

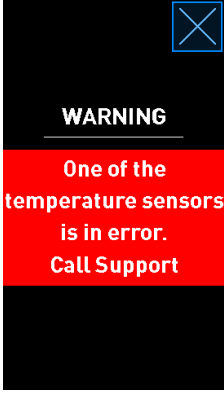SICAKLIK SENSÖRÜNDE HATA		
Hata durumu 1	Hata durumu 2	Operatörün yapması gerekenler
Sıcaklık sensörlerinden biri düzgün biçimde çalışmıyor. Diğer sıcaklık sensörü hala düzgün çalışıyor ve mikrokuyudaki sıcaklığı kontrol ediyor: 	Yok	Vitrolife destek ekibiyle görüşün.

8.8 Bildirimlerin grafik gösterimi ve operatörün yapması gerekenler

Aşağıdaki durumlarda bildirim verilir:

- ES server bağlantısı kesildiğinde.

Aşağıda bildirimlerin grafiksel gösterimi ve operatörün yapması gerekenleri görebilirsiniz.

ES SERVER İLE BAĞLANTI KESİLDİ		
Hata durumu 1	Hata durumu 2	Operatörün yapması gerekenler
ES server bağlantısı kesildi: 	Yok	ES server ile bağlantıyı tekrar kurun. Yapılamıyorsa Vitrolife destek ekibiyle görüşün.

8.9 Hata durumlarına genel bakış ve kontrol ünitesinin tepkileri

Hata durumu	Görsel uyarı			Sesli sinyal			Gecikme (görsel ve işitsel)	Harici alarm		“Resolved” (Çözüldü) gösterimi
	Sinyalin rengi	İnkübatör ekranı	PC ekranı	İnkübatör sesi (duraklatılabilir)	Elektrik kesintisi sesi (20 saniye sonra kapanır)	PC sesi	Gecikme (dakika)	Harici alarm etkinleştirildi	Ek gecikme (dakika)	Alarm meydana geldiği ve bunun çözüldüğü gösterimi (İnkübatör ekranında turuncu)
Alarm: Sıcaklık ¹	Kırmızı	EVET	Detaylar	EVET	-	-	0	EVET	2	EVET
Alarm: CO ₂ konsantrasyonu ¹	Kırmızı	EVET	Detaylar	EVET	-	-	0 ya da 5 ²	EVET	2	EVET
Alarm: O ₂ konsantrasyonu ¹	Kırmızı	EVET	Detaylar	EVET	-	-	0 ya da 5 ²	EVET	2	EVET
Alarm: O ₂ , N ₂ 'ye bağlı	Kırmızı	EVET	Detaylar	EVET	-	-	0	EVET	2	EVET
Alarm: İnkübatör arızası	Bkz. 8.6	-	Detaylar	-	-	EVET	0,5	EVET	0	-
Alarm: Elektrik kesintisi	-	-	-	-	EVET	-	0	EVET	0	-
Uyarı: Görüntü çekimi durdu	Kırmızı	EVET	Detaylar	EVET	-	-	60 dakikadan kısa	EVET	2	-
Uyarı: Yükleme kapağı açık	Kırmızı	EVET	Detaylar	EVET	-	-	0,5	EVET	2	-
Uyarı: CO ₂ basıncı	Kırmızı	EVET	Detaylar	EVET	-	-	3	EVET	2	-
Uyarı: N ₂ basıncı	Kırmızı	EVET	Detaylar	EVET	-	-	3	EVET	2	-
Uyarı: Sıcaklık sensörü	Kırmızı	EVET	Detaylar	HAYIR	-	-	12 saat sonra tekrar eder	HAYIR	-	-
Bildirim: ES server ile bağlantı yok	Bkz. 8.8	-	Detaylar	-	-	-	-	-	-	-

¹ Sistemin başlamasından sonraki ilk 30 dakikada sıcaklık ya da gaz konsantrasyonu alarmları etkinleştirilmez.

² Sesli sinyal, herhangi bir gecikme olmadan çalar. Ancak alarmlar, inkübasyon koşullarının düzelmesine vakit tanımak için kapağın açılmasından sonraki beş dakika boyunca devre dışı bırakılır. Kalibrasyondan ya da ayar noktası ayarlamalarından sonra gecikme bir dakika olacaktır. Doğrulama sırasında sinyal verilmez.

8.10 Harici alarm sistemi

EmbryoScope+ inkübatördeki entegre alarm sistemi, inkübatörün arka kısmında bulunan bir giriş aracılığıyla harici bir alarm sistemine bağlanabilir. EmbryoScope+ inkübatörün alarm sinyali, kullanıcıları arama, çağrı, SMS veya e-posta yoluyla bilgilendirebilen birçok ticari harici alarm sistemi tarafından tespit edilebilir. Bu, sıcaklık ve gaz konsantrasyonları gibi kritik inkübasyon koşullarının 24 saat ileri seviyede izlenmesini sağlar.

8.10.1 Harici alarm sistemine gönderilen hatalara genel bakış

Harici alarm sistemi sadece önceden tanımlı hatalar meydana geldiğinde aktive olur (8.10.2. bölümde verilen aktivasyon gecikmelerine bakın). Aşağıda harici alarm sistemini etkinleştiren hataların bir listesi yer almaktadır.

Bu listeye dahil edilmeyen hatalar harici alarm oluşturmaz.

Alarmlar:

- Sıcaklık alarmları
- CO₂ konsantrasyonu alarmları
- O₂ konsantrasyonu alarmları
- O₂, N₂ girişine bağlı alarmları
- Inkübatör arızası alarmları
- Elektrik kesintisi alarmları.

Uyarılar:

- Görüntü çekimi durdu
- Yükleme kapağı açık
- CO₂ basınç uyarısı
- O₂ basınç uyarısı.

Harici alarmı oluşturacak alarmlar ve uyarıları görmek için 8.1.1. ve 8.1.2. bölümlere bakın.

8.10.2 Harici alarmlar ve uyarılar için gecikmeler

Birçok durumda bir hata koşulu meydana geldiğinde, harici alarm aktive edilmeden önce bir süre gecikmesi meydana gelir. Bu, normal çalışma esnasında harici alarm sisteminin yanlışlıkla veya erken etkinleştirilmesini önler.

Alarmlar, harici olarak gönderilmeden önce PC ekranında ya da inkübatörün kendi ekranında görüntülenir. Bu durum, örneğin sıcaklık alarmlarının inkübatörün kendisinde anında etkinleştirileceği anlamına gelir.


Çeşitli alarmların, uyarıların ve bildirimlerin inkübatörün kendisinde ne zaman etkinleştirildiği hakkında bilgi edinmek için bkz. bölüm 10.

Oluşabilecek her türlü hata durumu için 8.9 bölümde yer alan tabloda, hata türünün harici alarm sistemine gönderilmesinden önceki gecikme süresi belirtilmektedir.

8.10.3 Harici alarm bağlantısı kurma

Bu bölümde yer alan bilgiler, öncelikle EmbryoScope+ inkübatörü harici bir alarmla kurma görevini üstlenen teknik personele yöneliktir.

Dört pimli alarm fişi üzerinde *Alarm* yazar ve bu fiş EmbryoScope+ inkübatörün arkasına takılır (bkz. bölüm 3). Seri numarası 4000'den küçük (solda, aşağıda) ve seri numarası 4000'den büyük (sağda, aşağıda) EmbryoScope+ inkübatörlerde fişler birbirinden farklıdır:

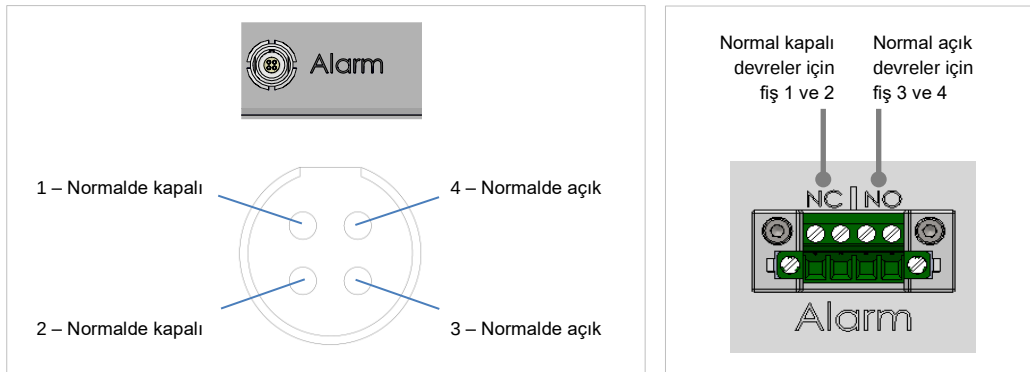

EmbryoScope+ inkübatör iki tür devreyi destekler: normal kapalı veya normal açık. Bağlı harici alarm sisteminin seçilen devre türüne uygun olması gerekmektedir.

Hangi tür devrenin kullanılacağı kliniğin tercihlerine bağlıdır.

9 Acil durum prosedürü

Acil durum prosedürü aynı zamanda servis kapağının altında bulunur.

9.1 Bir sistem arızası sonrası kültür kaplarını çıkarma


Tüm kültür kaplarını sonlandırmanın en güvenli yolu 4.2.1.5. bölümde açıklanmaktadır. Ancak, acil bir durum söz konusuysa, tüm kültür kapları aşağıdaki işlemler gerçekleştirilerek hemen sonlandırılabilir.

NOT


- Acil durum prosedürü sadece kültür kaplarının çalıştırılmasını korumaya yönelik tüm diğer seçenekler başarısız olduğunda kullanılmalıdır.

1. EmbryoScope+ inkübatörü ana güç anahtarından kapatın.


Ana güç anahtarı arkada, sol üst köşede bulunan, yeşil renkte aydınlatılan anahtardır.

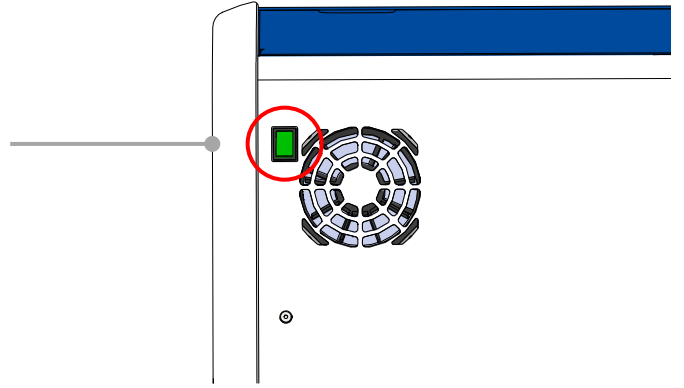


2. Yükleme kapağını açmak için öndeki acil durum kilit açma düğmesine basın. Daha sonra beyaz yükleme kapağını açma düğmesine basın.

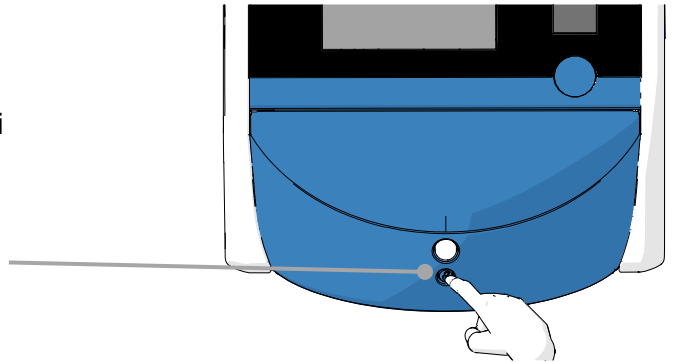


3. Yükleme alanı çerçevesini çıkarın.

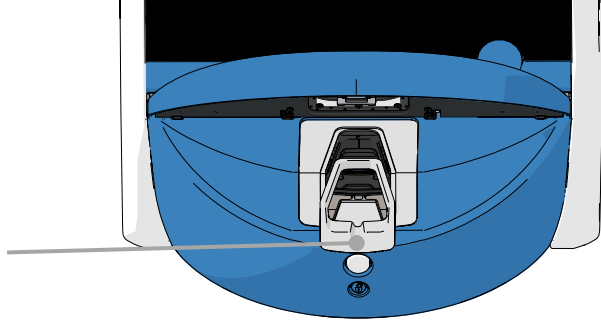

4. Kültür kabı görünene kadar kültür kabı tutucusunu elle saat yönünde döndürün. Daha sonra kültür kabını çıkarın ve başka bir inkübatöre yerleştirin.

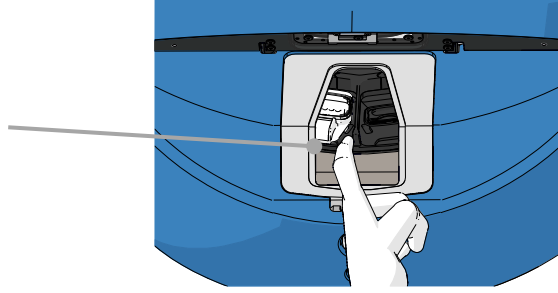

5. Kültür kabı tutucusunu tekrar döndürerek kalan kültür kaplarını tek tek çıkarın. Son durma noktasına gelene kadar bu işlemi tekrarlayın. Daha sonra, son durma noktasına gelene kadar tutucuyu saat yönünün tersine döndürün.

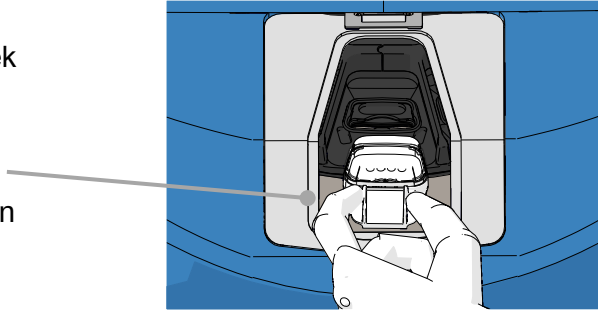

6. 5. adımı tekrarlayarak TÜM kültür kaplarının çıkarıldığını tekrar kontrol edin.

7. Vitrolife destek ekibiyle görüşün:

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika: +45 7023 0500
Amerika kıtası: +1 888-879-9092
Japonya ve Pasifik bölgesi: +81(0)3-6459-4437
Asya: +86 10 6403 6613

10 Teknik özellikler

Özelliklere dair ek bilgi, bu kılavuzdaki ilgili bölümlerde bulunmaktadır.

İnkübatör:

- Kapasite: Her birinde 16 (EmbryoSlide+) ya da 8 (EmbryoSlide+ ic8) embriyo bulunan 15 kültür kabı (diğer bir ifadeyle toplam 240 embriyoya kadar).
- Sıcaklık aralığı: 36 °C – 39 °C. Sıcaklık ayar noktası 0,1 °C'lik adımlarla ayarlanabilir.
- İnkübasyon sırasında sıcaklık doğruluğu: +/- 0,2 °C.
- CO₂ aralığı:
 - %3 – %8 (seri numarası 4343'ten küçük inkübatörler, 4325-4327 hariç).
 - %3 – %12 (seri numarası 4325-4327 ile 4343 olan ve daha büyük inkübatörler).CO₂ ayar noktası, %0,1'lik adımlarla ayarlanabilir.
- CO₂ doğruluğu: +/- %0,3.
- O₂ aralığı: %4 – %8 (O₂ regülasyonu ile) ya da ortam (O₂ regülasyonu olmadan). O₂ ayar noktası, %0,1'lik adımlarla ayarlanabilir.
- O₂ doğruluğu: +/- %0,5.
- Gösterilen değerlerin doğruluğu: %0,1, 0,1 °C, 0,1 bar.

Alarmlar, uyarılar ve bildirimler:

- **Alarmlar** (harici alarm sistemine iletilen yüksek öncelikli alarmlar):
 - **Sıcaklık alarmı:** Sıcaklık, ayar noktasından +/- 0,2 °C farklı olduğunda hemen inkübatör ekranında gösterilir.

İnkübatörün ilk çalıştırılmasından sonraki 30 dakika içinde sıcaklık alarmı devreye girmez.
 - **CO₂ konsantrasyonu alarmı:** CO₂ konsantrasyonu ayar noktasından +/- %0,3 farklı olduğunda hemen inkübatör ekranında gösterilir.

Yükleme kapağının açılmasından sonraki 5 dakika boyunca CO₂ konsantrasyonu alarmı verilmez.

İnkübatörün ilk çalıştırılmasından sonraki 30 dakika içinde CO₂ konsantrasyonu alarmı devreye girmez.
 - **O₂ konsantrasyonu alarmı:** O₂ konsantrasyonu ayar noktasından +/- %0,5 farklı olduğunda hemen inkübatör ekranında gösterilir.

Yükleme kapağının açılmasından sonraki 5 dakika boyunca O₂ konsantrasyonu alarmı verilmez.

İnkübatörün ilk çalıştırılmasından sonraki 30 dakika içinde O₂ konsantrasyonu alarmı devreye girmez.

- **O₂, N₂'ye bağlı alarmı:** Bir oksijen tüpü yanlışlıkla nitrojen girişine bağlandığında ve buna bağlı olarak O₂ konsantrasyonu %25'i geçtiğinde inkübatör ekranında görüntülenir.
- **EmbryoScope+ inkübatörün çalışma koşullarını kontrol eden ünitenin arızalanması**
- **Tüm inkübatörün elektriğinin kesilmesi**
- **Uyarılar** (harici alarm sistemine iletilen düşük öncelikli alarmlar):
 - **Görüntü çekimi uyarısı:** Görüntü çekimi durdu. Harici alarm sistemi, 60 dakika içinde etkinleştirilecektir. Mutlak gecikme spesifik duruma bağlıdır.
 - **Yükleme kapağı uyarısı:** Yüklem kapağı 30 saniyeden uzun bir süre için açık kaldı.
 - **CO₂ basıncı uyarısı:** CO₂ basıncı 0,2 bar'dan düşük olduğunda 3 dakika sonra inkübatör ekranında gösterilir.
 - **N₂ basıncı uyarısı:** N₂ basıncı 0,2 bar'dan düşük olduğunda 3 dakika sonra inkübatör ekranında gösterilir.
 - **Sıcaklık sensörü uyarısı:** Sıcaklık sensörlerinden biri düzgün çalışmadığında inkübatör ekranında gösterilir (harici alarmı *etkinleştirmez* ya da sesli sinyal vermez).
- **Bildirim** (harici alarm sistemine *iletilmez*):
 - ES server ile bağlantı yok.

Hava akışı:

- Devridaim: > 100 l/saat (gaz hacminin her 6 dakikada bir tam olarak filtreleyen tam VOC HEPA filtrelemesi).
- VOC HEPA filtresi > 0,3 µm parçacıkların %99,97'sini tutar.
- Aktif karbon filtre, uçucu organik bileşikleri (VOC) tutar.

Embriyo görüntüleri:

- Görüntüler 12-bitlik monokrom CMOS kamera tarafından 2048 x 1088 (2,2 MP) piksel çözünürlükte çekilir.
- Özel yapım, yüksek kalite, 16x, 0,50 N.A. LWD Hoffman Modulation Kontrast objektif, µm başına 3 piksel çözünürlük sağlar.
- Aydınlatma: tek kırmızı LED (627 nm, görüntü başına süre ≤ 0,02 saniye).
- Toplam ışık pozlama süresi: embriyo başına günlük < 40 saniye.
- Görüntü almalar arasındaki süre: 10 dakika döngü süresi.

Diğer bilgiler:

- Güç kaynağı voltajı: 230 VAC.
- Güç kaynağı frekansı: 50 Hz – 60 Hz.
- Maksimum güç tüketimi: 250 VA.
- Tipik güç tüketimi: 95 VA.
- Gaz gereklilikleri: medikal sınıf CO₂.
- Opsiyonel gaz: medikal sınıf N₂.
- Maksimum N₂ tüketimi: 5 l/sa. Tipik tüketim: 2 l/sa ila 3 l/sa.
- Maksimum CO₂ tüketimi: 2 l/sa. Tipik tüketim: 0,5 l/sa.
- Boyutlar (En x Derinlik x Boy): 55 x 60 x 50 cm.
- Ağırlık: 50 kg.
- Inkübatörün IP sınıfı IPX0'dır: Su girmesine karşı korumalı değildir.
- Şebeke güç kablosu: maksimum 3 metre, minimum 250 VAC, minimum 10 A.

Kabloların ve maksimum uzunluklarının listesi:

Adı	Kategori	Tür	Maksimum uzunluk
Harici alarm	Sinyal	Korumalı* Korumasız**	25 metre
AC şebeke	AC elektrik	Korumasız	3 metre
Ethernet (CAT6)	Telekom	Korumalı	30 metre
Harici kayıt sistemi	Sinyal	Korumasız	30 metre

* Seri numarası 4000'den küçük inkübatörler. ** Seri numarası 4000'den büyük inkübatörler.

Kutupların yalıtımı:

- Tüm kutupların eş zamanlı olarak yalıtımı, inkübatör arkasındaki ana güç anahtarı kullanılarak EmbryoScope+ inkübatörün kapatılmasıyla veya güç kaynağı kablusunun güç kaynağı yuvasından çıkarılmasıyla elde edilir.

Kurulum:

- EmbryoScope+ inkübatörün kurulumu ve servisi (düzeltici ve planlı), sadece Vitrolife tarafından yetkilendirilmiş kişi tarafından yürütülmelidir. Kurulum talimatları, *Planned service and maintenance* (Planlı servis ve bakım) başlıklı kılavuzda yer almaktadır (sadece İngilizce dilinde).

Çalıştırma sırasında ortam koşulları:

- Ortam sıcaklığı: 20 °C ila 28 °C.
- Bağıl nem: %0 ila %85.
- Çalıştırma rakımı:
 - Deniz seviyesinin < 2.000 m üstünde (seri numarası 4343'ten küçük inkübatörler, 4325-4327 hariç).
 - Deniz seviyesinin < 3.000 m üstünde (seri numarası 4325-4327 ile 4343 olan ve daha büyük inkübatörler).

Saklama ve nakliye sırasında ortam koşulları:

- Sıcaklık: -10 °C ila +50 °C.
- Bağıl nem: %30 ila %80.

Teslim alındığında, tüm nakliye kutularının nakliye sırasındaki hasar bulguları açısından incelenmesi gerekmektedir. Kutuların hasar görmesi halinde ek talimatlar için hemen Vitrolife ile iletişime geçin. Kutuları AÇMAYIN. EmbryoScope+ inkübatörü, Vitrolife tarafından yetkilendirilmiş bir kişi tarafından kurulana kadar nakliye sandıklarında, kuru ve güvenli bir yerde muhafaza edin.

EMC bağıışıklık testi seviyelerinin aşılması durumunda davranış:

İnkübatör test edilen seviyeleri aşan EMC bağıışıklık seviyelerine maruz kalırsa, arızalar ve dengesizlikler oluşabilir, ör. alarmlar ve ekranın yanıp sönmesi.

Sigortalar:

Sigorta kodu	Kesme kapasitesi	Çalıştırma hızı ve akımı	Sıcaklık	Minimum voltaj (AC)	Bileşen	Littelfuse parça no.
FH1	10 kA/ 125 VAC	Orta 1 A	Yok	125 V	Kapak kilidi	0233 001
FH2	10 kA/ 125 VAC	Orta T2 A	Yok	125 V	Motorlar	0233 002
FH3	10 kA/ 125 VAC	Orta T5 A	Yok	125 V	İnkübatör 24 V	0233 005
FH4	10 kA/ 125 VAC	Orta T2 A	Yok	125 V	İnkübatör 12 V	0233 002
FH5	10 kA/ 125 VAC	Orta 2,5 A	Yok	125 V	PC	0233 02,5
FH6	10 kA/ 125 VAC	Orta 2,5 A	Yok	125 V	Dahili 12 V	0233 02,5
Termal sigorta	8A endüktif	Yok	72 °C	250 V	Komple ünite	Termodisk G4A01072C
Ana sigortalar	35 A/ 250 VAC	Yavaş 3,15 A	Yok	250 V	Komple ünite	0213315MXP

11 EMC ve Yüksek Frekans (HF) teknik değerlendirmesi

Medikal elektrikli cihaz, EMC ile ilişkili özel önlemler gerektirir ve bu bölümde verilen EMC bilgileri doğrultusunda kurulup servise alınması gerekir.

UYARI
- Sistem üreticisi tarafından iç bileşenlerin yedek parçaları olarak satılan transdüktörler ve kablolar istisna olmak üzere belirtilenler dışında aksesuarların, transdüktörlerin ve kabloların kullanılması emisyonların artmasına ya da cihaz veya sistemin bağışıklığının azalmasına neden olabilir. - EmbryoScope+ inkübatör diğer cihazlarla bitişik ya da üst üste yerleştirilerek kullanılmamalıdır. Eğer bitişik ya da üst üste yerleştirilerek kullanılması gerekiyorsa, inkübatörün, kullanılacağı yapılandırmada normal çalıştığının kontrol edilmesi gerekmektedir.

11.1 Elektromanyetik emisyonlar

Aşağıdaki tabloda, CISPR11 sistemleri için gerekli bilgiler verilmektedir:

Yönlendirme ve üreticinin beyanı – elektromanyetik emisyonlar		
EmbryoScope+ inkübatör, aşağıda belirtilen ev sağlık bakım ortamında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. EmbryoScope+ inkübatör müşterisi ya da kullanıcısının, cihazın bu tür bir ortamda kullanılmasını sağlaması gerekmektedir.		
Emisyon testi	Uyum	Elektromanyetik ortam – yönlendirme
İletilen emisyon EN/CISPR 11:2010	Grup 1	EmbryoScope+ inkübatör RF enerjisini sadece kendi dahili işlevleri için kullanır. Dolayısıyla RF emisyonları çok düşüktür ve yakındaki elektronik cihazlarda girişime neden olması beklenmez. EmbryoScope+ inkübatör, ev ortamında ve doğrudan evsel amaçlar doğrultusunda binalara elektrik sağlayan, kamuya ait düşük voltajlı elektrik şebekesine bağlı olanlar dahil olmak üzere her türlü mekanda kullanılmaya uygundur.
RF emisyonları EN/CISPR 11:2010	Sınıf B	
Harmonik emisyonlar IEC 61000-3-2:2009	Sınıf A	
Voltaj dalgalanmaları (titreşim emisyonu) IEC 61000-3-3:2013	Uyum	

11.2 Elektromanyetik bağışıklık

Yönlendirme ve üreticinin beyanı – elektromanyetik bağışıklık EmbryoScope+ inkübatör, aşağıda belirtilen ev sağlık bakım ortamında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. EmbryoScope+ inkübatör müşterisi ya da kullanıcısının, cihazın bu tür bir ortamda kullanılmasını sağlaması gerekmektedir.			
Bağışıklık testi	IEC 60601 test seviyesi	Uyum seviyesi	Elektromanyetik ortam – yönlendirme
Elektrostatik boşalma (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV kontak ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV hava	± 8 kV kontak ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV hava	Zeminlerin ahşap, beton ya da seramik döşeme olması gerekmektedir. Zeminler sentetik bir malzeme ile kaplıysa göreceli nem en az %30 olmalıdır.
Elektrik hızlı geçişi/yükselmesi IEC 61000-4-4:2012	± 2 kV, elektrik besleme hatları için ± 1 kV, giriş/çıkış hatları için	± 2 kV, elektrik besleme hatları için ± 1 kV, giriş/çıkış hatları için	Şebeke elektriği kalitesi tipik ticari ya da hastane ortamına uygun olmalıdır.
Dalgalanmalar IEC 61000-4-5:2005	± 0,5 kV, ± 1 kV hatlar arası ± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV hat ile toprak arası	± 0,5 kV, ± 1 kV hatlar arası ± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV hat ile toprak arası	Şebeke elektriği kalitesi tipik ticari ya da hastane ortamına uygun olmalıdır.
Elektrik besleme girişi hatlarındaki voltaj düşüşleri, kısa kesintiler ve voltaj değişimleri IEC 61000-4-11:2004	Test Edilen Ekipman (EUT): 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° ve 315°de 0,5 döngü için giriş voltajının %0'a düşürülmesi	Sonuç: PASS: Çalışmada bir değişim yok. Sistem güvenli kaldı.	Şebeke elektriği kalitesi tipik ticari ya da hastane ortamına uygun olmalıdır. EmbryoScope+ inkübatör kullanıcısının, elektrik kesintileri sırasında çalışmaya devam etmesi gerekiyorsa inkübatöre bir kesintisiz güç kaynağı ya da batarya ile güç verilmesi önerilmektedir. Test sırasında EUT güvenliydi.
	0°de 1 döngü için giriş voltajının %0'a dönüştürülmesi	PASS: Çalışmada bir değişim yok. Sistem güvenli kaldı.	
	0°de 30 döngü için giriş voltajının %70'e düşürülmesi	PASS: Çalışmada bir değişim yok. Sistem güvenli kaldı.	
	300 döngü için giriş voltajının %0'a düşürülmesi	PASS: Sistem, testten sonra normal çalıştığı sürece kapanmasına izin verilir.	
Elektrik frekansı (50/60 Hz) manyetik alan IEC 61000-4-8:2009	30 A/m	30 A/m PASS: Çalışmada bir değişim yok. Sistem güvenli kaldı.	Güç frekansı manyetik alanlarının, tipik ticari ya da hastane ortamı için gerekli özellik seviyelerinde olması gerekmektedir.

Aşağıdaki iki tabloda, sadece korumalı ortamlarda kullanılması gereken ya da hayat destek özelliği olmayan sistemler dışındaki bir sistem için gerekli bilgiler verilmektedir.

Yönlendirme ve üreticinin beyanı – elektromanyetik bağışıklık EmbryoScope+ inkübatör, aşağıda belirtilen ev sağlık bakım ortamında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. EmbryoScope+ inkübatör müşterisi ya da kullanıcısının, cihazın bu tür bir ortamda kullanılmasını sağlaması gerekmektedir.			
Bağışıklık testi	IEC 60601 test seviyesi	Uyum seviyesi	Elektromanyetik ortam – yönlendirme
İletilen RF IEC 61000-4-6:2013	3 Vrms 150 kHz ila 80 MHz ISM'de 6 Vrms ve 150 kHz ila 80 MHz arasında amatör radyo bantları	3 Vrms 150 kHz ila 80 MHz ISM'de 6 Vrms ve 150 kHz ila 80 MHz arasında amatör radyo bantları	EUT, test sırasında normal çalışma modunda ve alarm modunda güvenliydi. Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanının, kablolar da dahil olmak üzere EmbryoScope+ inkübatörün herhangi bir parçasının uygulanan test seviyesi mesafesine karşılık gelen 0,3 metreden daha yakın mesafede kullanılmaması tavsiye edilir. Aksi takdirde, EmbryoScope+ inkübatörün performansı düşebilir.
Yayılan RF IEC 61000-4-3:2006 + A1:2007 + A2:2010	10 V/m 80 MHz ile 2,7 GHz arası	10 V/m 80 MHz ile 2,7 GHz arası	RF vericilerden, elektromanyetik saha araştırması ¹ ile tespit edilen alan kuvvetlerinin, her frekans aralığındaki uyum seviyesinden düşük olması gerekmektedir.
Yayılan RF IEC 61000-4-3:2006 + A1:2007 + A2:2010 – RF kablolu iletişim ekipmanına olan yakınlık alanları	TETRA 400	385 MHz, PM, 18 Hz, 1,8 W, 27 V/m	
	GMRS 460 FRS 460	450 MHz, FM, ± 5 kHz dev, 1 kHz sine, 2 W, 28 V/m	
	LTE Band 13 LTE Band 17	710/745/780 MHz, PM, 217 Hz, 0,2 W, 9 V/m	
	GSM 800 GSM 900 TETRA 800 iDEN 820 CDMA 850 LTE Band 5	810/870/930 MHz, PM, 18 Hz, 2 W, 28 V/m	
	GSM 1800 CDMA 1900 GSM 1900 DECT LTE Band 1 LTE Band 3 LTE Band 4 LTE Band 25	1720/1845/1970 MHz, PM, 217 Hz, 2 W, 28 V/m	

Yönlendirme ve üreticinin beyanı – elektromanyetik bağışıklık

EmbryoScope+ inkübatör, aşağıda belirtilen ev sağlık bakım ortamında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. EmbryoScope+ inkübatör müşterisi ya da kullanıcısının, cihazın bu tür bir ortamda kullanılmasını sağlaması gerekmektedir.

Bağışıklık testi		IEC 60601 test seviyesi	Uyum seviyesi	Elektromanyetik ortam – yönlendirme
	Bluetooth WLAN 802.11 b WLAN 802.11 g WLAN 802.11 n RFID 2450 LTE Band 7	2450 MHz, PM, 217 Hz, 2 W, 28 V/m	2450 MHz, PM, 217 Hz, 2 W, 28 V/m	
	WLAN 802.11 a WLAN 802.11 n	5240/5500/5785 MHz, PM, 217 Hz, 0,2 W, 9 V/m	5240/5500/5785 MHz, PM, 217 Hz, 0,2 W, 9 V/m	
NOT 1	80 MHz ve 800 MHz'de, daha yüksek olan frekans aralığı geçerlidir.			
NOT 2	Bu kurallar her durum için geçerli değildir. Elektromanyetik yayılım, yapılar, nesneler ve insanların neden olduğu emilim ve yansılardan etkilenir.			
1	Telsiz (hücresel/kablosuz) telefonlar ve karasal mobil telsizler, amatör telsizler, AM ve FM radyo yayınları ve TV yayınları gibi sabit vericilerden gelen alan kuvvetleri, teorik olarak doğru biçimde tahmin edilemez. Sabit vericilerin neden olduğu elektromanyetik ortamı değerlendirmek için bir elektromanyetik saha araştırmasının yapılması düşünülebilir. EmbryoScope+ inkübatörün kullanıldığı yerdeki ölçülen alan kuvveti, yukarıda verilen ilgili RF uyum seviyesini geçiyorsa EmbryoScope+ inkübatörün normal çalıştığı kontrol edilmelidir. Anormal çalışma gözlenirse, sistemin yeniden yönlendirilmesi ya da başka yere alınması gibi ek önlemler gerekli olabilir.			

Taşınabilir ve mobil RF iletişim cihazı ile EmbryoScope+ inkübatör arasındaki önerilen ara mesafeler

EmbryoScope+ inkübatör, yayılan RF bozulmalarının kontrol altında olduğu bir elektromanyetik ortamda çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Müşteri ya da EmbryoScope+ inkübatörün kullanıcısı, taşınabilir RF iletişim cihazları (vericiler) ile EmbryoScope+ sistemi arasında, iletişim cihazının maksimum çıkış gücüne göre aşağıda önerilen minimum mesafeyi koruyarak elektromanyetik girişimin önlenmesine yardımcı olabilirler.

Vericinin [W] nominal maksimum çıkış gücü (P)	Vericinin frekansına [m] göre minimum ayırma mesafesi (d)	
	@ Bağışıklık test seviyesi (E) 3 V/m, 0,15-80 MHz	@ Bağışıklık testi (E) 10 V/m, 80-2700 MHz
0,06	0,49	0,15
0,12	0,69	0,21
0,25	1,00	0,30
0,5	1,41	0,42
1	2,00	0,60
2	2,83	0,85

Hesaplama: $d = \frac{6 * \sqrt{P}}{E}$

Yukarıda listelenmeyen bir maksimum nominal çıkış gücüne sahip vericiler için, önerilen metre (m) cinsinden ayırma mesafesi (d), vericinin frekansı için geçerli denklem kullanılarak tahmin edilebilir; burada P, verici üreticisine göre vericinin watt (W) cinsinden maksimum nominal çıkış gücüdür.

80 MHz'de, daha yüksek frekans aralığı için ayırma mesafesi geçerlidir.

Bu kurallar her durum için geçerli değildir. Elektromanyetik yayılım, yapılar, nesneler ve insanların neden olduğu emilim ve yansımalarından etkilenir.

12 Aksesuarlar ve malzemeler

EmbryoScope+ inkübatörün çalıştırılması için aşağıdaki cihazlar ve malzemeler gereklidir:

- Kültür kapları (kültür kapları için kullanım kılavuzuna bakın)
- EmbryoViewer
- Parçacık bırakmayan pamuklu çubuklar (bkz. bölüm 5)
- Parçacık bırakmayan peçeteler
- %70'lik sulandırılmış etanol çözeltisi (bkz. bölüm 5.1)
- Laboratuvar kurallarına uygun bir dezenfektan (bkz. bölüm 5.2)
- Proba bağlı yüksek hassasiyetli termometre (bkz. bölüm 4.1.3)
- Gaz analiz cihazı (bkz. bölüm 4.1.5.2)
- CO₂'ye erişim (medikal kalite)
- Opsiyonel: N₂'ye erişim (medikal sınıf).

İnkübatörü kalibre ederken kullanılan termometre ve gaz analiz cihazının inkübatörün kendisinde belirtilen değerler kadar ya da daha fazla doğruluk sunuyor olması gerekmektedir, yani:

- Yüksek hassasiyetli termometre için 36 °C ile 39 °C arasında önerilen doğruluk: +/- 0,2 °C
- CO₂ gaz analiz cihazı için %3 - %8 ya da %3 - %12 aralığında önerilen doğruluk (bkz. bölüm 10): +/- %0,3
- O₂ gaz analiz cihazı için %4 ile %8 arasında önerilen doğruluk: +/- %0,5.

13 Planlı servis ve bakım

13.1 Planlı servis

Burada belirtilen öğelerin tümü (klinik personeli tarafından da değiştirilebilen VOC HEPA filtresi hariç) aşağıdaki tabloda belirtilen aralıklara uygun olarak Vitrolife tarafından onaylanan bir kişi tarafından incelenecek ve değiştirilecektir:

Değiştirilebilir öğe	Açıklama	Servis aralığı (yıl)	Değiştiren
VOC HEPA filtresi	Filtre tepsisinin altında yer alan VOC HEPA filtresi (servis kapağının altında)	0,5	Onaylı servis personeli ya da klinik personeli (servis ziyaretleri dışında)
O ₂ sensörü	1 x sensör, gaz devridaim ünitesinde	0,5* 3**	Onaylı servis personeli
UV lambası	Dahili UV lambası, gaz devridaim ünitesine yerleştirilen (100 V inkübatörlerde UV lambası takılmaz)	1	Onaylı servis personeli
Gaz devridaim fanı	Gaz devridaim ünitesine takılı fan	5	Onaylı servis personeli
Orantılı valfler	Dahili valfler, inkübatör adaptör plakasına yerleştirilen	6	Onaylı servis personeli
12 V güç besleme ünitesi	Dahili 12 V güç besleme ünitesi	5,5	Onaylı servis personeli

Servis aralığı, inkübatör seri numaralarına göre değişiklik gösterir. Bunlar * (4000'den küçük inkübatör seri numaraları) ve ** (4000'den büyük inkübatör seri numaraları) ile gösterilmiştir.

Planlanan servis görevlerini gerçekleştirmek için en az altı ayda bir (seri numarası 4000'in altındaki inkübatörler için) veya 12 ayda bir (seri numarası 4000'in üzerindeki inkübatörler için) bir servis ziyareti planlanması önerilir. Bir servis ziyareti planlama zamanı geldiğinde klinik PC ekranında bilgilendirilecektir.

Değiştirilebilir parçaların servisinin nasıl yapılacağıyla ilgili daha fazla bilgi için *Planned service and maintenance* (Planlı servis ve bakım) kılavuzuna bakın (sadece İngilizce dilinde).

Vitrolife tarafından yetkilendirilmiş personel, her servis ziyareti sırasında, rutin kalibrasyon kontrollerini de gerçekleştirecektir. Bu kontroller, klinik tarafından gerçekleştirilen düzenli bakım görevlerinin yerini almaz (bkz. bölüm 13.2).

13.2 Planlı bakım


Vitrolife tarafından onaylanan kişi tarafından gerçekleştirilen servis görevlerine ek olarak düzeli aralıklarla ya da gerektiğinde aşağıdaki bakım görevlerini gerçekleştirmek kliniğin sorumluluğundadır:

- Doğrulama ve gerekiyorsa dahili sensörlerin kalibrasyonu (bkz. bölüm 4.1.4.2 ve 4.1.5.3).
Frekans: Her iki haftada bir.
- Inkübatörün temizlenmesi ve dezenfeksiyonu (bkz. bölüm 5.1 ve 5.2).
Frekans: Gerektiğinde.
- VOC HEPA filtresinin servis ziyaretleri dışında değiştirilmesi (bkz. bölüm 6).
Frekans: Her altı ayda bir.

13.2.1 Maintenance (Bakım) ekranı

Maintenance (Bakım) ekranında aylık inkübasyon raporu oluşturabilir, harici alarm sisteminin amacına uygun çalıştığından emin olmak için bir harici alarm simüle edebilir ve VOC HEPA filtresine ve sensör doğrulama ayarlarına erişebilirsiniz.

Maintenance (Bakım) ekranını açmak için PC ana sayfa ekranındaki ayarlar simgesine basın ve ardından **Maintenance** (Bakım) düğmesine basın.

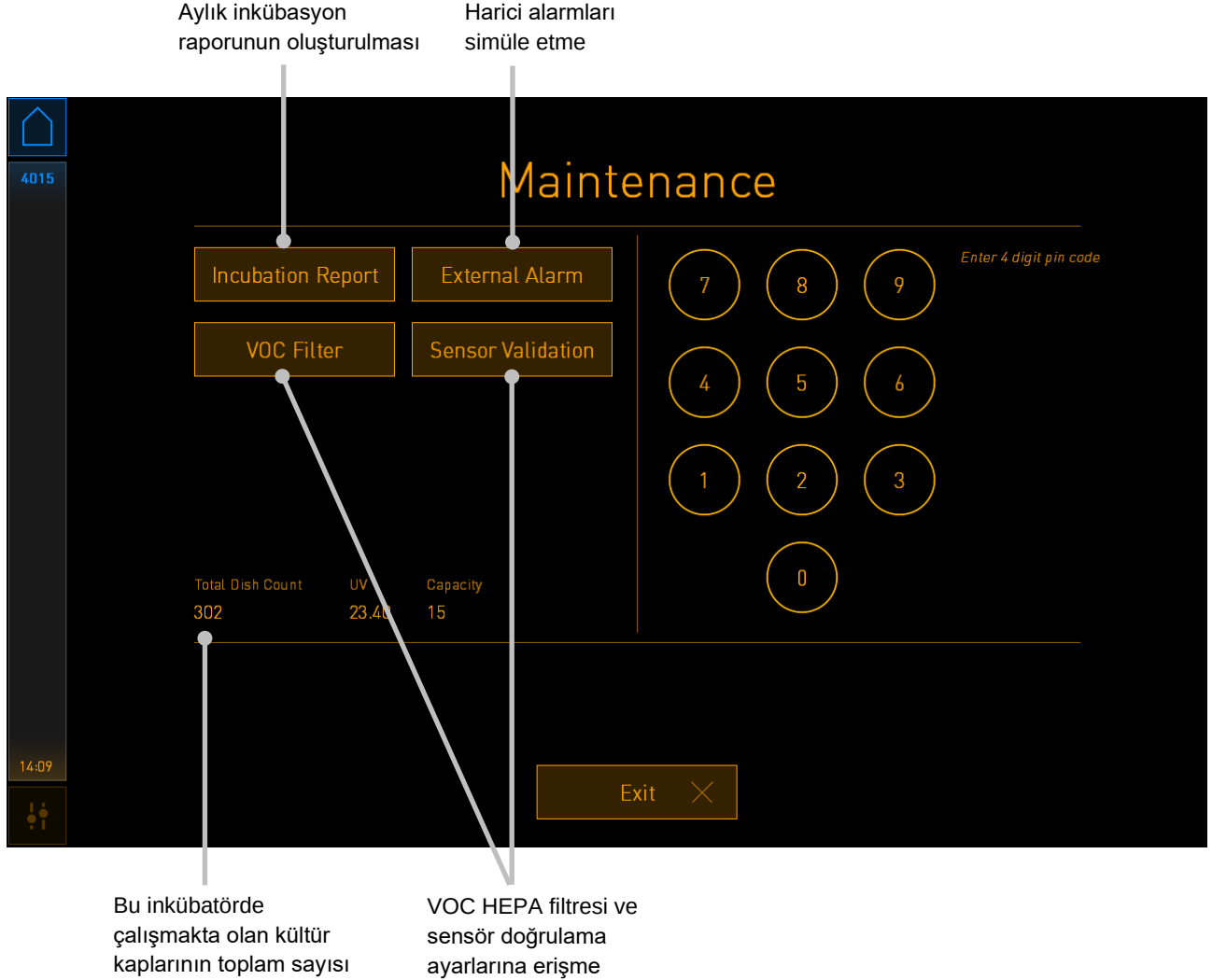

Ekranın sağ tarafındaki pin kodu Vitrolife personeli ile iş birliği içinde gerçekleştirilecek olan ileri bakım fonksiyonlarına erişim sağlar. Vitrolife, gerekli ise bir pin kodu düzenleyecektir.

Bakım modundan çıkmak için **Exit** (Çıkış) düğmesine basın ve **Settings** (Ayarlar) ekranına dönün.

13.2.2 Aylık inkübasyon raporu oluşturma

Aylık inkübasyon raporu oluşturmak için inkübatörün üst kısmındaki servis kapağının altında bulunan USB portuna (elinizdeki modelde varsa) temiz bir USB çubuğu yerleştirin ve **Incubation Report** (İnkübasyon raporu) düğmesine basın. Aşağıdaki ekran görüntülenir:



İnkübasyon raporu oluşturmak istediğiniz ayı seçin ve **Generate Report** (Rapor oluştur) düğmesine basın. Rapor hazır olduğunda bir onay gösterilir. Veriler inkübatörde 12 ay boyunca saklanır, dolayısıyla son 12 aya ait raporlar oluşturabilirsiniz.

Maintenance (Bakım) ekranına dönmek için **Exit** (Çıkış) düğmesine basın.

13.2.3 VOC HEPA filtresi ve sensör bakımı

Klinik, **VOC Filter and Sensor Maintenance** (VOC filtresi ve sensör bakımı) ekranında, VOC HEPA filtresinin değişimi için ya da dahili sensörleri doğrulamak için anımsatıcılar ayarlayabilir (A ve B sıcaklık sensörleri, CO₂ sensörü ve eğer klinik düşük O₂ konsantrasyonu ile inkübasyon yapıyorsa O₂ sensörü). Bu anımsatıcılar varsayılan olarak etkin değildir.


Maintenance (Bakım) ekranındaki **VOC Filter** (VOC filtresi) düğmesine ya da **Sensor Validation** (Sensör doğrulama) düğmesine basarak **VOC Filter and Sensor Maintenance** (VOC filtresi ve sensör bakımı) ekranını açın (PC ana sayfa ekranı -> **Settings** (Ayarlar) -> **Maintenance** (Bakım) düğmesi). İlgili onay düğmesine basarak seçeneklerden birini ya da her ikisini etkinleştirin:

The screenshot shows the 'VOC Filter and Sensor Maintenance' screen. It has a dark background with orange text and buttons. On the left, there is a sidebar with a home icon, the number '750', and a clock showing '16:14'. The main area contains two sections. The first section is titled 'Change VOC filter in:' and shows '180 days' with a button 'VOC Filter Changed'. Below it is a text input field for 'Enter new VOC filter serial number:' with the current value 'pouuytrewq'. The second section is titled 'Validate internal sensors every:' and shows '14 days' with a button 'Interval Changed'. At the bottom, there is a button 'Update maintenance information' and an 'Exit' button with a close icon. Annotations with lines pointing to specific elements are as follows: 'Anımsatıcıları etkinleştirin/devre dışı' points to the 'Enable warning' toggle for the filter change; 'VOC HEPA filtresi seri numarasını girin' points to the serial number input field; 'Sensörlerin doğrulanması için aralık belirleyin' points to the '14 days' input field.

VOC HEPA filtresinin değişim aralığı 180 gündür. VOC HEPA filtresi değiştirildiğinde yeni VOC HEPA filtresinin seri numarasını girmeniz istenir. Seri numarasını girin ve **VOC Filter Changed** (VOC filtresi değiştirildi) düğmesine basın.

NOT
180 günlük periyot, VOC HEPA filtresi anımsatıcısını etkinleştirdiğinizde ve VOC Filter Changed (VOC filtresi değiştirildi) düğmesine bastığınızda başlar.

VOC HEPA filtresinin değişim zamanı geldiğinde PC ana sayfa ekranında bir uyarı gösterilecektir:

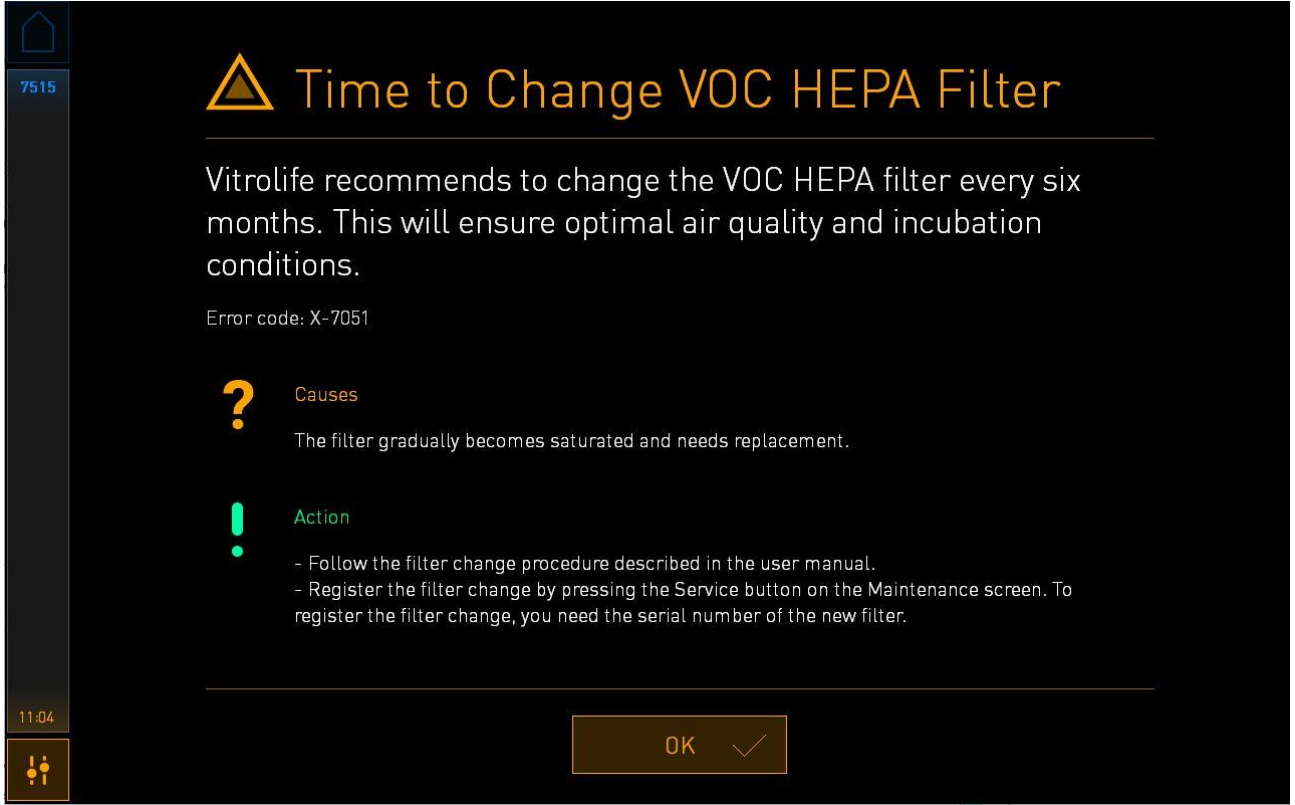


OK (Tamam) üzerine basarsanız uyarı kaybolacak ve üç gün boyunca saklı kalacaktır. Bu süre içinde VOC HEPA filtresini değiştirmezseniz uyarı kaybolacaktır. **OK (Tamam)** düğmesine istediğiniz kadar basabilirsiniz ancak filtre değiştirilene kadar uyarı her üç günde kaybolacaktır.

Uyarıyı silmek için VOC HEPA filtresini 6 bölümünde belirtildiği gibi değiştirin ve filtre değişimini **Action (Eylem)** altında ekranda kaydedin.

Dahili sensörlerin doğrulanması için varsayılan aralık 14 gündür. Bu periyot gerekirse klinik tarafından değiştirilebilir. Yeni aralığı girin ve **Interval Changed** (Değiştirilen aralık) düğmesine basın.

Dahili sensörlerin doğrulanma zamanı geldiğinde PC ana sayfa ekranında bir uyarı gösterilecektir:

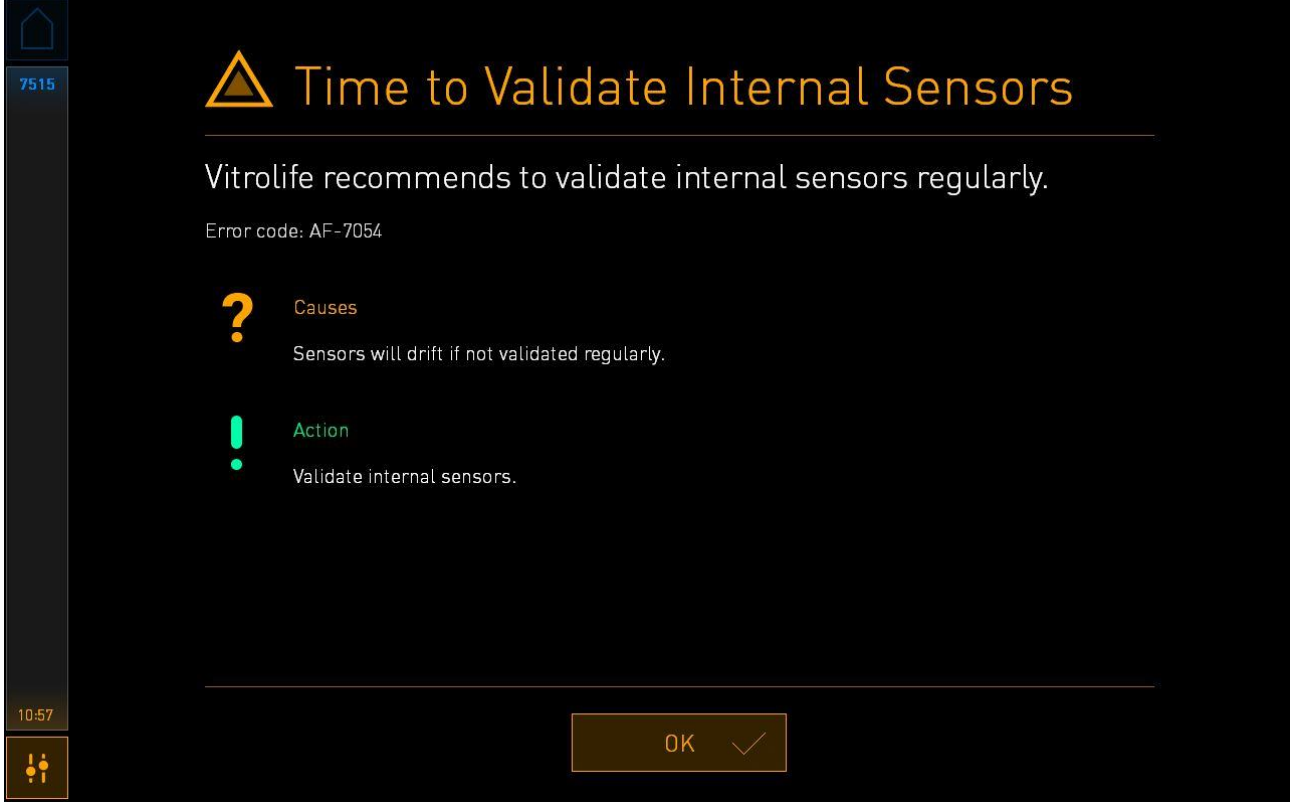

OK (Tamam) üzerine basarsanız uyarı kaybolacak ve üç gün boyunca saklı kalacaktır. Bu süre içinde sensörleri doğrulamazsanız uyarı kaybolacaktır. **OK** (Tamam) düğmesine istediğiniz kadar basabilirsiniz ancak sensörler doğrulanana kadar uyarı her üç günde kaybolacaktır.

Uyarıyı silmek için sensörleri 4.1.4.2 ve 4.1.5.3 bölümlerinde açıklandığı gibi doğrulayın ve gerekirse kalibre edin.

Bakım modundan çıkmak için **Exit** (Çıkış) düğmesine basın ve **Settings** (Ayarlar) ekranına dönün.

14 Semboller ve etiketler

14.1 Ürün bilgi etiketleri




Etiket	Açıklama	Not
	Model	Kullanıcı kılavuzunun ön sayfasına bakın.
	Model referans numarası	-
	Güç kaynağı türü	Bkz. bölüm 10.
	Cihazın (AB) 2017/745 sayılı Medikal Cihaz Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerini karşıladığını gösteren üretici beyanı	-
	Medikal cihaz	-
	Benzersiz cihaz tanımlayıcısı	-
	Maksimum güç tüketimi	Bkz. bölüm 10.
	Üreticinin adı ve adresi	Bkz. bölüm 16.
	Üretim yılı ve ayı	YYYY-AA
	İhracatçı ülke	-

Etiket	Açıklama	Not
	Seri numarası	Model-sürüm-ürün numarası
	Atılırken dikkat edin	Bkz. bölüm 15.
	Kullanım kılavuzuna bakın	-


14.2 Uyarı etiketleri

Etiket	Açıklama	Not
	Ürünün bir UV ışığı ile donatıldığı konusunda uyarır (P/N 16401, 16305 ve 16405 inkübatörlerde bağlı değildir)	İnkübatörün içindeki gaz sistemi üzerine (seri numarası 4000'den küçük inkübatör-lerde) veya içine (seri numarası 4000'den büyük inkübatörlerde) yerleştirilir.

14.3 Bağlantı etiketleri

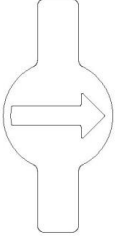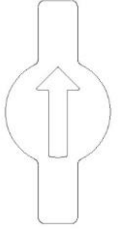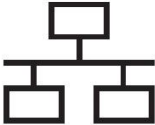Etiket		Açıklama	Not
		Gaz numunesi borusu kapalı	EmbryoScope+ inkübatörün önündeki gaz numunesi kapağının altında bulunur. Farklı inkübatör modellerinde farklı valf simgeleri bulunur.
		Gaz numunesi borusu açık	EmbryoScope+ inkübatörün önündeki gaz numunesi kapağının altında bulunur. Farklı inkübatör modellerinde farklı valf simgeleri bulunur.
Alarm		Harici alarm çıkışı yuvası	Bkz. bölüm 3.
CO2 Inlet Pressure Max 1 Bar (CO2 Girişi – Basınç Maks 1 Bar)		CO ₂ bağlantı girişi	Bkz. bölüm 3.
N2 Inlet Pressure Max 1 Bar (N2 Girişi – Basınç Maks 1 Bar)		N ₂ bağlantı girişi	Bkz. bölüm 3.
		Ethernet bağlantısı yuvası	Bkz. bölüm 3.
		USB bağlantısı yuvası	Bkz. bölüm 3.
Inc. data (ink. verileri)		Harici kayıt sistemi için bağlantı	Bkz. bölüm 3.
Replace with same type and rating (Aynı tip ve değerle değiştirin) 2 x T3, 15 A / 250 V		Sigorta değişim bilgileri	Bkz. bölüm 10.

14.4 Nakliye ambalajındaki etiketler

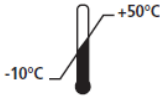Etiket	Açıklama	Not
	Kırılabilir	-
	Bu taraf yukarı	-
 Keep dry	Kuru tutun	-
 Temperature	Saklama sıcaklığı: Minimum: -10 °C Maksimum: 50 °C	°C
	Nem sınırı: Minimum: %30 Maksimum: %80	%
	Atmosferik basınç sınırı	kPa

15 Atıkların tahliyesi

Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarını minimuma indirmek için, atıkların 2018/849 sayılı AB Direktifi ile değiştirilmiş elektrikli ve elektronik ekipman atıklarına yönelik (WEEE) 2012/19/AB sayılı Direktife göre atılması gerekmektedir. Bu, şunları içerir: PCB'ler (kurşun içermeyen HASL), anahtarlar, bilgisayar bataryaları, baskılı devre kartları ve harici elektrik kabloları. Tüm bileşenler, yeni elektrikli ve elektronik bileşenlerin kurşun, cıva, kadmiyum, altı değerlikli krom, polibromine bifeniller (PBB) veya polibromine difenil eter içermediğini belirten 2011/65/AB sayılı RoHS 2 Direktifi ile uyumludur.

Yine de oksijen sensörü (seri numarası 4000'den küçük inkübatörlerde) ve UV lambasının (ürününüzde aktif olabilen veya olmayabilen), fiziksel durumları ne olursa olsun toksik bileşenler içerdiği unutulmamalıdır. Bu, yukarıda bahsedilen RoHS Direktifi maddeleriyle uyumludur.

Toksik içerik dikkate alınarak, oksijen sensörü ve UV lambası, yerel atık yönetimi gereklilikleri ve çevre mevzuatına göre atılmalıdır. Bunlar toksik gazlar açığa çıkarabildiğinden yakılmamalıdır.

16 İletişim bilgileri

Acil yardıma mı ihtiyacınız var? Destek için servis yardım hattımızı arayın:

+45 7023 0500

(7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz)

E-posta desteği: support.embryoscope@vitrolife.com

(iki iş günü içinde yanıt verilir)



Vitrolife A/S
Jens Juuls Vej 16
DK-8260 Viby J
Danimarka

Telefon: +45 7221 7900

Web sitesi: www.vitrolife.com

Vitrolife 

VITROLIFE A/S, DANİMARKA